

Manual Seated Scooter, Black
Trottinette manuelle avec siège, Noir
Escúter manual para uso sentado, Negro



**Step-by-Step
Assembly Guide**
**Guide d'assemblage
étape par étape**
**Guía de montaje
paso a paso**



Weight Capacity
Capacité de poids de
Capacidad de peso de
300 lbs (136 kg)

REF MDS86000SS

What's Included:



Manual Seated Scooter, Black
Trottinette manuelle avec siège, Noir
Escríter manual para uso sentado,
Negro



Manual Seated Scooter, Black
Trottinette manuelle avec siège, Noir
Escríter manual para uso sentado,
Negro



- A** Hand Brakes
- B** Hand Grips
- C** Brake Cable
- D** Handle Height Adjust Knob
- E** Basket
- F** Steering Column
- G** Locking Tiller Assembly Pin
- H** Seat Pad
- I** Rear Wheels
- J** Front Wheels
- K** Seat Cam Lock
- L** Seat Height Adjust Pin
- M** Allen Key
- N** Step-By-Step Assembly Guide
- O** Safety Guidelines

ATTENTION: This item does not come with a tire pump. A tire pump is needed to inflate tires. Check tire pressure routinely to ensure tires are inflated.

This guide applies to the following scooter:

Item Number	Description	Frame Color	Weight Capacity
MDS86000SS	Manual Seated Scooter	Black	300 lbs (136 kg)

First: Open and secure handle bar




- 1** Remove contents from carton and lay parts next to frame.



- 2** Turn front wheels to face forward so that tiller is on front of scooter.



- 3** Raise tiller to the upright position. Push locking tiller assembly pin in until you hear a click. Make sure steering column is secure.

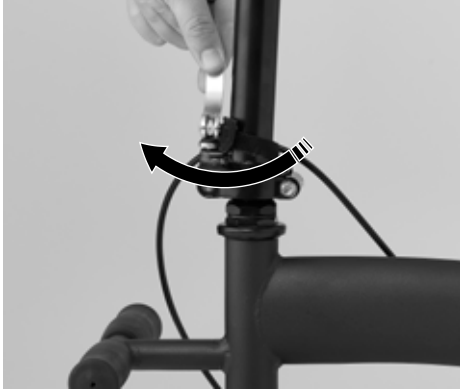

- 4** Rotate clockwise to tighten. Lift pin to upright position and push down tiller to secure.



- 5** Insert swivel lock screw into hole. Tighten using Allen key.



- 6** Insert handle bar into steering column with hand brake on front of scooter.



- 7** Adjust to desired height and insert Handle Height Adjust Knob. Turn clockwise until tightened.

Next: Set Desired Seat Pad Height



- 8** Lower the seat pad to desired height.



- 9** Insert the Seat Height Adjust Pin into the hole. Lock pin in place by sliding the loop over the protruding end of the pin.



- 10** Rotate the seat cam lock clockwise to tighten the lock pad into place. Fold close to frame.

Now: Using the Hand Brakes



- 11** Adjust brake cable to reduce loose slack and prevent from catching on objects.



- 12** To apply the brakes, simply pull the hand brake lever with your fingertips toward the hand grip.



- 13** To lock the brakes, push brake handle down until you hear a click.

Attaching Accessories



- 14** Attach basket to designated hook on steering column.

Adjusting The Seat Pad Height



15 Uninstall the locking seat height adjustment pin. Adjust seat pad to desired height.



16 Reinstall the locking seat height adjust pin and secure it in place. Next tighten the Seat Cam Lock to lock pad in place.

Finally: Adjust Handle Height



- 17** To adjust the handle height, loosen the handle height adjustment knob below the handle by turning it counterclockwise until it can be removed. Adjust the handlebar to the desired height and reinstall the handle height adjust pin by turning it clockwise until it is tightened.

To Fold the Scooter



- 18** Release the Seat Cam Lock and seat height adjust pin.



19 Lower the seat pad all the way.



20 Loosen Tiller Cam Lock.



21 To fold down the handlebars, slide assembly to the side until the tiller is disengaged.



- 22** Fold the handle bars down until it rests on the seat pad. To reduce wear on the seat pad, remove the handlebar height adjust knob and store in a safe place.

Contenu



Manual Scalet Scooter, Black
Trotinette manuelle avec siège, Noir
Escritor manual para uso sentado,
Negro



N

Manual Scalet Scooter, Black
Trotinette manuelle avec siège, Noir
Escritor manual para uso sentado,
Negro



O

- A** Freins à main
- B** Poignées
- C** Câble des freins
- D** Bouton de réglage de la hauteur des poignées
- E** Panier
- F** Colonne de direction

- G** Goupille de verrouillage du timon
- H** Siège coussiné
- I** Roues arrière
- J** Roues avant
- K** Verrou à came du repose-genou

- L** Goupille de réglage de la hauteur du repose-genou
- M** Clé Allen
- N** Guide d'assemblage étape par étape
- O** Consignes de sécurité

ATTENTION : Cet article n'est pas livré avec une pompe de pneu. Une pompe est nécessaire pour gonfler les pneus. Vérifier régulièrement la pression des pneus pour s'assurer qu'ils sont bien gonflés.

Ce guide concerne la trottinette suivante :

Numéro d'article	Description	Couleur du cadre	Capacité de poids
MDS86000SS	Trotinette manuelle avec siège	Noir	136 kg (300 lb)


Première étape : Déplier et fixer en place le guidon



- 1 Vider le contenu du carton et placer les pièces près du cadre.



- 2 Tournez les roulettes avant vers l'avant pour que la barre se trouve à l'avant de la trottinette.

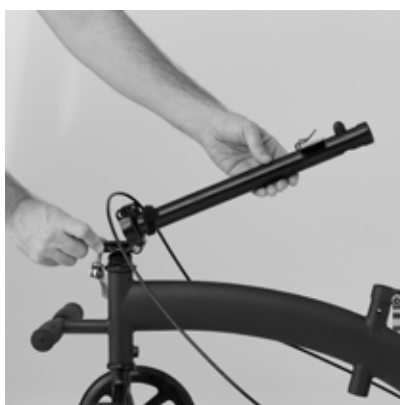

- 3 Relever le timon en position verticale. Enfoncer la goupille de verrouillage du timon jusqu'à ce qu'un clic se produise. S'assurer que la colonne de direction soit bien fixée.



- 4** Tourner dans le sens horaire pour serrer. Soulever le levier de la goupille en position verticale et appuyer sur le timon pour le fixer en place.



- 5** Insérer la vis du verrou pivotant dans le trou. Serrer à l'aide de la clé Allen.



- 6** Insérez la poignée dans la colonne de direction en veillant à ce que le frein à main se trouve à l'avant de la trottinette.



- 7** Régler à la hauteur désirée et insérer le bouton de réglage de la hauteur des poignées. Tourner le bouton dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré.

Ensuite : Réglez la hauteur du siège coussiné



- 8** Abaissez le siège coussiné à la hauteur souhaitée.



- 9** Insérer la goupille de réglage de la hauteur du repose-genou dans le trou. Verrouiller la goupille en plaçant la boucle sur l'extrémité saillante de la goupille.



- 10** Tourner le verrou à came du repose-genou dans le sens horaire pour bien fixer le repose-genou. Le rabattre contre le cadre.


Utiliser les freins à main



- 11** Réduire le mou du câble des freins pour l'empêcher de s'accrocher à des objets.



- 12** Pour actionner les freins, simplement serrer la poignée des freins à main du bout des doigts en direction des poignées.

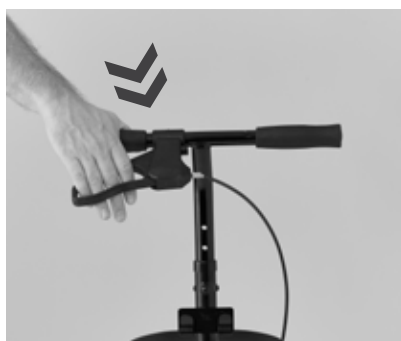

- 13** Pour bloquer les freins, appuyer sur la poignée des freins jusqu'à ce qu'un clic se produise.

Fixer les accessoires





- 14** Fixer le panier au crochet sur la colonne de direction.

Réglage de la hauteur du siège coussiné



- 15** Retirer la goupille de réglage de la hauteur du siège. Réglez la hauteur du siège coussiné.

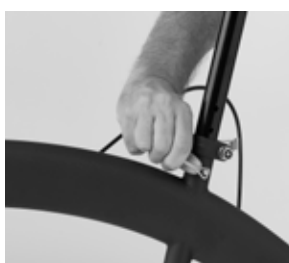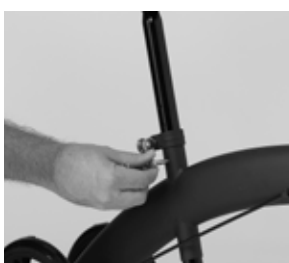

- 16** Remettre la goupille de réglage de la hauteur du repose-genou et la fixer en place. Ensuite, serrer le verrou à came du repose-genou pour bien fixer le repose-genou.

Dernière étape : Régler la hauteur des poignées



- 17** Pour régler la hauteur des poignées, desserrer le bouton de réglage de la hauteur des poignées situé en dessous des poignées en le tournant dans le sens antihoraire pour le retirer. Régler le guidon à la hauteur désirée et réinstaller le bouton de réglage de la hauteur des poignées en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

Pour replier la trottinette



- 18** Relâcher le verrou à came du repose-genou et la goupille de réglage de la hauteur du repose-genou.



19 Abaissez complètement le siège coussiné.



20 Desserrer le verrou à came du timon.



21 Pour rabattre le guidon, glisser le mécanisme de côté jusqu'à ce que le timon soit dégagé.



- 22** Abaissez la poignée jusqu'à ce qu'elle repose sur le siège coussiné. Pour réduire l'usure du siège, retirez le bouton de réglage de la hauteur de la poignée et rangez-le en lieu sûr.

Lo que se incluye:



Manual Scalet Scooter, Black
Trottinette manuelle avec siège, Noir
Escúter manual para uso sentado,
Negro



Manual Scalet Scooter, Black
Trottinette manuelle avec siège, Noir
Escúter manual para uso sentado,
Negro




- A** Frenos de mano
- B** Empuñaduras
- C** Cable de freno
- D** Perilla de ajuste de altura del manillar
- E** Cesta
- F** Columna de dirección
- G** Pasador de montaje para bloquear el poste de dirección
- H** Almohadilla del asiento
- I** Ruedas traseras
- J** Ruedas delanteras
- K** Leva de fijación del asiento
- L** Pasador de ajuste de altura del asiento
- M** Llave Allen
- N** Guía de montaje paso a paso
- O** Pautas de seguridad

ATENCIÓN: Este producto no se suministra con una bomba de neumáticos. Se necesita una bomba de neumáticos para inflar las ruedas. Revise la presión de los neumáticos de forma rutinaria para asegurarse de que estén inflados.

Esta guía rige para el siguiente andador:

Número de artículo	Descripción	Color del armazón	Capacidad de peso
MDS86000SS	Escúter manual para uso sentado	Negro	300 lb (136 kg)

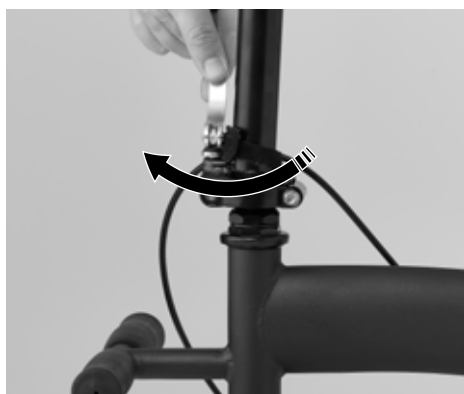

- 4** Gire en sentido horario para apretarla. Levante el pasador a la posición vertical y empuje el poste hacia abajo para asegurarlo.



- 5** Inserte el perno de fijación basculante en el orificio. Apriételo con la llave Allen.



- 6** Inserte el manillar en la columna de dirección con el freno de mano en la parte delantera del andador.




- 7** Ajústelo a la altura deseada e inserte la perilla de ajuste de altura del manillar. Gire en sentido horario para apretarla.

Luego: Fije la almohadilla del asiento a la altura deseada



- 8** Baje la almohadilla del asiento hasta la altura deseada.

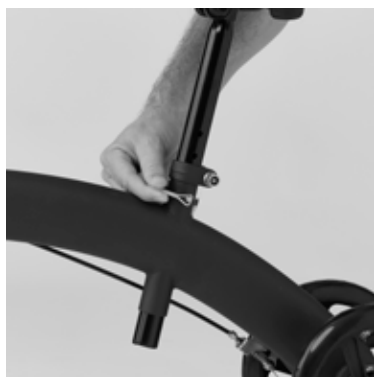

- 9** Inserte el pasador de ajuste de altura del asiento en el orificio. Bloquee el pasador en su lugar deslizando el bucle sobre el extremo sobresaliente del pasador.



- 10** Gire la leva de fijación del asiento en sentido horario para apretar la almohadilla de bloqueo en su sitio. Dóblela para que quede cerca del armazón.

Ahora: Uso de los frenos de mano



- 11** Ajuste el cable de freno para reducir la holgura y evitar que pueda engancharse con objetos.



- 12** Para accionar los frenos, simplemente tire de la palanca del freno de mano con los dedos hacia la empuñadura.



- 13** Para bloquear los frenos, empuje el freno de mano hacia abajo hasta escuchar un "clic".

Instalación de accesorios




- 14** Instale la cesta en el gancho previsto en la columna de dirección.

Ajuste de la altura de la almohadilla del asiento



- 15** Desinstale el pasador de bloqueo que permite ajustar la altura del asiento. Ajuste la almohadilla del asiento a la altura deseada.

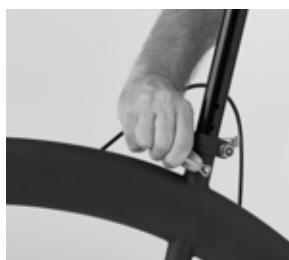

- 16** Vuelva a instalar el pasador de bloqueo de ajuste de altura del reposarrodillas y fíjelo en su sitio. Luego apriete la leva de fijación del asiento para bloquear la almohadilla en su lugar.

Finalmente: Ajuste de altura del manillar



- 17** Para ajustar la altura del manillar, afloje el perno de ajuste de altura que se encuentra debajo del manillar girándolo en sentido antihorario hasta que pueda retirarlo. Ajuste el manillar a la altura deseada y vuelva a instalar el perno de ajuste de altura girándolo en sentido horario hasta que quede apretado.

Para plegar el andador



- 18** Suelte la leva de fijación y el pasador de ajuste de altura del asiento.



19 Baje completamente la almohadilla del asiento.



20 Afloje la leva de fijación del poste.



21 Para plegar el manillar, deslice el conjunto hacia un lado hasta que el poste se desenganche.



- 22** Pliegue el manillar hacia abajo hasta que descansa sobre la almohadilla del asiento. Para reducir el desgaste en la almohadilla del asiento, retire la perilla ajustadora de la altura del manillar y guárdela en un lugar seguro.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA

Medline United States

1-800-MEDLINE (633-5463)

medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline Mexico

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us



Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. We reserve the right to correct any errors that may occur within this brochure. © 2022 Medline Industries, LP. All rights reserved. Medline is a registered trademark of Medline Industries, LP.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans cette brochure. © 2022 Medline Industries, LP. Tous droits réservés. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. La empresa se reserva el derecho de corregir cualquier error en la información publicada en este folleto. © 2022 Medline Industries, LP. Todos los derechos reservados. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP.

MDS86000SS | PIC-00918 (Rev: V1 022122)