

Medline Transport Chair
Fauteuil de transport Medline
Silla de transporte Medline




**Step-by-Step
Assembly Guide**
**Guide d'assemblage
étape par étape**
**Guía de montaje
paso a paso**



**Not made with Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de
caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.**

REF MDS808210KDR
REF MDS808200KDT
REF MDS808200KWM
REF MDS808200KNM

What's Included:

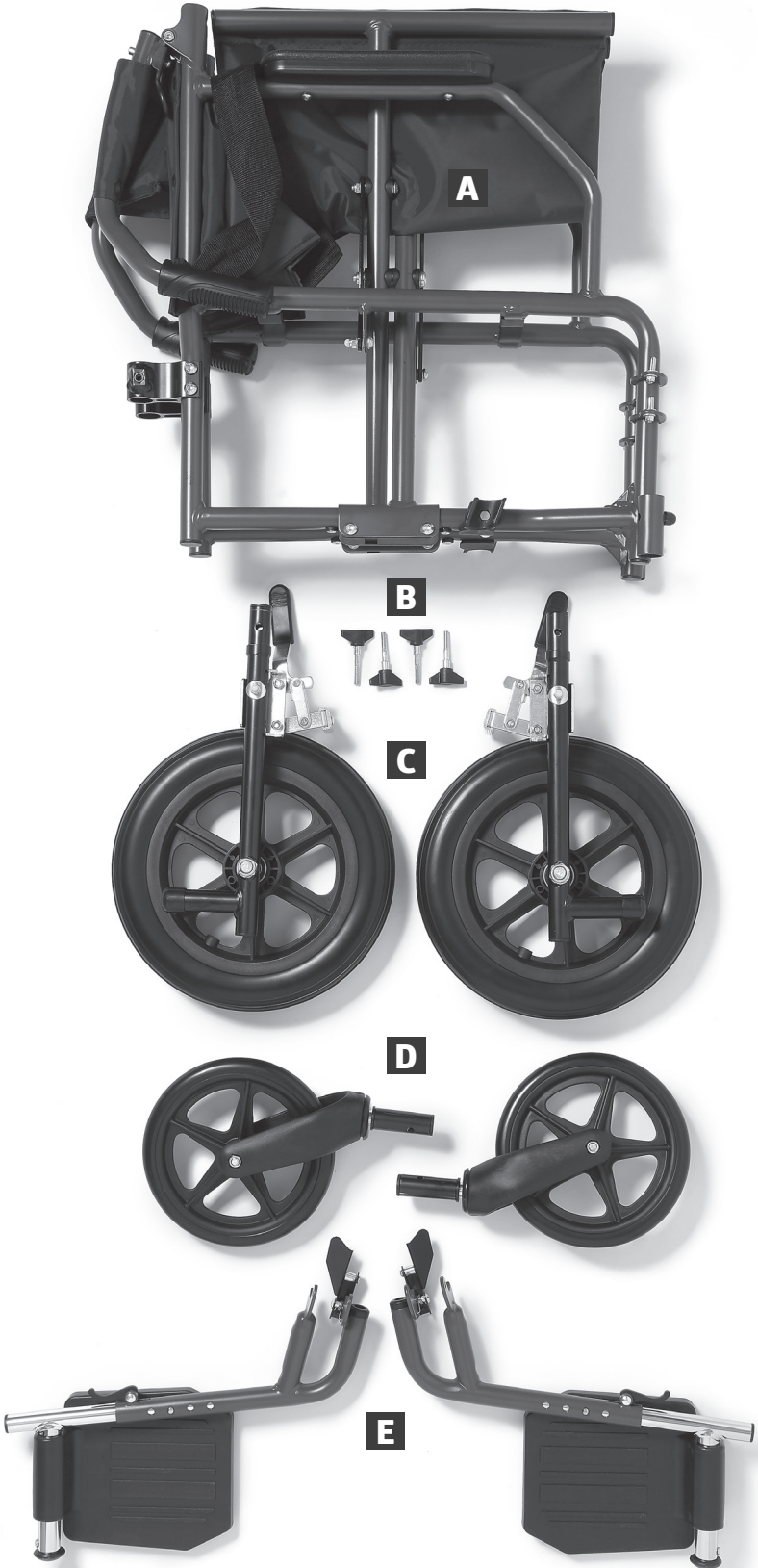



F



G

A Chair Frame
(with Stow-N-Go Clips)

B Hand Screws

C 2 Rear Wheels

D 2 Front Wheels

E 2 Footrests

F Step-By-Step
Assembly Guide

G General Warnings

This guide applies to the following chair:

Item Number	Description	Color	Weight Capacity
MDS808210KDR	Transport Chair, Lightweight Steel, 19" x 16" (48.2 x 40.6 cm) Seat, Swing-Away Footrests, Desk Length Arms, and Stow-N-Go Clips	Grey & Burgundy	300 lb (136 kg)
MDS808200KDT	Transport Chair, Lightweight Steel, 19" x 16" (48.2 x 40.6 cm) Seat, Swing-Away Footrests, Desk Length Arms, and Stow-N-Go Clips	Grey & Teal	300 lb (136 kg)
MDS808200KWM	Transport Chair, Lightweight Steel, 19" x 16" (48.2 x 40.6 cm) Seat, Swing-Away Footrests, Desk Length Arms, and Stow-N-Go Clips	White & Light Tan	300 lb (136 kg)
MDS808200KNM	Transport Chair, Lightweight Steel, 19" x 16" (48.2 x 40.6 cm) Seat, Swing-Away Footrests, Desk Length Arms, and Stow-N-Go Clips	Navy & Blue	300 lb (136 kg)

First: Open the Chair



With the seat in an upright position, place hands on either side of the arms of the chair and gently pull outward.



As the chair begins to open, press down firmly on the outer edges of the seat with both hands, keeping fingers flat.

IMPORTANT NOTE:

Proceed with caution when opening the chair as there are several areas around the moving parts that could potentially pinch fingers.

Next: Install the Wheels

Front Wheels



1 Place the chair on its back.



2 Remove the black plastic plug from the outer tube and discard.



3 Unscrew the black plastic knob by turning it counterclockwise. Set aside.



Insert the wheel stem into the tube, making sure to align the hole in the wheel stem with the hole in the tube.



Re-insert the black plastic knob and turn it clockwise to tighten and secure the wheel to the chair.

6 Repeat these steps on the other side.

Rear Wheels



1

Place the chair on its front.



2

Unscrew the black knob from the chair base by turning it counterclockwise. Set aside.



3

Insert the wheel stem into the tube, making sure to align the hole in the wheel stem with the hole in the tube.



4

Re-insert the black plastic knob and turn it clockwise to tighten and secure the wheel to the chair.

5 Repeat these steps on the other side.

Engaging the Wheel Locks

The wheel locks are pre-installed on the rear wheels.



Push the lever towards the front of the chair to engage and lock the rear wheels.



Push the lever towards the back of the chair to unlock the rear wheels.

IMPORTANT NOTE:

Engage both wheel locks before entering or exiting the transport chair, when leaning forward, or while in an elevator or wheelchair lift.

Next: Install the Footrests




Engage the rear wheel locks by pushing the black lever towards the front of the chair.



Locate the two small silver pins on the chair above the front wheels.



Locate the two pre-drilled holes on the footrest.

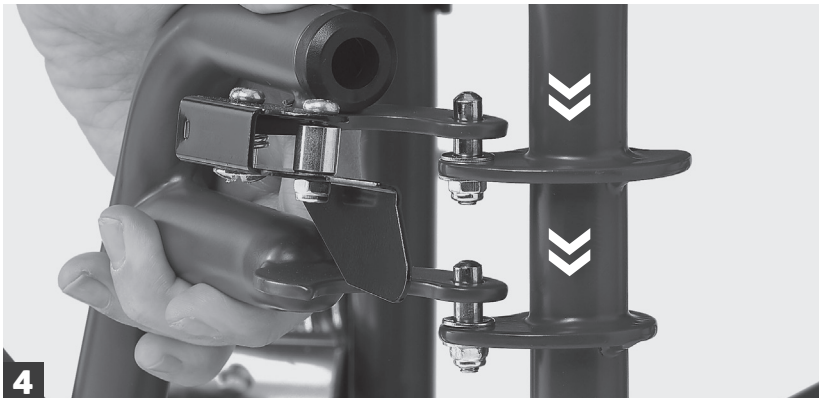

Slide the footrest openings over the silver pins and place down.



5

Swing the footrest to the front of the chair until it locks into place.



6

Fold the foot plate down to use.

7 Repeat these steps on the other side.

IMPORTANT NOTE:

If the foot plate is facing outwards when attached to the chair, See section How To adjust the footrest height.

To Swing Away the Footrest:

- 1** Fold the foot plate up to the vertical position.



2 Release the footrest lock by pushing the black lever forward.




3 Snap the footrest into the Stow-N-Go Clips located behind the front wheel to secure it to the chair.

To Adjust the Footrest Height:




Flip up the black tab on the back of the leg rest.

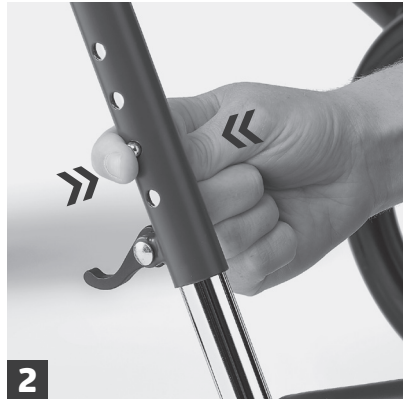

Squeeze the push buttons on the stem of the leg rest to adjust the footrest height up or down.



When the desired height is achieved, release the pressure on the push buttons. The push buttons click securely into pre-drilled holes.

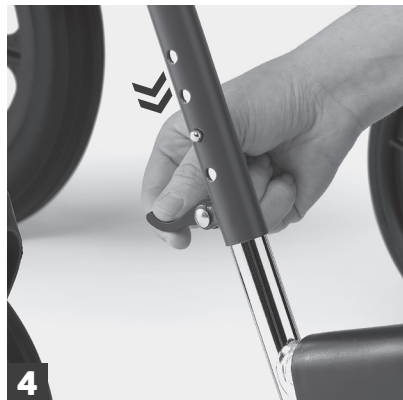

Flip down the black tab on the back of the footrest.


IMPORTANT NOTE:

If the foot plate is facing outwards when attached to the chair, follow instructions from figure 1 and figure 2, then rotate the foot plate so it is on the inside of the chair. Follow instructions for figure 3 and figure 4 to lock the footrest.

To Remove the Footrest From the Chair:



Disengage the tab lock.

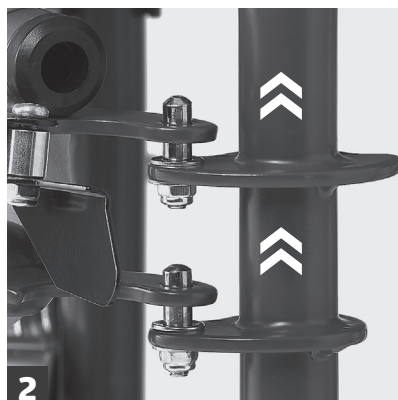

Pull the footrest up and off of the silver pins.

Finally: Unfold the Seat Back



Using the handles, push the seat back up until the release assembly spring buttons click fully into the folding mechanism on both sides. (You should be able to see the spring buttons fully engaged from the front of the seat back canes.)



Ensure the frame/handles and seat back are locked securely into place before using the chair.

Close and Fold



Fold the footrest plates up to a vertical position, pull them back, and snap them into the Stow-N-Go holders on the side of the chair.



Turn the front wheels back. Unlock the back wheels.



Find the black release tabs on each side of the chair back canes and pull down. The seat back will collapse.



Using both hands, grasp the two fabric handles on the seat upholstery and pull up.




Now grasp the arms of the chair and push inward until it collapses further.



Chair folds down for easy storage and transport.

Contenu :

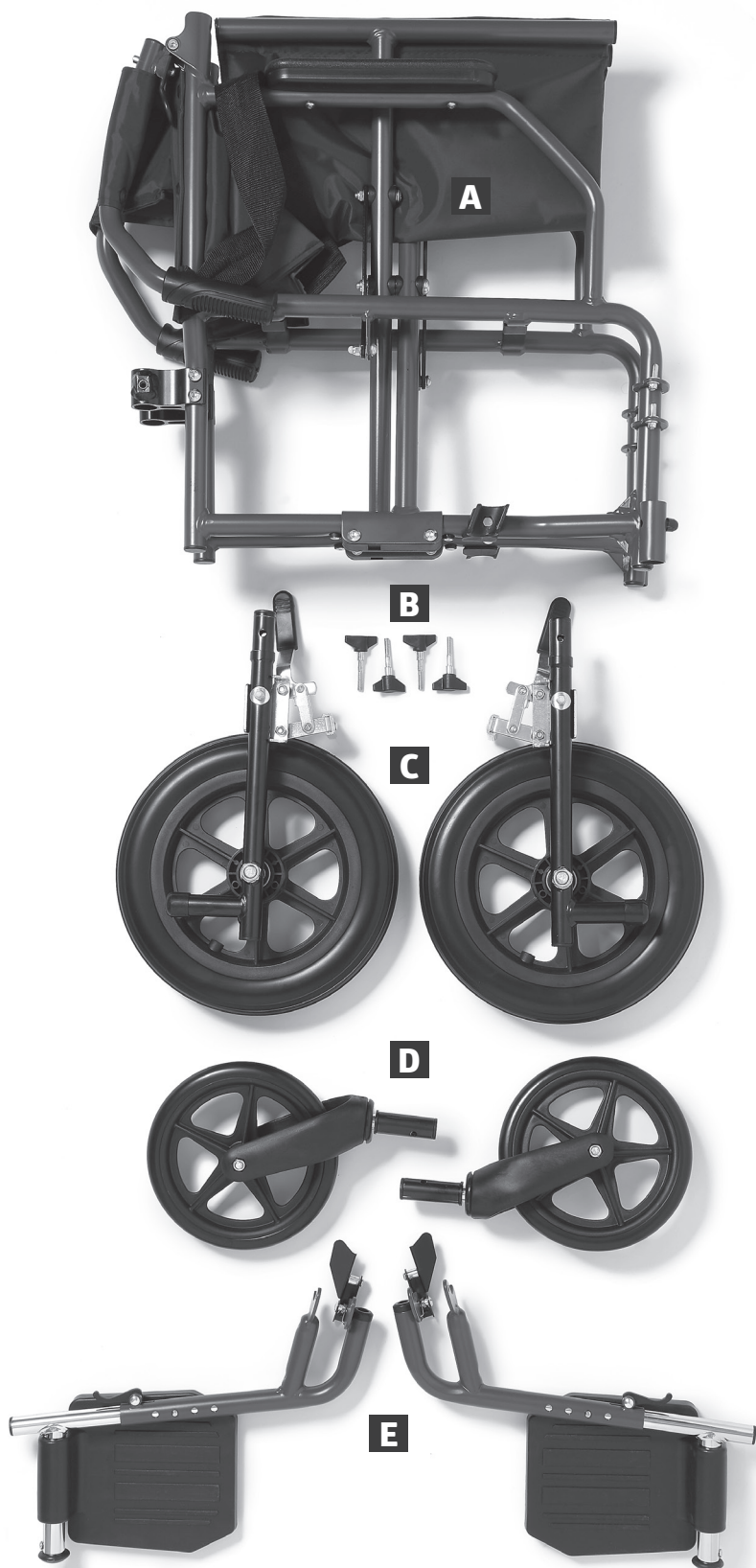



- A** Cadre de fauteuil
(avec attaches Stow-N-Go)
- B** Vis à main
- C** 2 roulettes arrière

- D** 2 roulettes avant
- E** 2 repose-pieds
- F** Guide d'assemblage
étape par étape

- G** Avertissements
généraux

Ce guide concerne le modèle de fauteuil suivant :

Número d'article	Description	Couleur	Capacité de charge
MDS808210KDR	Fauteuil de transport, acier léger, siège de 48,2 x 40,6 cm (19 po x 16 po), repose-pieds pivotants, accoudoirs courts, et attaches Stow-N-Go	Gris et bourgogne	136 kg (300 lb)
MDS808200KDT	Fauteuil de transport, acier léger, siège de 48,2 x 40,6 cm (19 po x 16 po), repose-pieds pivotants, accoudoirs courts, et attaches Stow-N-Go	Gris et sarcelle	136 kg (300 lb)
MDS808200KWM	Fauteuil de transport, acier léger, siège de 48,2 x 40,6 cm (19 po x 16 po), repose-pieds pivotants, accoudoirs courts, et attaches Stow-N-Go	Blanc et beige	136 kg (300 lb)
MDS808200KNM	Fauteuil de transport, acier léger, siège de 48,2 x 40,6 cm (19 po x 16 po), repose-pieds pivotants, accoudoirs courts, et attaches Stow-N-Go	Marine et bleu	136 kg (300 lb)

En premier : Ouverture du fauteuil



Le siège étant à la verticale, placez les mains de chaque côté des accoudoirs du fauteuil et écartez-les délicatement.




Lorsque le fauteuil commence à s'ouvrir, appuyez fermement sur les bords extérieurs du siège avec les deux mains, en maintenant les doigts à plat.

REMARQUE IMPORTANTE :

Ouvrez le fauteuil avec précaution; plusieurs des surfaces entourant les pièces mobiles présentent des points de pincement potentiel.

Enfin : Installation des roulettes

Roulettes avant

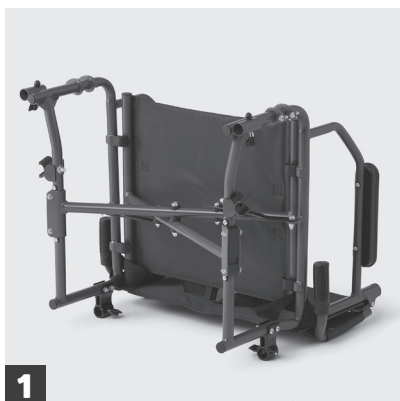

Placez le fauteuil sur son dossier.



Retirez l'embout noir en plastique du tube extérieur et jetez-le.



Dévissez le bouton noir en plastique en tournant dans le sens antihoraire. Mettez-le de côté.



4 Insérez la tige de la roulette dans le tube, en veillant à aligner le trou de la tige de la roulette sur celui du tube.



5 Remettez le bouton noir en plastique en place et tournez-le dans le sens horaire pour le serrer et fixer la roulette au fauteuil.

6 Répétez ces étapes de l'autre côté.

Roulettes arrière



Placez le fauteuil sur le devant.




Dévissez le bouton noir du bâti du fauteuil en le tournant dans le sens antihoraire. Mettez-le de côté.



3

Insérez la tige de la roulette dans le tube, en veillant à aligner le trou de la tige de la roulette sur celui du tube.

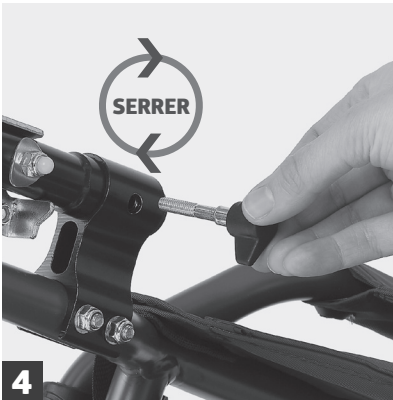

4

Remettez le bouton noir en plastique en place et tournez-le dans le sens horaire pour le serrer et fixer la roulette au fauteuil.

5 Répétez ces étapes de l'autre côté.

Activation des verrous de roulettes

Les verrous de roulettes sont préinstallés sur les roulettes arrière.



Poussez le levier vers l'avant du fauteuil pour activer les verrous et bloquer les roulettes arrière.



Poussez le levier vers l'arrière du fauteuil pour déverrouiller les roulettes arrière.

REMARQUE IMPORTANTE :

Activez les verrous de roulettes des deux côtés avant de vous installer sur le fauteuil de transport ou d'en descendre, lorsque vous vous penchez vers l'avant, ou lorsque vous vous trouvez dans un ascenseur ou un élévateur pour fauteuils roulants.

Ensuite : Installation des repose-pieds




Activez les verrous des roulettes arrière en poussant le levier noir vers l'avant du fauteuil.



Repérez les deux petites broches argentées sur le fauteuil, au-dessus des roulettes avant.



Repérez les deux trous prépercés sur le repose-pieds.

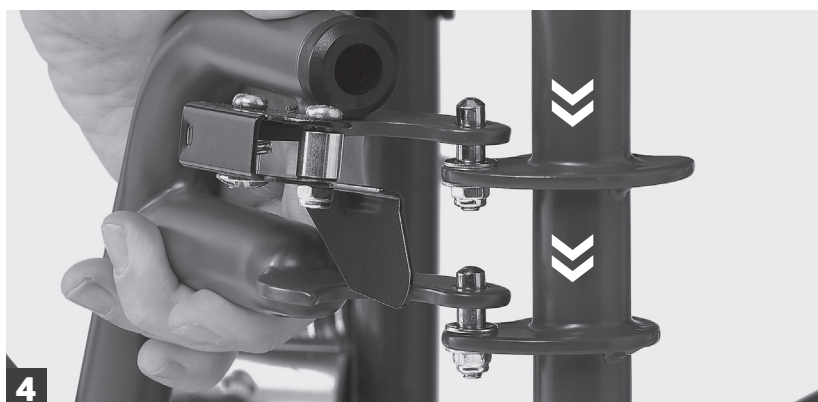

Faites glisser les ouvertures du repose-pieds sur les broches argentées, puis enfoncez-le sur les broches.



Faites pivoter le repose-pieds vers l'avant du fauteuil jusqu'à ce qu'il se bloque en place.



Dépliez la plaque du repose-pieds.

7 Répétez ces étapes de l'autre côté.

REMARQUE IMPORTANTE :

Si la palette est orientée vers l'extérieur lorsqu'elle est fixée au fauteuil, voir la section « Comment régler la hauteur du repose-pied ».

Pour faire pivoter le repose-pieds :

- 1** Repliez la plaque en position verticale.




2 Desserrez le verrou du repose-pieds en poussant le levier noir vers l'avant.




3 Enclenchez le repose-pieds dans les attaches Stow-N-Go situées derrière la roulette avant pour le fixer au fauteuil.

Pour régler la hauteur du repose-pieds :

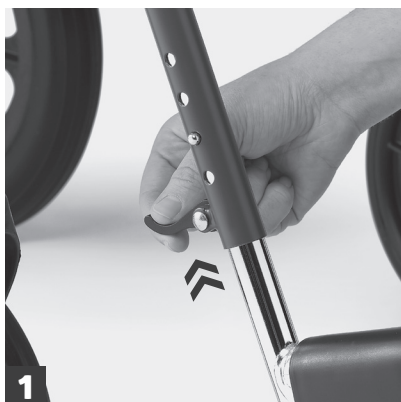

Relevez la languette noire à l'arrière du repose-jambes.

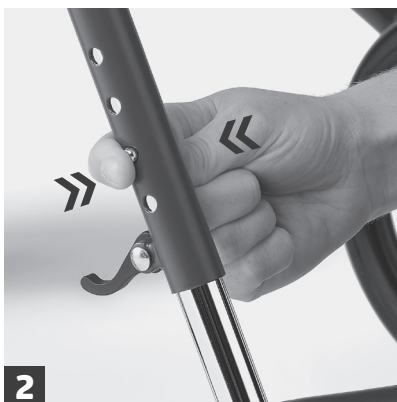

Appuyez sur les boutons-poussoirs de la tige du repose-jambes pour relever ou abaisser le repose-pieds.



Lorsque la hauteur désirée est atteinte, relâchez la pression sur les boutons-poussoirs. Les boutons-poussoirs s'enclenchent de façon sécuritaire dans les trous prépercés.



Abaissez la languette noire à l'arrière du repose-pieds.


REMARQUE IMPORTANTE :

Si la palette du repose-pied est orientée vers l'extérieur lorsqu'elle est fixée au fauteuil, suivre les instructions de la figure 1 et de la figure 2, puis la faire pivoter pour qu'elle se trouve à l'intérieur du fauteuil. Suivre les instructions de la figure 3 et de la figure 4 pour verrouiller le repose-pied.

Pour retirer le repose-pieds du fauteuil :



Desserrez le verrou de la languette.

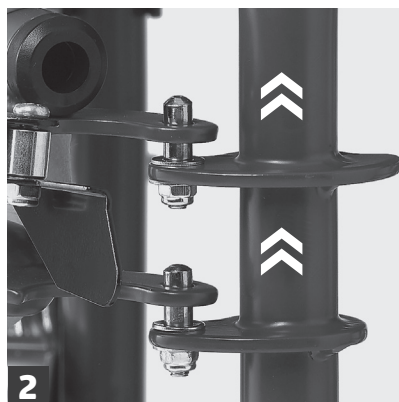

Dégagez le repose-pieds des broches argentées.

Dernière étape : Dépliage du dossier



En tenant les poignées, dépliez le dossier jusqu'à ce que les boutons à ressort du dispositif de dégagement s'enclenchent complètement dans le mécanisme de pliage des deux côtés. (Vous devriez pouvoir voir les boutons à ressort engagés à fond depuis l'avant des cannes du dossier.)




Vérifiez que le cadre/les poignées et le dossier sont bien verrouillés avant d'utiliser le fauteuil.

Fermeture et pliage



Repliez les plaques du repose-pied en position verticale, tirez-les vers l'arrière, puis enclenchez-les dans les supports Stow-N-Go de chaque côté du fauteuil.

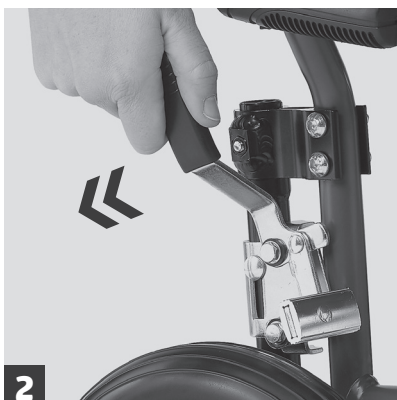

Faites tourner les roulettes avant vers l'arrière. Déverrouillez les roulettes arrière.



Abaissez les languettes de dégagement noires situées de chaque côté des cannes du dossier du fauteuil. Le dossier se replie.



Des deux mains, saisissez les deux poignées en tissu du siège et tirez vers le haut.




Saisissez ensuite les accoudoirs du fauteuil et poussez-les vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils se replient.



Le fauteuil se replie pour faciliter le rangement et le transport.

Lo que se incluye:

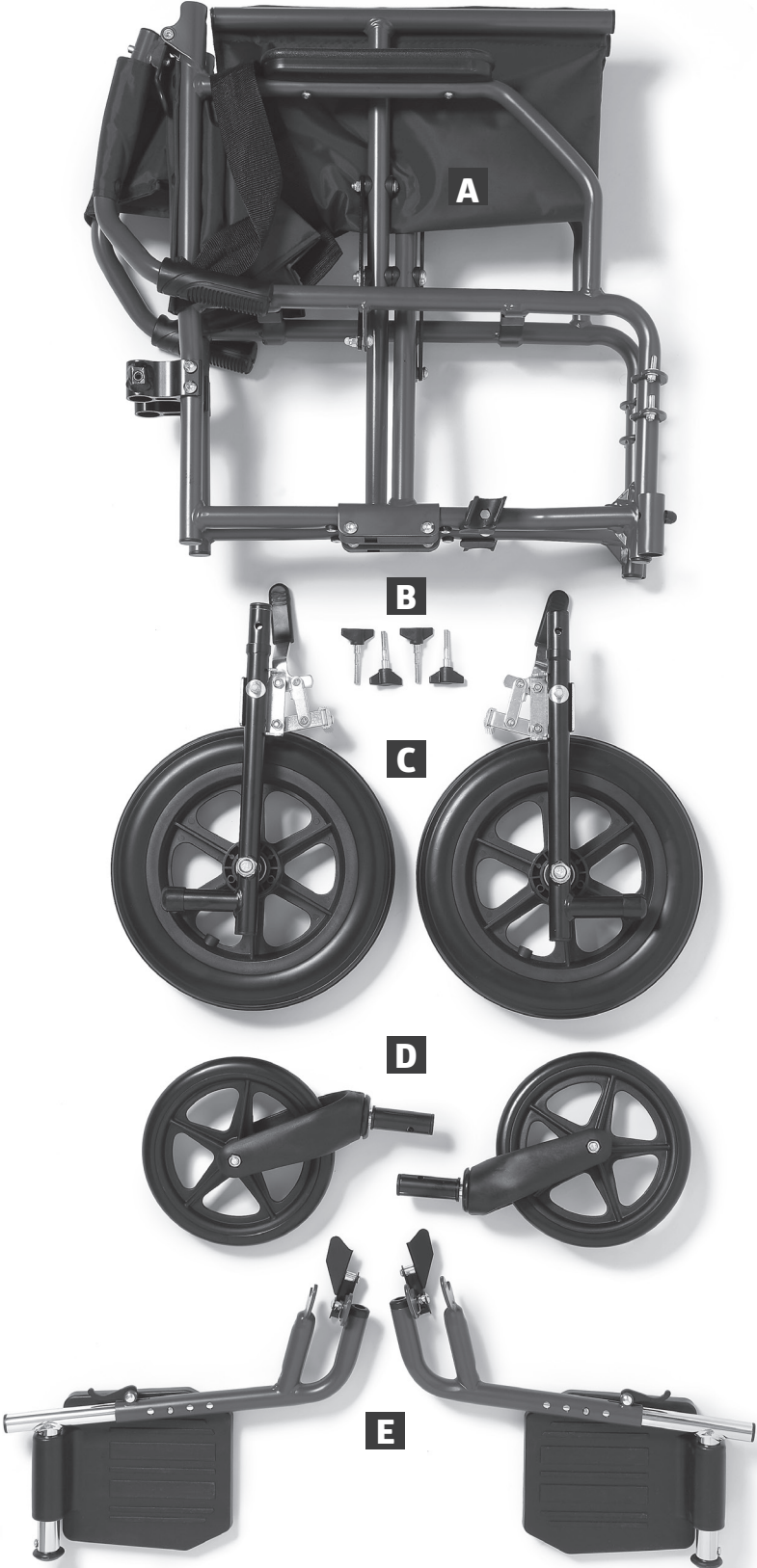



F



G

A Armazón de la silla
(con presillas Stow-N-Go)

B Tornillos de mano

C 2 ruedas traseras

D 2 ruedas delanteras

E 2 reposapiés

F Guía de montaje
paso a paso

G Advertencias
generales

Esta guía rige para la siguiente silla:

Número de artículo	Descripción	Color	Capacidad de peso
MDS808210KDR	Silla de transporte, acero liviano, asiento de 19" x 16" (48.2 x 40.6 cm), reposapiés abatibles, brazos con longitud de escritorio y presillas Stow-N-Go	Gris y borgoña	300 lb (136 kg)
MDS808200KDT	Silla de transporte, acero liviano, asiento de 19" x 16" (48.2 x 40.6 cm), reposapiés abatibles, brazos con longitud de escritorio y presillas Stow-N-Go	Gris y verde azulado	300 lb (136 kg)
MDS808200KWM	Silla de transporte, acero liviano, asiento de 19" x 16" (48.2 x 40.6 cm), reposapiés abatibles, brazos con longitud de escritorio y presillas Stow-N-Go	Blanco y bronceado	300 lb (136 kg)
MDS808200KNM	Silla de transporte, acero liviano, asiento de 19" x 16" (48.2 x 40.6 cm), reposapiés abatibles, brazos con longitud de escritorio y presillas Stow-N-Go	Azul marino y azul	300 lb (136 kg)

Primero: Abra la silla



Con el asiento en posición vertical, coloque las manos en ambos lados de los brazos de la silla y tire suavemente hacia afuera.



A medida que la silla comience a abrirse, presione firmemente con ambas manos los bordes exteriores del asiento, manteniendo los dedos planos.

NOTA IMPORTANTE:

Proceda con precaución cuando abra la silla ya que hay varias áreas alrededor de las piezas móviles con las que potencialmente se podría apretar los dedos.

Ahora: Instale las ruedas

Ruedas delanteras



Coloque la silla sobre su respaldo.



Retire el tapón plástico negro del tubo exterior y deséchelo.



Desenrosque la perilla plástica negra girándola en sentido antihorario. Déjela a un lado.



4 Introduzca el vástago de la rueda en el tubo, cerciorándose de alinear el orificio del vástago de la rueda con el orificio en el tubo.



5 Vuelva a introducir la perilla plástica negra y gírela en sentido horario para apretar y fijar la rueda a la silla.

6 Repita estos pasos en el otro lado.

Ruedas traseras



1

Coloque la silla sobre su lado delantero.



2

Desenrosque la perilla negra de la base de la silla, girándola en sentido antihorario. Déjela a un lado.



Introduzca el vástago de la rueda en el tubo, cerciorándose de alinear el orificio del vástago de la rueda con el orificio en el tubo.



Vuelva a introducir la perilla plástica negra y gírela en sentido horario para apretar y fijar la rueda a la silla.

5 Repita estos pasos en el otro lado.

Enganche los bloqueos de las ruedas

Los bloqueos de las ruedas vienen preinstalados en las ruedas traseras.



Empuje la palanca hacia la parte delantera de la silla para engranar y bloquear las ruedas traseras.



Empuje la palanca hacia la parte trasera de la silla para desbloquear las ruedas traseras.

NOTA IMPORTANTE:

Enganche los bloqueos de ambas ruedas antes de entrar o salir de la silla de transporte, al inclinarse hacia adelante o cuando tenga que transportarla en un ascensor o plataforma de elevación.

A continuación: Instale los reposapiés




1 Enganche los bloqueos de las ruedas traseras empujando la palanca negra hacia la parte delantera de la silla.




2 Ubique los dos pasadores plateados pequeños en la silla encima de las ruedas delanteras.



3 Ubique los dos orificios pretaladrados en el reposapiés.

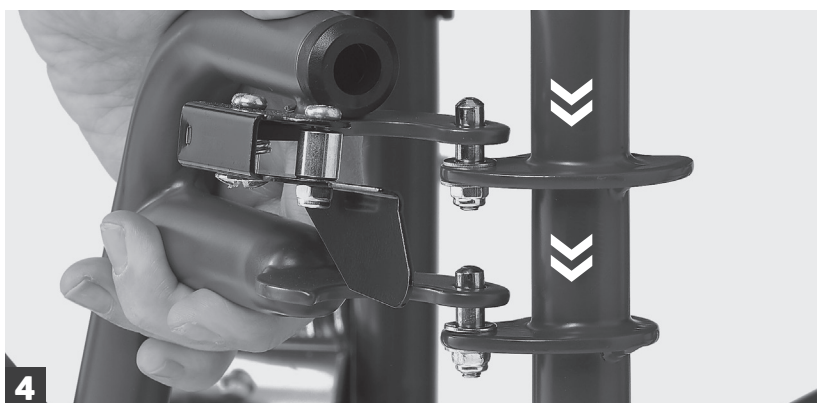

4 Deslice los orificios del reposapiés sobre los pasadores plateados y presiónelo hacia abajo.

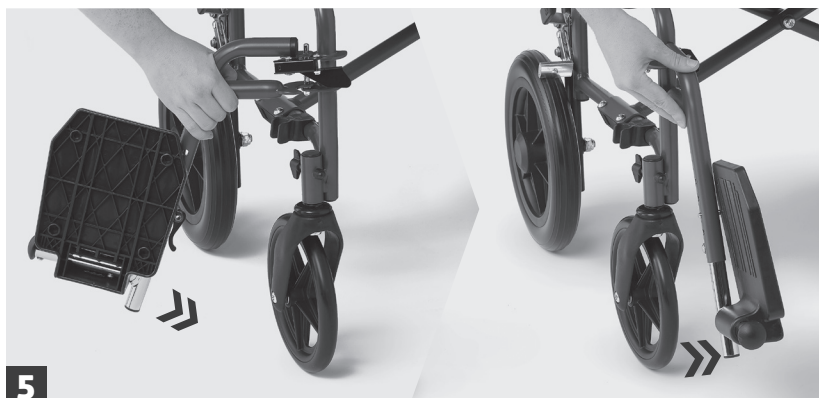

5

Abata el reposapiés hacia la parte delantera de la silla hasta que quede bloqueado en su lugar.



6

Pliegue la plataforma para los pies a fin de usarla.

7

Repita estos pasos en el otro lado.

NOTA IMPORTANTE:

Si la plataforma para los pies queda orientada hacia afuera cuando se fija a la silla, consulte la sección Cómo ajustar la altura del reposapiés.

Para abatir el reposapiés:

- 1** Pliegue la plataforma para los pies hasta la posición vertical.



2 Suelte el bloqueo del reposapiés empujando la palanca negra hacia adelante.




3 Encaje el reposapiés en las presillas Stow-N-Go situadas detrás de la rueda delantera a fin de fijarlo a la silla.

Para ajustar la altura del reposapiés:



Doble la lengüeta negra hacia arriba en la parte posterior del reposapiernas.

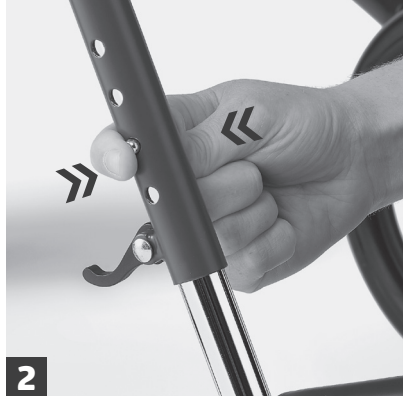

Apriete los pulsadores en el vástago del reposapiernas para ajustar la altura del reposapiés hacia arriba o abajo.



Una vez alcanzada la altura deseada, libere la presión en los pulsadores. Los pulsadores encajan firmemente en los orificios pretaladrados.



Doble la lengüeta negra hacia abajo en la parte posterior del reposapiés.


NOTA IMPORTANTE:

Si la plataforma para los pies queda orientada hacia afuera cuando se fija a la silla, siga las instrucciones de las figuras 1 y 2 y, a continuación, gire la plataforma de modo que quede en el interior de la silla. Siga las instrucciones de las figuras 3 y 4 para bloquear el reposapiés.

Para retirar el reposapiés de la silla:



Desenganche el bloqueo de la lengüeta.

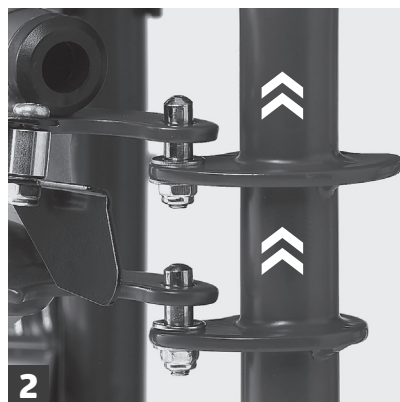

Tire del reposapiés hacia arriba y retírelo de los pasadores plateados.

Finalmente: Despliegue el respaldo del asiento



Usando los mangos, empuje el respaldo del asiento hacia arriba hasta que los botones de resorte liberadores encajen completamente en el mecanismo de plegado en ambos lados. (Debe poder ver los botones de resorte completamente enganchados al mirar desde la parte delantera de las varas del respaldo del asiento).




Ceróiese de que el armazón/ mangos y el respaldo del asiento estén firmemente bloqueados en su lugar antes de usar la silla.

Cierre y pliegue



Pliegue las placas del reposapiés hasta una posición vertical, tírelas hacia atrás y encájelas en los soportes Stow-N-Go en el lado de la silla.

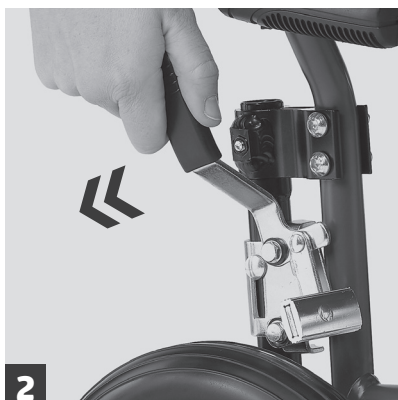

Gire las ruedas delanteras hacia atrás. Desbloquee las ruedas traseras.



Busque las lengüetas de liberación negras en cada lado de las varas del respaldo de la silla y empújelas hacia abajo. El respaldo de la silla se abatirá.



Usando ambas manos, agarre los dos mangos de tela en el tapizado del asiento y tire hacia arriba.



Ahora tome los brazos de la silla y empuje hacia adentro hasta que se abatan aún más.



La silla se pliega para facilitar su almacenamiento y transporte.

ENTRAPMENT, STRANGULATION, SUFFOCATION AND FALL HAZARDS

Gaps in and around this product can entrap and kill people with Alzheimer's disease or dementia, or those who are sedated, confused, or frail, and are at increased risk of entrapment and strangulation. People attempting to climb over this product are at increased risk of injury or death from falls. Always make sure this product is properly secured to bed. If product can move away from bed or mattress, it can lead to entrapment and death.

RISQUES DE PIÉGEAGE, D'ÉTRANGLEMENT, DE SUFFOCATION ET DE CHUTE

Les interstices à l'intérieur et autour de ce produit peuvent présenter des risques de piégeage et s'avérer mortels. Les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de démence, ainsi que les personnes fragiles, confuses ou sous sédatif courent un plus grand risque de piégeage et d'étranglement. Les personnes qui tentent d'enjamber ce produit s'exposent à un risque accru de blessures ou de décès en cas de chute. Assurez-vous que ce produit est solidement fixé au lit à tout moment. Si le produit est susceptible de s'écarter du lit ou du matelas, il peut présenter un risque de piégeage potentiellement mortel.

PELIGROS DE ATRAPAMIENTO, ESTRANGULACIÓN, ASFIXIA Y CAÍDA

Los huecos dentro y alrededor de este producto pueden atrapar y matar. Las personas con enfermedad de Alzheimer o demencia, o aquellas que están sedadas, confundidas o son frágiles, tienen un mayor riesgo de atrapamiento y estrangulación. Las personas que intentan trepar por encima de este producto corren un mayor riesgo de sufrir lesiones o morir por caídas. Cerciórese siempre de que este producto esté correctamente fijo a la cama. Si el producto puede apartarse de la cama o el colchón, puede causar atrapamiento y muerte.



Microban® antimicrobial product protection is limited to the product itself and is not designed to protect users from disease causing microorganisms or as a substitute for normal cleaning practices.

La protection antimicrobienne Microban® se limite au produit lui-même et n'est pas conçue pour protéger les utilisateurs contre les micro-organismes pathogènes ou pour remplacer les pratiques de nettoyage normales.

La protección antimicrobiana del producto Microban® se limita al producto propiamente tal y no está diseñada para proteger a los usuarios contra los microorganismos causantes de enfermedades ni para sustituir las prácticas normales de limpieza e higiene.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com
Medline México
01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us
Suivez-nous
Síguenos



Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2023 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP. Microban® is a registered trademark of Microban Products Company.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP. Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2023 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP. Microban® es una marca comercial registrada de Microban Products Company.