

# Full Body Slings

## Instructions for use



### Description

Full Body slings are made of durable materials and are ideal for patient transferring and toileting activities.

### Model SKUs

MDSMR110	MDSMR114	MDSMR112
MDSMR111	MDSMR115	MDSMR113
MDSMR140	MDSMR116	MDSMR117
	MDSMR141	MDS88200DSL

### Cautions

- Do not exceed the maximum weight capacity of sling or patient lift.
- Always confirm the weight capacity of the sling against the patient's weight and ensure proper placement before performing a lift.
- Always inspect slings prior to each use. Signs of rips, tears, or frays indicate sling wear which is unsafe and could result in injury. Signs of color fading, bleached areas, or permanent wrinkles on the straps indicate improper laundering which is unsafe and could result in injury. Any slings with signs of wear or improper laundering should be immediately removed from use.
- Always confirm compatibility between the connection style of the patient sling and the patient lift before use. Medline loop-style 6-point cradles are compatible with these slings. If other lift cradles are being used, the user should confirm compatibility between the hoist and the sling. Reach out to your Medline Representative with questions.
- Do not remove sling labels. If sling labels are removed or no longer legible, sling must be immediately removed from use.
- Never launder a disposable patient sling.
- Always follow your facility's Safe Patient Handling policy regarding how many staff members are needed to perform a patient lift.
- Always refer to the manufacturer's manual for operation of lift equipment.

### Instructions


#### Sizing

Always refer to weight capacity of the sling when selecting a size. Use clinical judgement for body shape and patient comfort when selecting between sizes.

**Note:** For amputees, use an amputee sling or repositioning sling, and use the discretion of your clinical professionals.

#### Positioning

With the product label outwards, position the full body sling underneath the patient with the top positioned just above the head, and the bottom just behind the patient's knees. Make sure the patient is centered on the sling.

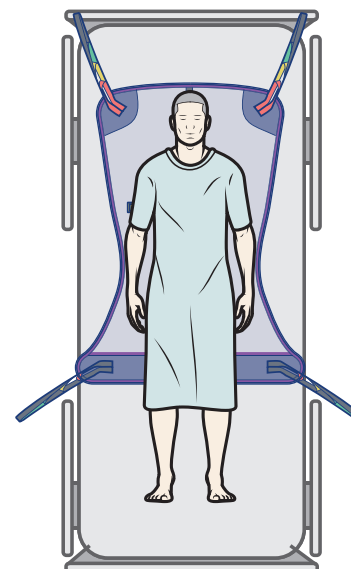

### Application



Scan QR code to view application video, or go to <https://vimeo.com/356271549>

1. Ensure the patient is centered on the sling and the head is supported.
2. Lock the wheels on all equipment the patient is on and/or will be transferred to.
3. Starting at the head, make sure each side has the same colored loop attached to the left and right side of the cradle before lifting.
  - a. Use different loop lengths on the straps for the desired patient positioning:
    - Shorter straps towards the head, and longer straps towards legs, will create a seated position.
    - Longer towards the head, and shorter towards the legs, will create a reclined position.
4. When all straps are attached to the patient lift cradle, do a final visual check that all loop lengths match from side-to-side.
5. When performing the lift, reassure and calm the patient. Patient should not hold any part of the lift or straps during transfer.
6. Lift the patient and proceed with repositioning or transfer.
7. After lift or transfer, remove all loops of the patient sling from the lift and remove sling from behind patient.

### Reusable Slings

- Reusable slings are recommended for use with the same patient unless washed before using for a different patient.
- Frequency of laundering should follow facility guidelines, or when the sling is soiled. Refer to the sling's tag for laundering instructions and follow all wash instructions.

### Disposable Slings

- Disposable slings are for single-patient use and may only be re-used with the same patient.
- Disposable slings should be discarded when soiled or when patient is discharged.

# Toiles lève-personne pour corps entier

Mode d'emploi



## Description

Les toiles lève-personne pour corps entier sont faites de matériaux durables et sont idéales pour le transfert des patients et les activités de toilette.

## UGS des modèles

MDSMR110	MDSMR114	MDSMR112
MDSMR111	MDSMR115	MDSMR113
MDSMR140	MDSMR116	MDSMR117
	MDSMR141	MDS88200DSL

## Mises en garde

- Ne dépassez pas la capacité maximale de charge de la toile ou du lève-personne.
- Confirmez toujours la capacité de charge de la toile par rapport au poids du patient et assurez-vous de la mise en place correcte du patient avant de le soulever.
- Inspectez toujours les toiles avant chaque utilisation. Toute trace de déchirure, d'accroc ou d'effilochage est un signe d'usure de la toile et représente un danger et des risques de blessures. Des sangles décolorées, blanchies par endroit ou striées de façon permanente résultent d'un nettoyage inadéquat et représentent un danger et des risques de blessures pour le patient. Cessez immédiatement l'utilisation de toiles qui présentent des signes d'usure ou qui n'ont pas été nettoyées de façon adéquate.
- Confirmez toujours la compatibilité entre la manière dont la toile se raccorde et le lève-personne avant de l'utiliser. Les berceaux à boucle à 6 points Medline sont compatibles avec ces toiles. Si d'autres berceaux de lève-personne sont utilisés, l'utilisateur doit confirmer la compatibilité entre le palan et la toile. Communiquez avec votre représentant Medline pour toute question.
- N'enlevez pas les étiquettes de la toile. L'absence d'étiquette sur la toile ou une étiquette devenue illisible commande le retrait immédiat de la toile.
- Ne nettoyez jamais une toile de lève-personne jetable.
- Respectez toujours la politique de manipulation sécuritaire des patients de votre établissement concernant le nombre de membres du personnel nécessaires pour soulever le patient.
- Reportez-vous toujours au manuel du fabricant pour en savoir plus sur le fonctionnement du lève-personne.

## Mode d'emploi


### Sélection de la taille

Reportez-vous toujours à la capacité de charge de la toile pour sélectionner sa taille. Ayez recours à votre jugement clinique pour sélectionner la taille en fonction de la morphologie du patient et de son confort.

**Remarque :** Pour les amputés, utilisez une toile spécialement conçue à cet effet ou une toile de repositionnement en suivant les conseils de vos professionnels cliniques.

### Mise en place

L'étiquette étant dirigée vers l'extérieur, placez la toile lève-personne pour corps entier sous le patient, le bord supérieur se trouvant juste au-dessus de sa tête et le bord inférieur juste derrière ses genoux. Assurez-vous que le patient se trouve au centre de la toile.

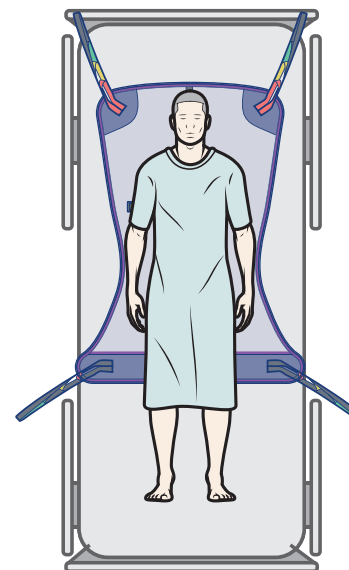

## Application



Balayez le code QR pour visualiser la vidéo d'application, ou rendez-vous sur le site <https://vimeo.com/356271549>

1. Assurez-vous que le patient se trouve au centre de la toile et que sa tête est soutenue.
2. Bloquez les roues de tous les équipements sur lesquels se trouve le patient ou sur lesquels il sera transféré.
3. En commençant par la tête, vérifiez que la boucle de la même couleur est fixée de chaque côté, à gauche et à droite du berceau, avant de soulever le patient.
  - a. Utilisez différentes longueurs de boucle sur les sangles selon la position souhaitée pour le patient :
    - Des sangles plus courtes au niveau de la tête et plus longues au niveau des jambes permettront de placer le patient en position assise.
    - Des sangles plus longues au niveau de la tête et plus courtes au niveau des jambes permettront de placer le client en position inclinée.
4. Lorsque toutes les sangles sont fixées au berceau du lève-personne, vérifiez une dernière fois que toutes les boucles sont de la même longueur latéralement.
5. Pendant le soulèvement du patient, rassurez-le et calmez-le. Le patient ne doit tenir aucune partie du lève-personne ni aucune sangle pendant le transfert.
6. Soulevez le patient et procédez au repositionnement ou au transfert.
7. Après avoir soulevé ou transféré le patient, détachez toutes les boucles de la toile du lève-personne et retirez la toile de derrière le patient.

## Toiles lève-personne réutilisables

- Il est recommandé d'utiliser les toiles réutilisables avec le même patient, à moins de les laver avant de les réutiliser sur un patient différent.
- La fréquence de nettoyage doit suivre les directives de l'établissement ou nettoyez la toile lorsqu'elle est souillée. Reportez-vous à l'étiquette de la toile pour vérifier les instructions de nettoyage et suivez-les à la lettre.

## Toiles lève-personne jetables

- Les toiles jetables sont à usage unique et ne peuvent être réutilisées que sur le même patient.
- Les toiles jetables doivent être jetées lorsqu'elles sont souillées ou lorsque le patient quitte l'hôpital.

Non fait de latex de caoutchouc naturel

# Eslingas para cuerpo completo

## Instrucciones de uso



### Descripción

Las eslingas para cuerpo completo están fabricadas con materiales duraderos y son ideales para las actividades de transferencia y uso del baño por parte del paciente.

### SKU de los modelos

MDSMR110	MDSMR114	MDSMR112
MDSMR111	MDSMR115	MDSMR113
MDSMR140	MDSMR116	MDSMR117
	MDSMR141	MDS88200DSL

### Precauciones

- No exceda la capacidad de peso máxima de la eslinga o el elevador de pacientes.
- Confirme siempre la capacidad de peso de la eslinga con respecto al peso del paciente y cerciórese de su correcta colocación antes de realizar una elevación.
- Inspeccione siempre las eslingas antes de cada uso. Los signos de roturas, rasgaduras o deshilachado indican desgaste de la eslinga que no es seguro y podría causar lesiones. Si las correas se ven desteñidas, con zonas decoloradas o arrugas permanentes es signo de un lavado inadecuado que no es seguro y podría causar lesiones. Toda eslinga con signos de desgaste o lavado inadecuado debe dejar de usarse inmediatamente.
- Confirme siempre la compatibilidad entre el estilo de conexión de la eslinga del paciente y el elevador de pacientes antes de su uso. Los soportes de 6 puntos de anclaje estilo lazo de Medline son compatibles con estas eslingas. Si se usan otros soportes de elevación, el usuario debe confirmar la compatibilidad entre el aparato elevador y la eslinga. Si tiene preguntas, comuníquese con su representante de Medline.
- No quite las etiquetas de la eslinga. Si se quitan las etiquetas o ya no son legibles, se debe dejar de usar la eslinga inmediatamente.
- Nunca lave una eslinga para pacientes desechable.
- Siempre siga la política de manejo seguro de pacientes de su centro con respecto a cuántos miembros del personal se necesitan para realizar una elevación.
- Consulte siempre el manual del fabricante para conocer el funcionamiento del equipo de elevación.

### Instrucciones


#### Tamaño

Consulte siempre la capacidad de peso de la eslinga al seleccionar un tamaño. Use el criterio clínico para la forma del cuerpo y la comodidad del paciente al seleccionar entre tamaños.

**Nota:** Para las personas con amputaciones, emplee una eslinga para amputados o una para reposicionamiento y use la discreción de sus profesionales clínicos.

#### Posicionamiento

Con la etiqueta del producto hacia afuera, coloque la eslinga para cuerpo completo debajo del paciente, con la parte superior ubicada justo arriba de la cabeza y la parte inferior justo detrás de las rodillas del paciente. Cerciórese de que el paciente esté centrado en la eslinga.

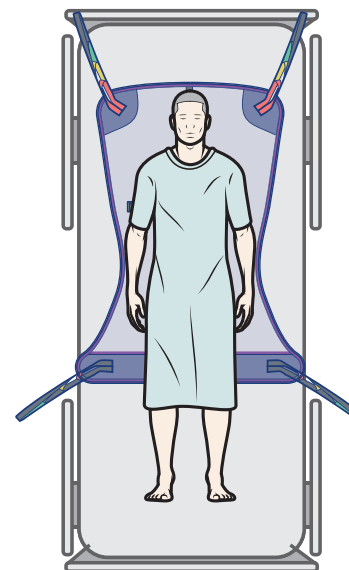

### Colocación



Escanee el código QR para ver el video de colocación o vaya a <https://vimeo.com/356271549>

1. Cerciórese de que el paciente esté centrado en la eslinga y que la cabeza esté apoyada sobre la eslinga.
2. Bloquee las ruedas de todo el equipo en el que se encuentre el paciente y/o al que será transferido.
3. Comenzando por la cabeza, y antes de realizar la elevación, cerciórese de que cada lado tenga el lazo del mismo color unido al lado izquierdo y derecho del soporte.
  - a. Use diferentes longitudes de lazo en las correas para el posicionamiento deseado del paciente:
    - Las correas más cortas hacia la cabeza y las más largas hacia las piernas crearán una posición de sentado.
    - Más largas hacia la cabeza y más cortas hacia las piernas crearán una posición reclinada.
4. Cuando todas las correas estén fijadas al soporte del elevador de pacientes, haga una última verificación visual de que todas las longitudes de los lazos coincidan de un lado al otro.
5. Al realizar la elevación, conforte y calme al paciente. El paciente no debe sujetar ninguna parte del elevador ni las correas durante la transferencia.
6. Eleve al paciente y proceda con su reposicionamiento o transferencia.
7. Después de la elevación o transferencia, retire del elevador todos los lazos de la eslinga y retire la eslinga de detrás del paciente.

### Eslingas reutilizables

- Se recomienda usar las eslingas reutilizables con el mismo paciente, a menos que se laven antes de usarlas con otro paciente.
- La frecuencia de lavado debe seguir las pautas del centro o cuando la eslinga esté sucia. Consulte la etiqueta de la eslinga para conocer las instrucciones de lavado y siga todas las instrucciones pertinentes.

### Eslingas desechables

- Las eslingas desechables son para uso en un solo paciente y solo se pueden reutilizar con el mismo paciente.
- Las eslingas desechables deben descartarse cuando se ensucien o cuando se dé de alta al paciente.

No está hecha con látex de caucho natural