



GUARDIAN[®]

User's Guide | Manuel de l'utilisateur |
Guía del usuario

Aluminum Commode Transport Shower Chair Chaise d'aisance et de douche de transport en aluminium

Silla de aluminio de transporte
para ducha/silla retrete



Weight Capacity
Capacité de poids de
Capacidad de peso de
275 lbs (124 kg)

REF G1-504WCPX1

Not made with Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

GENERAL WARNINGS

Be sure to read all instructions and safety information before using this chair. If you have questions about using this product safely or transferring to and from the bath, please consult with a healthcare professional. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the commode.

- DO NOT assemble and use this product without first reading and understanding this user guide, otherwise injury and/or damage may occur.
- DO NOT use if components are missing or damaged. Contact Medline at 1-800-MEDLINE (633-5463) |1-800-268-2868.
- DO NOT exceed the weight capacity of 275 lbs (124 kg).
- DO NOT make any adjustments while using the product.
- DO NOT attempt to use the arms to support full body weight.
- DO NOT stand on the frame of the product.
- DO NOT stand or apply excess pressure on the footrests. When getting in or out of the chair, ensure the footplates are in the UP position.
- DO NOT attempt to lift the product by the armrests or any detachable component.
- DO NOT place hands or fingers near any moving part.
- DO NOT transfer in or out of the chair on your own unless you have sufficient upper body strength, balance and agility.
- DO NOT lean forward out of the chair any farther than the length of the armrests.
- DO NOT attempt to reach for objects if doing so means you move forward in the seat.
- DO NOT shift your weight or sitting position toward the direction you are reaching as the chair may tip over.
- DO NOT attempt to lean over the top of the backrest cushion to reach for objects.
- DO NOT tip the chair without assistance.
- DO NOT lean the chair back as this may cause the chair to tip over. If trying to reach objects, reach back only as far as your arm will extend without altering your seating position.
- DO NOT modify the chair. Examples; drilling holes, grinding, welding parts, using non-authorized/non-approved parts. Such modifications may change the chair's structure and center of balance which may increase the risk of serious injury to the user and void the warranty.
- DO NOT use this chair in an outdoor setting.

ASSEMBLY

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS CHAIR.

1. Remove contents from box, making sure you have all parts listed.
2. Mounting the backrest assembly: Unscrew both locking knobs from the backrest frame assembly. Insert the backrest frame assembly into the frame and secure with the locking knobs. Lower the armrests into position for use. **(Figure 1)**
3. Mounting the seat: Place the seat onto the seat frame. Firmly press down until each clip snaps into place. Note: Make sure the recessed portion is located at the rear. **(Figure 2)**
4. Mounting the footrests: Insert the footrests into the frame tubes and swivel the footrest forward. The footrest should click into place. **(Figure 3)**



- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Push handle | 5. Footrests |
| 2. Back cushion | 6. Steering castors |
| 3. Armrest | 7. Locking knobs (2) |
| 4. Seat | |

ADJUSTMENTS

Adjusting the castors

1. Remove the front castor bolt using the allen key and tool provided.
2. Adjust the castor to the desired height.
3. Lock the castor in place using the bolt and nut. Repeat until all four castors have been adjusted to the same preferred height. **(Figure 4)**

Adjusting the footrests

1. Unscrew the bolt and nut from the rear side of the leg rest frame.
2. Set to desired height and screw on bolt and nut.
3. Repeat until both footrests have been adjusted to the desired height. Make sure the screws are fully tightened. **(Figure 5)**



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

INSTRUCTIONS FOR USE

Locking Castors

1. Step down on the tab to lock the castor in place.
2. To release, lift up from underneath the tab. **(Figure 6)**

Commode Usage

1. Always lock the locking castors prior to using the chair.
2. Remove the lid from the bucket and push the bucket into place from the rear side of the chair.
3. Remove the padded seat lid cutout.
4. After use, pull bucket out from the rear side. Empty the contents and clean immediately.
5. Replace the padded seat lid cutout.

Over the Toilet Usage

1. Remove the bucket and lid from the rear side.
2. Remove the padded seat lid cutout.
3. Raise the toilet seat and lid.
4. Roll the commode over the toilet and lock the castors.

Shower Chair Usage

1. Pull the bucket and lid out from the rear side.
2. Remove padded seat lid cutout.
3. When using the chair in the shower, make sure the locking castors are engaged.

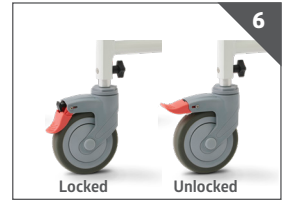


Figure 6

SAFETY INSTRUCTIONS

Reaching/leaning/bending forward or sideways

- Position the chair as close as possible to the object.
- When reaching forward make sure the front castors are pointing in a forward position **(Figure 7)**. This extends the wheel base and will help stabilize the chair.
- When reaching sideways, position the castors to provide the greatest stability side to side. **(Figure 8)**
- Make sure the locking castors are engaged before sitting down, standing up, reaching, or using as a commode.
- DO NOT attempt to reach for objects if doing so means you must move forward in the seat. DO NOT shift your weight toward the direction you are reaching.
- DO NOT attempt to reach objects if you have to pick them up from the floor by reaching down between your knees.
- DO NOT shift your weight or seat position toward the direction you are reaching.



Figure 7



Figure 8

SAFETY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

Reaching/leaning backwards

- Position the chair as close as possible to the object. Make sure the front casters are pointing in a forward position. This extends the wheel base and will help stabilize the chair. **(Figure 9)**
- DO NOT lean back over the top of the back cushion. Reach back only as far as your arm will extend without changing your position in the seat. **(Figure 9)**

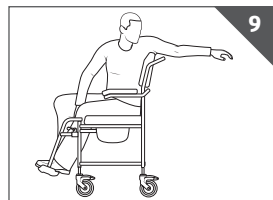


Figure 9

Transferring into and out of the chair

Transferring to and from the chair is a significant task that requires balance, agility and upper body strength. Practice with assistance prior to attempting transfers.

- Position the chair as close as possible to the user.
- Make sure all locking castors are engaged.
- Make sure the armrests and footrests are moved out of the way. **(Figure 10, 11)**

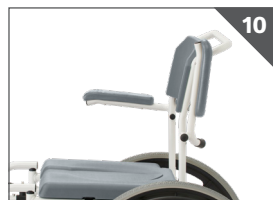


Figure 10

Obstacles

Obstacles such as floor threshold strips, uneven floors, cords or items on the floor, or cracks in pavement can damage the chair and may cause loss of control or tipping over. Scan your path and avoid any areas that may cause instability.



Figure 11

SAFETY INSPECTION AND MAINTENANCE

Prior to use, make sure:

- There are no loose, broken or missing components.
- All screws, nuts and/or bolts are tightened.
- The castors and castor locks are not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged parts before use.
- The locking castors are always properly engaged during use.
- User evenly distributes weight between the arm supports when transferring in and out of the commode.

CLEANING

Clean after each use.

- Clean with regular household cleaning products. Use a non-abrasive cleanser with warm water. Wipe dry after cleaning.
- DO NOT use abrasive powders, cleansers or scouring pads.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Lisez bien toutes les instructions et consignes de sécurité avant d'utiliser cette chaise. Pour toute question sur l'utilisation sécuritaire de ce produit ou la manière d'entrer et de sortir de la baignoire ou de la douche, consultez un professionnel de la santé. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUR L'UTILISATEUR OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité sont limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation de la chaise d'aisance.

- N'assemblez PAS et N'utilisez PAS ce produit sans avoir d'abord lu et compris le manuel de l'utilisateur. Il y a sinon un risque de blessure ou de dommages.
- N'utilisez PAS le produit s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées. Communiquez avec Medline en appelant au 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2868.
- NE dépassez PAS la capacité de charge de 124 kg (275 lb).
- NE faites AUCUN réglage lors de l'utilisation du produit.
- NE tentez PAS d'appuyer tout le poids du corps sur les accoudoirs.
- NE montez PAS sur le châssis du produit.
- NE montez PAS ou N'appuyez PAS trop fort sur les repose-pieds. Lorsque vous vous asseyez dans la chaise ou en sortez, assurez-vous que les repose-pieds sont RELEVÉS.
- N'essayez PAS de soulever le produit par les accoudoirs ou l'une des pièces amovibles.
- NE placez PAS les doigts ou les mains près des pièces en mouvement.
- Il N'est PAS recommandé de vous asseoir dans la chaise ou d'en sortir sans aide, à moins que vous possédiez l'équilibre, l'agilité et la force dans le haut du corps suffisants pour le faire.
- NE vous penchez PAS en avant dans la chaise au-delà de la longueur des accoudoirs.
- N'essayez PAS d'attraper des objets si ce geste vous force à vous pencher en avant dans la chaise.
- NE déplacez PAS votre poids ou votre position, une fois assis(e), vers l'objet que vous essayez d'attraper, au risque de faire basculer la chaise.
- N'essayez PAS de vous pencher par-dessus le coussin du dossier pour attraper des objets.
- NE basculez PAS la chaise sans aide.
- N'inclinez PAS la chaise vers l'arrière au risque de la faire basculer. Si vous essayez d'attraper des objets, penchez-vous seulement aussi loin que vous pouvez étendre le bras sans modifier votre position assise.
- NE modifiez PAS la chaise. Exemples : perçage de trous, meulage, soudure de pièces, utilisation de pièces non autorisées ou non approuvées. Ces modifications pourraient changer la structure et le centre de gravité de la chaise, ce qui risquerait d'augmenter le risque de lésions corporelles graves et d'annuler la garantie.
- N'utilisez PAS cette chaise à l'extérieur.

ASSEMBLAGE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CETTE CHAISE.

1. Videz la boîte de son contenu en vérifiant que toutes les pièces illustrées sont présentes.
2. Montage du dossier : dévissez les deux boutons de verrouillage du cadre du dossier. Insérez le cadre du dossier dans le châssis et fixez-le à l'aide des boutons de verrouillage. Rabattez les accoudoirs en position d'utilisation. **(Figure 1)**
3. Montage du siège : placez le siège sur son cadre. Appuyez fermement dessus jusqu'à ce que chaque attache s'enclenche en place. Remarque : Assurez-vous que la partie en retrait se trouve vers l'arrière. **(Figure 2)**
4. Montage des repose-pieds : insérez les repose-pieds dans les tubes du châssis et faites-les pivoter vers l'avant. Les repose-pieds doivent s'enclencher en place. **(Figure 3)**



1. Poignée de poussée
2. Coussin du dossier
3. Accoudoir
4. Assise
5. Repose-pieds
6. Roulettes pivotantes
7. Boutons de verrouillage (2)

RÉGLAGES

Réglage des roulettes

1. Retirez le boulon d'une roulette avant avec la clé hexagonale et l'outil fournis.
2. Réglez la hauteur de la roulette.
3. Verrouillez la roulette en place avec le boulon et l'écrou. Répétez jusqu'à ce que les quatre roulettes soient réglées à la même hauteur. **(Figure 4)**

Réglage des repose-pieds

1. Dévissez le boulon et l'écrou à l'arrière du cadre d'un repose-pieds.
2. Réglez la hauteur voulue et vissez en place à l'aide du boulon et de l'écrou.
3. Répétez de l'autre côté jusqu'à ce que les deux repose-pieds soient réglés à la même hauteur. Assurez-vous que les vis sont serrées à fond. **(Figure 5)**



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

MODE D'EMPLOI

Roulettes verrouillables

1. Appuyez du pied sur la patte pour verrouiller la roulotte en place.
2. Pour la relâcher, soulevez la patte en la faisant remonter.

(Figure 6)

Utilisation de la chaise d'aisance

1. Verrouillez toujours les roulettes verrouillables avant d'utiliser la chaise.
2. Retirez le couvercle du seau et abaissez le seau en place depuis l'arrière de la chaise.
3. Retirez le couvercle découpé dans le siège rembourré.
4. Après l'utilisation, retirez le seau en le faisant glisser à l'arrière. Videz le contenu et nettoyez le seau immédiatement.
5. Remettez en place le couvercle découpé dans le siège rembourré.

Utilisation sur une toilette

1. Retirez le seau et le couvercle en les faisant glisser à l'arrière.
2. Retirez le couvercle découpé dans le siège rembourré.
3. Soulevez le siège et le couvercle de toilette.
4. Faites rouler la chaise d'aisance sur la cuvette de la toilette et verrouillez les roulettes.

Utilisation de la chaise de douche

1. Retirez le seau et le couvercle en les faisant glisser à l'arrière.
2. Retirez le couvercle découpé dans le siège rembourré.
3. Lorsque vous utilisez la chaise sous la douche, assurez-vous que les roulettes verrouillables sont engagées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Extension/appui/flexion vers l'avant ou de côté

- Positionnez la chaise aussi près que possible de l'objet.
- Avant de vous pencher en avant, assurez-vous que les roulettes avant sont dirigées vers l'avant (**Figure 7**). La base roulante est ainsi élargie, ce qui permet de stabiliser la chaise.
- Avant de vous pencher sur le côté, positionnez les roulettes de manière à assurer la plus grande stabilité latérale. (**Figure 8**)
- Assurez-vous que les roulettes verrouillables sont engagées avant de vous asseoir, de vous lever, de vous pencher ou d'utiliser la fonction chaise d'aisance.
- N'essayez PAS d'attraper des objets si ce geste vous force à vous pencher en avant dans la chaise. NE déplacez PAS votre poids vers l'objet que vous essayez d'attraper.
- N'essayez PAS d'attraper des objets qui se trouvent sur le sol en les soulevant entre vos genoux.
- NE déplacez PAS votre poids ou votre position, une fois assis(e), vers l'objet que vous essayez d'attraper.

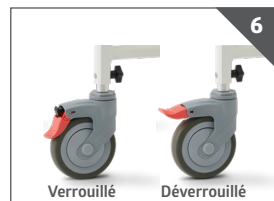


Figure 6

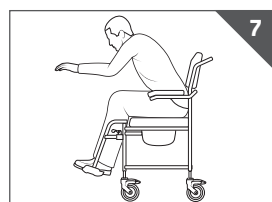


Figure 7



Figure 8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (SUITE)

Extension/appui vers l'arrière

- Positionnez la chaise aussi près que possible de l'objet. Assurez-vous que les roulettes avant sont dirigées vers l'avant. La base roulante est ainsi élargie, ce qui permet de stabiliser la chaise. **(Figure 9)**
- NE vous penchez PAS par-dessus le coussin du dossier. Penchez-vous seulement aussi loin que vous pouvez étendre le bras sans modifier votre position assise. **(Figure 9)**

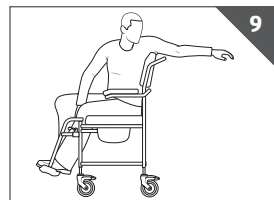


Figure 9

Transfert de la chaise

Le transfert vers et depuis la chaise est une tâche importante qui requiert équilibre, agilité et force dans le haut du corps. Exercez-vous en compagnie d'une autre personne avant d'essayer seul(e).

- Positionnez la chaise aussi près que possible de l'utilisateur.
- Assurez-vous que toutes les roulettes verrouillables sont engagées.
- Veillez à ce que les accoudoirs et les repose-pieds soient rabattus. **(Figures 10 et 11)**

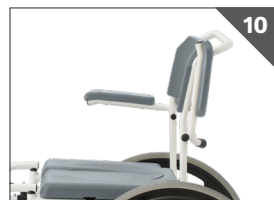


Figure 10

Obstacles

Les obstacles comme les bandes de seuil, planchers irréguliers, cordons électriques ou articles posés sur le sol, ou fissures dans la chaussée peuvent endommager la chaise et entraîner une perte de maîtrise ou un basculement. Regardez devant vous et évitez toute zone qui pourrait vous déstabiliser.



Figure 11

INSPECTION DE SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

- Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce, que toutes les pièces sont en bon état et que le tout est solide.
- Assurez-vous que l'ensemble des vis, écrous et boulons sont serrés.
- Vérifiez que les roulettes et leurs verrous ne sont pas usés, brisés ou manquants. Remplacez toutes les pièces manquantes ou endommagées avant utilisation.
- Vérifiez que les roulettes verrouillables sont toujours bien engagées pendant l'utilisation.
- Le poids de l'utilisateur doit être réparti uniformément entre les accoudoirs lors du transfert vers ou depuis la chaise d'aisance.

NETTOYAGE

Nettoyez après chaque utilisation.

- Utilisez des produits nettoyants ordinaires à usage domestique. Utilisez un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau tiède. Essuyez après le nettoyage.
- N'utilisez PAS de poudres ou de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.

ADVERTENCIAS GENERALES

Cerciórese de leer todas las instrucciones e información de seguridad antes de usar esta silla. Si tiene preguntas sobre la seguridad de este producto o cómo ingresar y salir del baño, consulte con un profesional médico. **NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.**

Los usuarios con fuerza física y/o movilidad limitada deben ser supervisados y/o asistidos cuando usen la silla retrete.

- NO monte ni use este producto sin antes haber leído y comprendido esta guía del usuario; de lo contrario podrían producirse lesiones y/o daños.
- NO lo use si hay componentes que faltan o están dañados. Comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2868.
- NO exceda la capacidad de carga de 275 lb (124 kg).
- NO realice ningún ajuste mientras usa el producto.
- NO use los brazos para soportar el peso de todo el cuerpo.
- NO se pare en el armazón del producto.
- NO se pare ni ejerza presión excesiva sobre los reposapiés. Cuando se suba o baje de la silla, cerciórese de que las plataformas para pies estén LEVANTADAS.
- NO intente levantar el producto sujetándolo de los reposabrazos ni de ningún componente desmontable.
- NO coloque los dedos ni las manos cerca de ninguna pieza móvil.
- NO se transfiera hacia o desde la silla por su propia cuenta, a menos que posea suficiente fuerza en la parte superior del cuerpo, equilibrio y agilidad.
- NO se incline hacia adelante fuera de la silla más allá de la longitud de los reposabrazos.
- NO intente alcanzar objetos si ello implica mover el cuerpo hacia adelante en el asiento.
- NO desplace su peso ni la posición de sentado hacia la dirección que desea alcanzar, ya que la silla podría volcarse.
- NO intente inclinarse por encima del cojín de respaldo para alcanzar objetos.
- NO incline la silla sin ayuda.
- NO recline el respaldo de la silla pues ello podría hacer que se vuelque. Si intenta alcanzar algún objeto, estírese hacia atrás solo hasta donde pueda extender el brazo sin alterar la posición de sentado.
- NO modifique la silla. Ejemplos: perforar, esmerilar, soldar piezas, usar piezas no autorizadas/no aprobadas. Tales modificaciones pueden cambiar la estructura y el centro de equilibrio de la silla, y por lo tanto aumentar el riesgo de que el usuario sufra lesiones graves, y anular la garantía.
- NO use esta silla en un entorno al aire libre.

MONTAJE

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA SILLA.

1. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas enumeradas.
2. Montaje del conjunto del respaldo: Desatornille ambas perillas de bloqueo del conjunto del armazón del respaldo. Inserte el conjunto del armazón del respaldo en el armazón y afíancelo con las perillas de bloqueo. Baje los reposabrazos a la posición de uso. **(Figura 1)**
3. Montaje del asiento: Coloque el asiento sobre su armazón. Presione firmemente hacia abajo hasta que cada presilla encaje en su lugar. Nota: Cerciórese de que la parte que entra en el armazón esté ubicada en la parte trasera. **(Figura 2)**
4. Montaje de los reposapiés: Inserte los reposapiés en los tubos del armazón y gire el reposapiés hacia adelante. El reposapiés debe encajar en su lugar. **(Figura 3)**



1. Manillar
2. Cojín de respaldo
3. Reposabrazos
4. Asiento
5. Reposapiés
6. Ruedecillas de dirección
7. Perillas de bloqueo (2)

AJUSTES

Ajuste de las ruedecillas

1. Retire el perno de la ruedecilla delantera usando la llave Allen y la herramienta que se proporcionan.
2. Ajuste la ruedecilla a la altura deseada.
3. Bloquee la ruedecilla en su lugar con el perno y la tuerca. Repita el procedimiento hasta que las cuatro ruedecillas se hayan ajustado a la misma altura. **(Figura 4)**

Ajuste de los reposapiés

1. Desatornille el perno y la tuerca de la parte trasera del armazón del reposapiés.
2. Ajuste el reposapiés a la altura deseada y atornille el perno y la tuerca.
3. Repita el procedimiento hasta que ambos reposapiés se hayan ajustado a la altura deseada. Cerciórese de que los tornillos estén completamente apretados. **(Figura 5)**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

INSTRUCCIONES DE USO

Bloqueo de las ruedecillas

1. Pise la lengüeta para bloquear la ruedecilla en su lugar.
2. Para liberarla, levante la lengüeta desde debajo. **(Figura 6)**

Uso como silla retrete

1. Siempre bloquee las ruedecillas antes de usar la silla.
2. Retire la tapa del cubo y empuje el cubo en su lugar desde la parte trasera de la silla.
3. Retire el recorte de la tapa del asiento acolchado.
4. Después del uso, retire el cubo desde la parte trasera. Vacíe el contenido y límpielo inmediatamente.
5. Vuelva a colocar el recorte de la tapa del asiento acolchado.

Uso sobre el inodoro

1. Retire el cubo y la tapa desde la parte trasera.
2. Retire el recorte de la tapa del asiento acolchado.
3. Levante el asiento y la tapa del inodoro.
4. Haga rodar la silla retrete sobre el inodoro y bloquee las ruedecillas.

Uso como silla de ducha

1. Retire el cubo y la tapa desde la parte trasera.
2. Retire el recorte de la tapa del asiento acolchado.
3. Cuando use la silla en la ducha, cerciórese de que las ruedecillas de bloqueo estén accionadas.

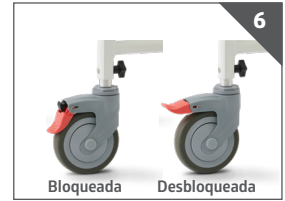


Figura 6

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Alcanzar/inclinarse/doblarse hacia adelante o hacia los lados

- Coloque la silla lo más cerca posible del objeto.
- Al alcanzar hacia adelante, cerciórese de colocar las ruedecillas delanteras apuntando hacia adelante **(Figura 7)**. Esto extiende la base de las ruedas y contribuye a estabilizar la silla.
- Al alcanzar hacia los lados, coloque las ruedecillas en la posición que proporcione la mayor estabilidad lateral. **(Figura 8)**
- Cerciórese de que las ruedecillas de bloqueo estén accionadas antes de sentarse, pararse, alcanzar o usar el producto como silla retrete.
- NO intente alcanzar objetos si ello implica mover el cuerpo hacia adelante en el asiento. NO desplace su peso hacia la dirección que desea alcanzar.
- NO intente alcanzar objetos si ello exige inclinarse entre sus rodillas para recogerlos del piso.
- NO desplace su peso ni la posición de asiento hacia la dirección que desea alcanzar.



Figura 7



Figura 8

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Alcanzar/inclinarse hacia atrás

- Coloque la silla lo más cerca posible del objeto. Cerciórese de colocar las ruedecillas delanteras apuntando hacia adelante. Esto extiende la base de las ruedas y contribuye a estabilizar la silla. **(Figura 9)**
- NO se incline hacia atrás por encima del cojín de respaldo. Solo inclínese hacia atrás hasta donde lo permita su brazo sin cambiar su posición en el asiento. **(Figura 9)**

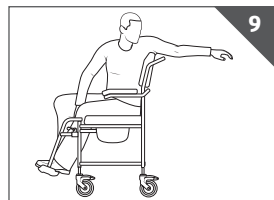


Figura 9

Transferirse a la silla o fuera de ella

Transferirse a la silla o fuera de ella es una tarea importante que requiere fuerza en la parte superior del cuerpo, equilibrio y agilidad. Practique con ayuda antes de intentarlo.

- Coloque la silla lo más cerca posible del usuario.
- Cerciórese de que todas las ruedecillas de bloqueo estén accionadas.
- Cerciórese de que los reposabrazos y los reposapiés no estorben. **(Figuras 10 y 11)**

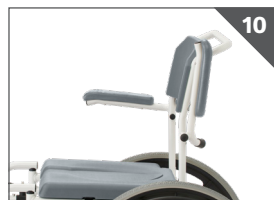


Figura 10

Obstáculos

Los obstáculos tales como umbrales de pisos, pisos desnivelados, cables u objetos en el piso o grietas en el suelo pueden dañar la silla y hacer que se pierda el control o se vuelque. Revise el trayecto y evite todas las áreas que puedan causar inestabilidad.



Figura 11

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Antes del uso cerciórese de lo siguiente:

- Que no haya componentes sueltos, rotos o faltantes.
- Que todos los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
- Que las ruedecillas y sus bloqueos no estén desgastados, rotos o falten. Antes del uso, reemplace las piezas faltantes o dañadas.
- Que las ruedecillas de bloqueo estén siempre bien accionadas durante el uso.
- Que el usuario distribuya uniformemente el peso entre los soportes de los brazos al transferirse a la silla retrete o fuera de ella.

LIMPIEZA

Límpielo después de cada uso.

- Límpielo con productos de limpieza comunes para el hogar. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia. Séquelo con un paño después de limpiarlo.
- NO use polvos o limpiadores abrasivos ni esponjas para restregar.

Limited Warranty

Medline guarantees for the original purchaser, that the frame of the chair will be free from defects in materials for the life of the chair.

Medline also guarantees the parts on the chair to be free from defect in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase by the original purchaser.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse, negligence or normal wear and tear. All warranty claims must include the product in questions unless otherwise authorized by Medline. For more information about the product or warranty, call Medline at 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2868.

Garantie Limitée

Medline garantit à l'acheteur initial que le châssis du banc est exempt de tout défaut de matériaux pendant la durée de vie utile du banc.

Medline garantit aussi les pièces du banc contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat par le premier acheteur.

Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'article liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. Le produit concerné doit être inclus dans toutes les réclamations au titre de la garantie, sauf autorisation contraire de Medline. Pour de plus amples renseignements sur le produit ou la garantie, appelez Medline au 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2868.

Garantía Limitada

Medline garantiza al comprador original que el armazón de la silla no presentará defectos de materiales durante toda la vida útil de la silla.

Medline garantiza asimismo que las piezas de la silla no presentarán defectos de materiales ni de mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de adquisición por parte del comprador original.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debida al mal uso o negligencia del propietario ni al desgaste normal. A menos que Medline autorice lo contrario, todos los reclamos de garantía deben incluir el producto en cuestión. Para obtener más información sobre el producto o la garantía, llame a Medline al 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2868.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual.

©2021 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP, 2021. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México
01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us    