



# GUARDIAN<sup>®</sup>

User's Guide | Manuel de l'utilisateur  
Guía del usuario

Aluminum

**Drop-arm Commode**

**Chaise d'aisance  
à accoudoirs  
rabattables**

en aluminium

**Silla retrete con brazos  
abatibles** de aluminio



**Adjustable Height | Locking  
Casters**

**Hauteur réglable | Roulettes  
verrouillables**

Altura ajustable | Ruedas con bloqueo

REF G1-506DWX1

## General Warnings

To ensure the safe assembly and operation of the product, these instructions must be followed. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.

If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.

- DO NOT assemble and use this product without first reading and understanding this user guide, otherwise injury or damage may occur.
- DO NOT use if components are missing or are damaged, contact Medline at 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.
- DO NOT exceed weight capacity of 300 lbs (136 kg).
- DO NOT make any adjustments while using the product.
- DO NOT attempt to use the arms to support full body weight.
- DO NOT stand on the commode.



**Fully Assembled Drop-arm Commode**

## Cautions

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the product. Prior to use, ensure the following:

1. Toilet seat must be in the down position before use. Failure to do so may result in possible injury or damage.
2. All push buttons are fully protruded and are properly engaged.
3. There are no loose, broken or missing components and ensure all parts are secure.
4. When using the backrest, ensure the commode remains balanced. Excessive twisting or turning while seated on the commode may cause a loss of balance and/or damage to the product.
5. The wheels and wheel locks are not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged parts before use.
6. All four legs touch the floor simultaneously at all times. Always ensure the wheel locks are properly engaged during use.
7. User evenly distributes weight between the arm supports when transferring in and out of the commode.
8. Arms should be unlatched and dropped to assist in transfer on or off the device.

## Assembly and use

Frame is shipped partially assembled. If exposed to cold temperatures, allow contents

to come to room temperature before completing assembly. Remove contents from box, making sure you have all parts described here:

- Seat Frame with left and right drop arms assembled (1)
- Backrest Assembly (1)
- Splash Guard (1)
- Toilet Seat (1)
- Toilet Lid (1)
- Bucket Lid (1)
- Bucket (1)

1. Place the arm assembly (L) and arm assembly (R) into seat frame by pushing in pin and lifting arm up. **(Figure 1)**
2. Place backrest assembly between the arm assemblies.
3. Snap clips on toilet seat into place on the seat frame. Lower the splash guard bucket, bucket and bucket lid into seat frame assembly. **(Figure 2)**
4. Lock wheels before use by pushing down brake tab on each wheel. Pull up on tab to release brakes to roll the commode when needed. **(Figure 3)**

## Adjusting leg height

Before using the commode, make sure all legs are set to the same preferred height.

1. To adjust leg height, depress pushbutton and slide each leg to desired height by aligning with proper holes and letting the pushbutton snap into the correct hole to lock leg in place. **(Figure 4)**
2. Make sure legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg commode.

## Maintenance

Periodic visual inspection of this commode is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

## Cleaning

1. Clean with regular household cleaning products. Use a non-abrasive cleaner with warm water. Wipe dry after cleaning.
2. DO NOT use abrasive powders, cleaners or scouring pads.



Figure 1



Figure 2




Figure 3



Figure 4

## Avertissements généraux

Suivez à la lettre les instructions suivantes pour un assemblage et une utilisation sécuritaires du produit. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUR L'UTILISATEUR OU ENDOMMAGER LE PRODUIT. Si vous ne comprenez pas ces avertissements, ces mises en garde ou ce mode d'emploi, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.

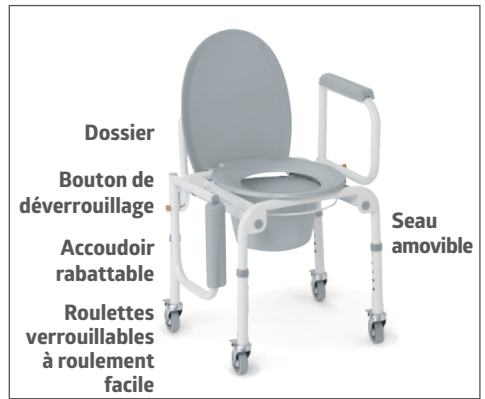

Chaise d'aisance à accoudoirs rabattables assemblée

- N'assemblez PAS et N'utilisez PAS ce produit sans avoir d'abord lu et compris le manuel de l'utilisateur. Il y a sinon un risque de blessure ou de dommages.
- N'utilisez PAS le produit s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées; communiquez avec Medline en appelant au 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.
- NE dépassez PAS la capacité de charge de 136 kg (300 lb).
- NE faites AUCUN réglage lors de l'utilisation du produit.
- NE tentez PAS d'appuyer tout le poids du corps sur les accoudoirs.
- NE montez PAS sur la chaise d'aisance.

## Mises en garde

Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité sont limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du produit. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

1. La lunette doit être abaissée avant l'utilisation. Vous risquez sinon de vous blesser ou d'endommager la chaise d'aisance.
2. Assurez-vous que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et sont enclenchés.
3. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce et que toutes les pièces sont bien serrées.
4. Lors de l'utilisation du dossier, vérifiez la stabilité de la chaise d'aisance. Des rotations excessives de l'occupant peuvent déséquilibrer la chaise d'aisance et l'endommager.
5. Vérifiez que les roulettes et leurs verrous ne sont pas usés, brisés ou manquants. Remplacez toutes les pièces manquantes ou endommagées avant utilisation.
6. Les quatre pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps. Vérifiez toujours que les verrous des roulettes sont bien engagés durant l'utilisation.
7. Le poids de l'utilisateur doit être réparti uniformément entre les accoudoirs lors du transfert vers ou depuis la chaise d'aisance.
8. Les accoudoirs doivent être déverrouillés et abaissés pour faciliter le transfert vers ou depuis la chaise.

## Assemblage et utilisation

Le cadre est livré partiellement assemblé. S'il est exposé à des températures froides, laissez le contenu atteindre la température ambiante avant de procéder à l'assemblage. Videz la boîte de son contenu en vérifiant que toutes les pièces décrites sont présentes :

- Cadre de la lunette avec accoudoirs rabattables gauche et droit assemblés (1)
- Dossier (1)
- Pare-éclaboussures (1)
- Lunette (1)
- Couvercle de la lunette (1)
- Couvercle du seau (1)
- Seau (1)

1. Placez les accoudoirs (G et D) dans le cadre de la lunette en poussant la goupille et en relevant chaque accoudoir. (**Figure 1**)
2. Placez le dossier entre les accoudoirs.
3. Enclenchez les agrafes de la lunette sur le cadre de la lunette. Abaissez le pare-éclaboussures, le seau et le couvercle du seau sur le cadre de la lunette. (**Figure 2**)
4. Verrouillez les roulettes avant usage en abaissant la patte du frein sur chaque roulette. Relevez la patte pour desserrer les freins et rouler la chaise d'aisance au besoin. (**Figure 3**)

## Réglage de la hauteur des pattes

Avant d'utiliser la chaise d'aisance, assurez-vous que les pattes sont toutes à la même hauteur.

1. Pour régler la hauteur des pattes, appuyez sur le bouton-poussoir de chaque patte et réglez la hauteur en l'alignant dans le trou correspondant, puis laissez le bouton-poussoir s'enclencher dans le trou choisi pour bloquer la patte en place. (**Figure 4**)
2. Assurez-vous que les pattes sont verrouillées en poussant puis en tirant sur chacune d'elles.

## Entretien

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle de la chaise d'aisance pour s'assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état de marche et ne sont ni usés, ni brisés, effilochés ou lâches, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, n'utilisez pas le produit. En cas de problèmes, communiquez avec Medline en appelant au 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

## Nettoyage

1. Utilisez des produits nettoyants ordinaires à usage domestique. Utilisez un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau tiède. Essayez après le nettoyage.
2. N'utilisez PAS de poudres ou de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

## Advertencias generales

Para garantizar el montaje y funcionamiento seguros del producto, deben seguirse estas instrucciones. **NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no entiende estas advertencias, precauciones y/o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, un distribuidor o con Medline antes de intentar usar este producto.

- NO monte ni use este producto sin antes haber leído y comprendido esta guía del usuario, de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- NO lo use si hay componentes que faltan o están dañados, póngase en contacto con Medline llamando al 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.
- NO exceda la capacidad de carga de 300 lb (136 kg).
- NO realice ningún ajuste mientras usa el producto.
- NO use los brazos para soportar el peso de todo el cuerpo.
- NO se pare en la silla retrete.



**Silla retrete con brazos abatibles completamente montada**

## Precauciones

Los usuarios con fuerza física y/o movilidad limitada deben ser supervisados y/o asistidos cuando usen el producto. Antes de usarlo, cerciórese de lo siguiente:

1. El asiento del inodoro debe estar en posición baja antes del uso, de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños.
2. Que todos los pulsadores sobresalgan completamente y estén bien encajados.
3. Que no haya componentes sueltos, rotos o faltantes y que todas las piezas estén fijas.
4. Al utilizar el respaldo, cerciórese de que la silla retrete permanezca equilibrada. Torcer el cuerpo o girarlo excesivamente mientras se está sentado en la silla retrete puede causar la pérdida de equilibrio y/o dañar el producto.
5. Que las ruedas y sus bloqueos no estén desgastados, rotos o falten. Antes del uso, reemplace las piezas faltantes o dañadas.
6. Que las cuatro patas toquen el piso simultáneamente en todo momento. Siempre cerciórese de que los bloqueos de las ruedas estén apropiadamente activados durante el uso.
7. Que el usuario distribuya uniformemente el peso entre los soportes de los brazos al transferirse a la silla retrete o fuera de ella.
8. Los brazos deben estar destrabados y bajados para ayudar en la transferencia al o desde el dispositivo.

## Montaje y uso

El armazón se envía parcialmente montado. Si el contenido se expone a temperaturas frías, deje que alcance la temperatura ambiente antes de completar el montaje. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas descritas aquí:

- Armazón del asiento con los brazos abatibles izquierdo y derecho montados (1)
- Conjunto del respaldo (1)
- Protección antisalpicaduras (1)
- Asiento del inodoro (1)
- Tapa del inodoro (1)
- Tapa del cubo (1)
- Cubo (1)

1. Coloque el conjunto del brazo izquierdo y del derecho en el armazón del asiento presionando el pasador y levantando el brazo. (**Figura 1**)
2. Coloque el conjunto del respaldo entre los conjuntos de brazos.
3. Encaje en su lugar las presillas en el armazón del asiento del inodoro. Baje la protección antisalpicaduras, el cubo y su tapa en el conjunto del armazón del asiento. (**Figura 2**)
4. Bloquee las ruedas antes del uso presionando hacia abajo la lengüeta de freno en cada una de ellas. Tire de la lengüeta hacia arriba para liberar los frenos a fin de hacer rodar la silla retrete cuando sea necesario. (**Figura 3**)



Figura 1



Figura 2



Figura 3

## Ajuste de la altura de las patas

Antes de usar la silla retrete, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada.

1. Para ajustar la altura de las patas, oprima el pulsador y deslice cada pata a la altura deseada alineándola con los orificios adecuados y dejando que el pulsador encaje en el orificio correcto a fin de bloquear la pata en su lugar. (**Figura 4**)
2. Cerciórese de que las patas estén bloqueadas en su lugar empujándolas hacia abajo y tirando de cada una hacia arriba.



Figura 4

## Mantenimiento

Se recomienda inspeccionar visual y periódicamente esta silla retrete para asegurarse de que todas las piezas y los herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deteriorados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, por favor comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

## Limpieza

1. Límpiolo con productos de limpieza comunes para el hogar. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia. Séquelo con un paño después de limpiarlo.
2. NO use polvos o limpiadores abrasivos ni esponjas para restregar.

## Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

## Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice matériel et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans le matériel et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et pratique. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

## Garantía Limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline United States  
1-800-MEDLINE (633-5463)  
medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline Mexico

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us



Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP, 2021. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.