

MOBILITY  
MOVILIDAD  
MOBILITÉ

McKESSON

## Walker Glides tennis balls

WITH REPLACEMENT GLIDE PADS  
EASY TO INSTALL | DURABLE

Provides a quiet, smooth glide experience  
when used with a walker.

## Deslizadores para andador

pelotas de tenis

CON ALMOHADILLAS DESLIZADORAS DE REPUESTO  
FÁCIL DE INSTALAR | DURADERO

Brinda un deslizamiento sin problemas y en silencio al usarse  
con un andador.


## Patins pour cadre de marche

balles de tennis

AVEC PATINS DE REMPLACEMENT | INSTALLATION FACILE | DURABLE


Offre une expérience de glissement silencieuse et en douceur lorsqu'il est  
utilisé avec un cadre de marche.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

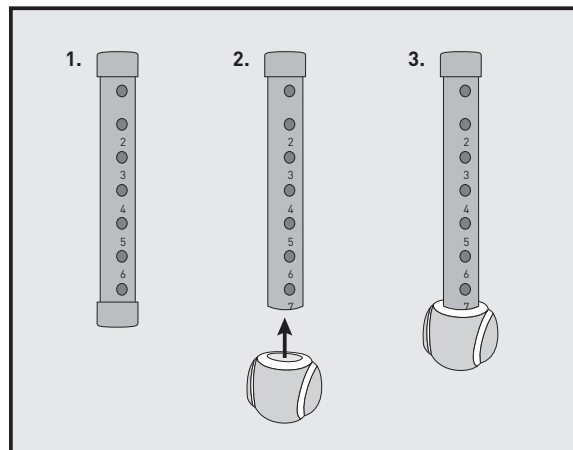


1. Remove tips from both rear legs of walker
2. Slide Tennis Ball Glide over tubing. Push Tennis Ball Glide up until tubing is secure inside Tennis Ball Glide

## TO REPLACE GLIDE PADS

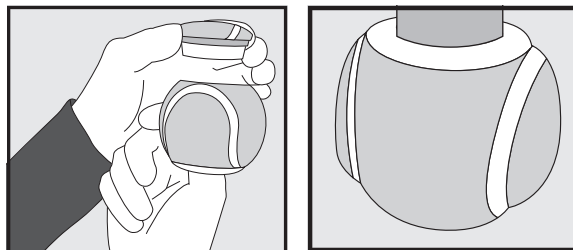


1. Pull Tennis Ball Glide off extension leg.
2. Grasp tennis ball with one hand and insert thumb into Tennis Ball Glide. Push replacement tennis ball pad until it is removed from Tennis Ball Glide.
3. Push replacement glide pad into tennis ball glide until it is secured into position.
4. Replace pads when felt is worn.

## INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

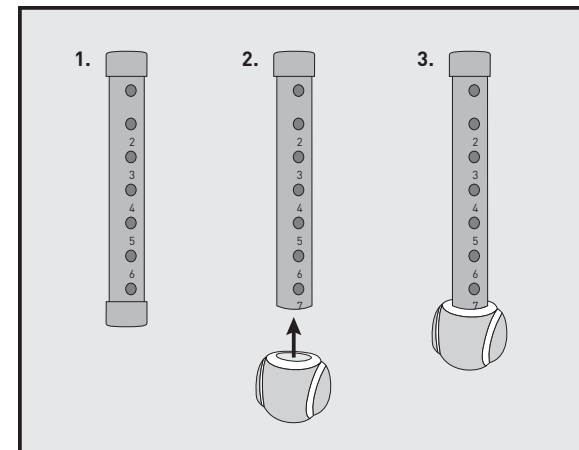

1. Quite los extremos de ambas patas posteriores del andador
2. Deslice el Deslizante de la Bola de Tenis sobre el tubo. Empuje el Deslizante de la Bola de Tenis hacia arriba hasta que el tubo esté seguro dentro del Deslizante de la Bola de Tenis.

## PARA REEMPLAZAR LAS ALMOHADILLAS DE DESLIZAMIENTO

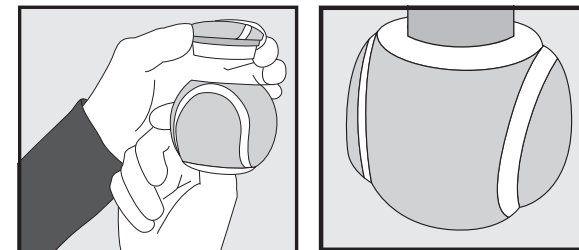


1. Quite el Deslizante de la Bola de Tenis de la pata de extensión.
2. Tome la bola de tenis con una mano e introduzca el pulgar en el Deslizante de la Bola de Tenis. Empuje la almohadilla de la bola de tenis de reemplazo hasta que quitarla del Deslizante de la Bola de Tenis.
3. Empuje la almohadilla de deslizamiento de reemplazo dentro del deslizante de la bola de tenis hasta que esté segura en su posición.
4. Reemplace las almohadillas cuando note que están gastadas.

POWERED BY  
CON LA TECNOLOGÍA DE  
PROPULSÉ PAR

**drive**


MFR # 146-10121

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

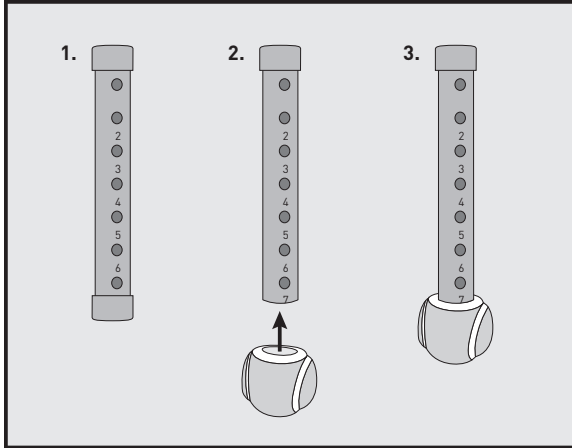

1. Enlever l'extrémité de chaque pied arrière du déambulateur.
2. Enfiler un système de glissement par balle de tennis sur chaque pied. Pousser en remontant jusqu'à ce que chaque système soit fermement en place.

## REPLACEMENT DES PATINS DE GLISSEMENT

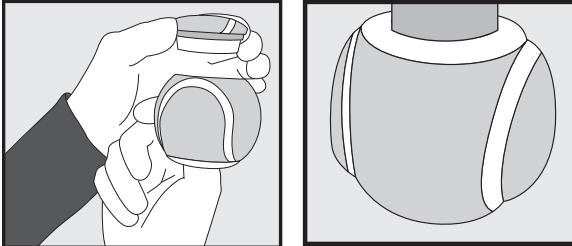

1. Enlever le système de glissement par balle de tennis de l'extension du pied.
2. Saisir la balle de tennis d'une main et insérer le pouce à l'intérieur du système. Pousser le patin par balle de tennis de remplacement pour le faire sortir.
3. Insérer ensuite le patin de glissement de remplacement jusqu'à ce qu'il soit fermement en position.
4. Remplacer les patins quand le feutre est usé.

McKesson carries a comprehensive selection of durable medical equipment products for bath safety, mobility and aids to daily living, including wheelchairs, canes, bath benches, and more. Choose McKesson for quality, selection, and value.



Technical support, replacement parts and warranty information? Call 1-866-694-5085  
General product questions? Call 1-800-777-4908

**Satisfaction Guaranteed**

Distributed by McKesson Medical-Surgical Inc.  
Richmond, VA 23233  
PVN A0618  
Made in China