

Tennis Elbow Strap

For use with MFR #'s 155-BH-194

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INDICATIONS

- Medial epicondylitis (golfer's elbow) • Lateral epicondylitis (tennis elbow)

PRECAUTIONS

- If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately.
- Neoprene supports should not be worn by individuals with known susceptibility to dermatitis or allergies to neoprene by products.

DIRECTIONS FOR USE

1. Wrap the support around the forearm at least two finger widths below crease of the elbow.
2. The support should fit snugly, but it should not be tight enough to impair circulation.
3. Loop end through D-ring and secure. For the tennis elbow strap, secure hook and loop closures. Support should fit snugly, but it should not be tight enough to impair circulation.

CLEANING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water using mild soap, rinse thoroughly. AIR DRY. Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

Not made with natural rubber latex.

Questions? Call 1-800-777-4908

Technical Support? Call 1-800-336-6569


Distributed by McKesson Medical-Surgical Inc.

Richmond, VA 23233

PVN A0520

PN 13-5502 Rev A

Made in Mexico

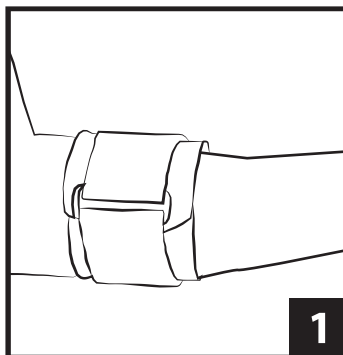

Symbol Definitions	
Symbol	Definition
	Consult instructions for use
	Caution, consult accompanying documents

NOTICE: While every effort has been made in state-of-the-art techniques to obtain the maximum compatibility of function, strength, durability and comfort, this device is only one element in the overall treatment program administered by a medical professional. There is no guarantee that injury will be prevented through the use of this product.

Correa de Codo de Tenista

Para uso con MFR #'s 155-BH-194

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

INDICACIONES

- Epicondilitis media (codo de golfista) • Epicondilitis lateral (codo de tenista)

PRECAUCIONES

- Si experimentara dolor, inflamación, cambios en la sensación o cualquier reacción inusual al usar este producto, consulte a su médico inmediatamente.
- Las personas de sensibilidad conocida a la dermatitis o alérgicas a subproductos neoprénicos no deben usar soportes de neopreno.

LAS INSTRUCCIONES DE USO

1. Envuelva el soporte alrededor del antebrazo al menos dos anchuras de dedo por debajo del pliegue del codo.
2. Para soportes con almohadillas de compresión, coloque la almohadilla en el lado afectado del antebrazo. El soporte ha de quedar bien ajustado, pero sin impedir la circulación.
3. Pase el extremo por el arillo de ajuste y sujételo. Para cintas elásticas del codo de tenista, sujete los cierres de Velcro. El soporte ha de quedar bien ajustado, pero sin impedir la circulación.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Lave el producto a mano con agua fría y jabón suave, y enjuáguelo bien. SÉQUELO AL AIRE.

Nota: Si no se enjuaga correctamente, los restos de jabón pueden ocasionar irritación y deteriorar el material.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

No está hecho con látex de caucho natural.

Distribuido por McKesson Medical-Surgical Inc.

Richmond, VA 23233

PVN A0520

PN 13-5502 Rev A

Hecho en Mexico

Definiciones de Símbolos	
Símbolo	Definición
	Consulte las instrucciones de uso
	Precaución: consultar los documentos adjuntos

AVISO: Si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles con las técnicas más modernas para obtener la compatibilidad máxima de la función, resistencia, durabilidad y comodidad, no existe garantía alguna de que se evitarán lesiones durante el empleo de este producto.