

## Premium Shoulder Immobilizer

For use with MFR #'s 155-79-84100C.

**BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.**

### INDICATIONS

For immobilization aid of the shoulder following surgery, injury, or cast removals.

### PRECAUTIONS

- If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately.

### DIRECTIONS FOR USE

1. Wrap and secure the chestband around the rib cage.
2. Wrap and secure the upper arm strap.
3. Wrap and secure the wrist strap.
4. For immobilizers with shoulder straps, bring strap over uninjured shoulder and secure.
5. For immobilizers with detachable straps, secure straps to chestband prior to application of brace.

### CLEANING INSTRUCTIONS

Hand wash in warm water with mild detergent. Rinse thoroughly and air dry.

### FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

Not made with natural rubber latex.

Questions? Call 1-800-777-4908

Technical Support? Call 1-800-336-6569



Distributed by McKesson Medical-Surgical Inc.

Richmond, VA 23233

PVN A0520

PN 13-5339 Rev A

Made in China

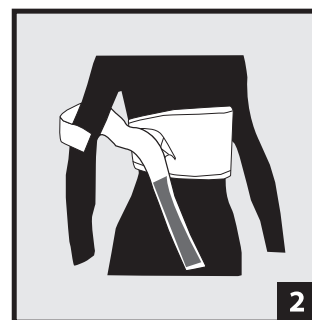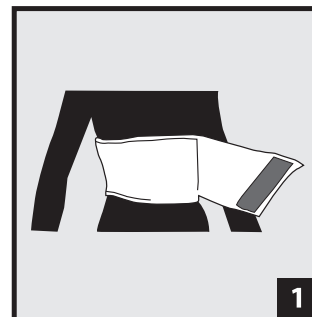

Symbol Definitions	
Symbol	Definition
	Consult instructions for use
	Caution, consult accompanying documents

**NOTICE:** While every effort has been made in state-of-the-art techniques to obtain the maximum compatibility of function, strength, durability, and comfort, this device is only one element in the overall treatment program administered by a medical professional. There is no guarantee that injury will be prevented through the use of this product.

## Inmovilizador de Hombro Premium

Para uso con MFR #'s 155-79-84100C.

**ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.**

### INDICACIONES

Inmovilización del hombro tras cirugía, lesiones, o retirada de enyesado.

### PRECAUCIONES

- Si experimentara dolor, inflamación, cambios en la sensación o cualquier reacción inusual al usar este producto, consulte a su médico inmediatamente.

### LAS INSTRUCCIONES DE USO

1. Pase y fije la banda torácica alrededor del tórax.
2. Envuelva y fije la correa del brazo.
3. Envuelva y fije la correa de la muñeca.
4. Para inmovilizadores con correas para el hombro, pase la correa sobre el hombro sano y fíjela.
5. Para inmovilizadores con correas despegables, fije las correas a la banda torácica antes de la aplicación de la férula.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

El lavado se realiza a mano con detergente suave en agua templada. Enjuague exhaustivamente y seque al aire.

### PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

No está hecho con látex de caucho natural.

Distribuido por McKesson Medical-Surgical Inc.

Richmond, VA 23233

PVN A0520

PN 13-5339 Rev A

Hecho en China

Definiciones de Símbolos	
Símbolo	Definición
	Consulte las instrucciones de uso
	Precaución: consultar los documentos adjuntos

**AVISO:** Si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles con las técnicas más modernas para obtener la compatibilidad máxima de la función, resistencia, durabilidad, y comodidad, no existe garantía alguna de que se evitarán lesiones durante el empleo de este producto.