

Universal Wrist Splints

For use with MFR #'s 155-81-87460, 155-81-87470.

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INDICATIONS

Treatment of wrist sprains, strains, and carpal tunnel syndrome (CTS).

CONTRAINDICATIONS:

Phlebitis patients should not wear neoprene products.

PRECAUTIONS

- Neoprene supports should not be worn by individuals with known susceptibility to dermatitis or allergies to neoprene by-products. If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately.

DIRECTIONS FOR USE

- Loosen all straps and position hand in brace. Make sure the palmer stay is positioned comfortably below the palmer crease and aligned with forearm.
- Position adjustable dorsal strap pod to ensure maximum support and proper fit. Stay pod maybe moved proximal or distal for desired controlled range-of-motion.
- Secure strap between thumb and forefinger.
- Use single pull Velstretch® strap to secure body of brace. Straps should be snug but not constrict.

NOTE: Single pull strap should feed through underside of opposing side of brace and D-Ring prior to securing.

CLEANING INSTRUCTIONS

Hand wash liner in warm water using mild soap, rinse thoroughly. AIR DRY.

NOTE: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

Not made with natural rubber latex.

Questions? Call 1-800-777-4908

Technical Support? Call 1-800-336-6569





Distributed by McKesson Medical-Surgical Inc.

Richmond, VA 23233

PVN A0520

PN 13-5512 Rev A

Made in China

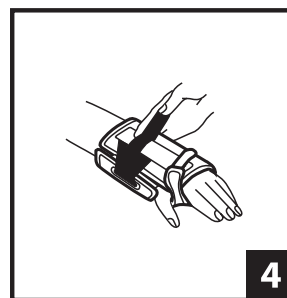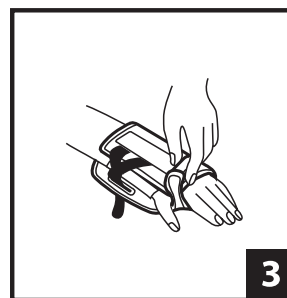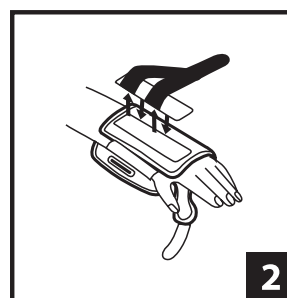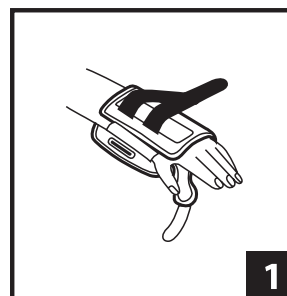

Symbol Definitions	
Symbol	Definition
	Consult instructions for use
	Caution, consult accompanying documents

NOTICE: While every effort has been made in state-of-the-art techniques to obtain the maximum compatibility of function, strength, durability and comfort, this device is only one element in the overall treatment program administered by a medical professional. There is no guarantee that injury will be prevented through the use of this product.

Férulas de Muñeca Universales

Para uso con MFR #'s 155-81-87460, 155-81-87470.

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

INDICACIONES

Tratamiento de esguinces de muñeca, distensiones y síndrome del túnel carpiano (STC).

CONTRAINDICACIONES:

Los pacientes con flebitis no deben llevar productos de neopreno.

PRECAUCIONES

- Las personas que sufran de susceptibilidad conocida a la dermatitis o alergias a los productos que contengan derivados del neopreno no deben llevar soportes de este material. Si experimentara dolor, inflamación, cambios en la sensación o cualquier reacción inusual al usar este producto, consulte a su médico inmediatamente.

LAS INSTRUCCIONES DE USO

- Afloje todas las cintas y coloque la mano en la sujeción. Asegúrese de que el soporte de la palma quede cómodamente colocado por debajo del pliegue de la palma y alineado con el antebrazo.
- Coloque el receptáculo de la cinta dorsal ajustable de modo que permita un soporte máximo y un ajuste adecuado. El receptáculo de soporte puede desplazarse para controlar la amplitud de movimientos como convenga.
- Sujete la cinta entre el pulgar y el índice.
- Utilice la cinta Velstretch® de un solo tirón para fijar el cuerpo de la sujeción. Las cintas deben quedar ajustadas, pero sin limitar el movimiento.

NOTA: La cinta de un solo tirón debe atravesar la parte inferior del lado opuesto de la sujeción y el anillo en forma de D, antes de fijarla.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Lavar la funda a mano en agua caliente utilizando un jabón suave, aclarar completamente. SÉQUELA AL AIRE LIBRE. NOTA: Si no se aclarara completamente, el jabón residual podría causar irritación y deteriorar el material.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

No está hecho con látex de caucho natural.

Distribuido por McKesson Medical-Surgical Inc.

Richmond, VA 23233

PVN A0520

PN 13-5512 Rev A

Hecho en China

Definiciones de Símbolos	
Símbolo	Definición
	Consulte las instrucciones de uso
	Precaución: consultar los documentos adjuntos

AVISO: Si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles con las técnicas más modernas para obtener la compatibilidad máxima de la función, resistencia, durabilidad y comodidad, no existe garantía alguna de que se evitarán lesiones durante el empleo de este producto.