



GUARDIAN[®]

User's Guide | Manuel de l'utilisateur |
Guía del usuario



**5" (12.7 cm) Raised
Toilet Seat With Lock**

**Siège de toilette
surélevé de 12,7 cm
(5 po) avec verrou**

**Asiento de inodoro elevado 5"
(12.7 cm) con traba**

**Weight Capacity
Capacité de poids de
Capacidad de peso de
400 lb (181 kg)**

REF G4-501RX1

Not Made With Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

User Instructions

Safety Summary: The following recommendations are made for the safe assembly of the raised toilet seat.


WARNINGS

- **DO NOT** assemble or use this raised toilet seat without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this raised toilet seat. Otherwise, injury or damage may occur.
- Certain toilet fixtures will prevent the locking raised toilet seat from working properly and/or will damage the locking raised toilet seat. If the toilet bowl has any raised or protruding sections on its top or inner ring, the locking raised toilet seat should not be used.
- After assembly and **BEFORE** use, ensure that **ALL** attaching hardware is securely tightened.
- Always check to make sure that the raised toilet seat is properly and securely locked in place before using. Make certain that the knob that secures the raised toilet seat to the commode is tight at all times.
- Center your weight on the raised toilet seat. The seat may tip if you lean too far forward or to either side.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the raised toilet seat.
- **DO NOT** exceed the maximum weight capacity of 400 lb (181 kg).
- Rotate the adjustment only by hand in order to prevent over torquing the assembly. Use of a wrench or other tool will break the screw assembly. **DO NOT FORCE** knob as this may damage the knob and/or the raised toilet seat.
- The Medline raised toilet seat is not designed for permanent installation. The unit should be loosened and retightened at least once a week to ensure a proper fit.
- If, for any reason, a proper fit in installation cannot be achieved, **DO NOT** use and contact retailer where purchased for return instructions.

Installation Instructions

The Medline raised toilet seat has been designed to accommodate a wide variety of toilet bowl types. However, certain bowl types will require the removal of the existing seat and/or lid to ensure proper fit when installed.

1. Lift the seat and lid of the toilet.
2. Rotate adjustment knob of the raised toilet seat counter clockwise until the paddle is far enough back to clear the inner rim of the bowl.
3. Place the raised toilet seat onto the bowl rim hooking the rear wings under edge of bowl. Check that the unit rests flat on the bowl rim. The knob must be at the front end of the toilet bowl.
4. Center the unit on the bowl rim and push the back as far as possible with your hands.
5. Rotate adjustment knob clockwise to tighten. Turn until resistance is felt, then turn an additional 1/8" until snug.

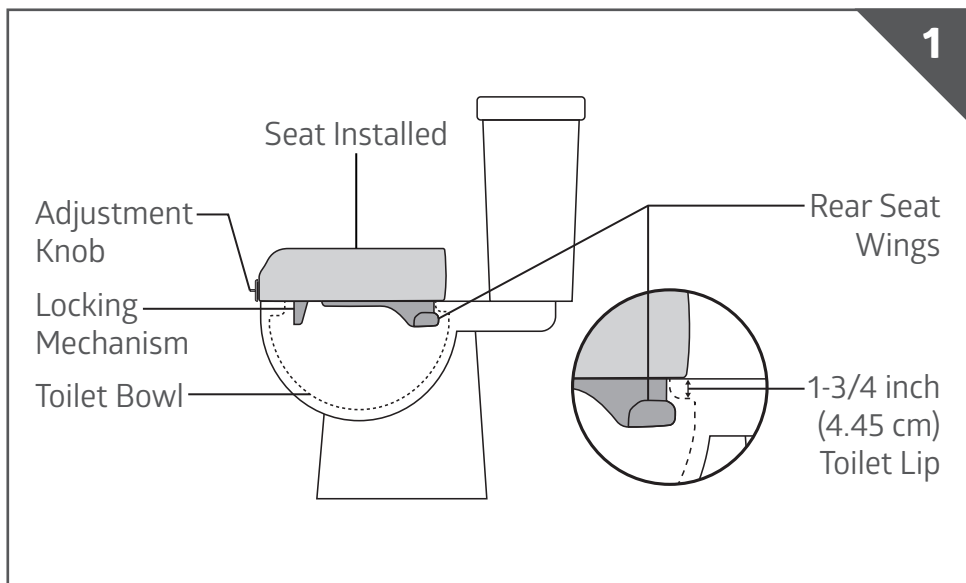

Note: Check all parts for shipping damage. In case of shipping damage, **DO NOT** use. Contact place of purchase for further instruction.

Figure 1

Cautions

- The adjustment bracket **MUST** be inside the toilet bowl and the raised toilet seat **MUST** be level and straight. The rear seat wings **MUST** be positioned under the rear lip of the toilet bowl. (See above figure)
- **DO NOT** use raised toilet seat if the toilet lip measurement exceeds 1-3/4 inches (4.45 cm) (See above figure), as the raised toilet seat will not hold and may cause injury.
- When the raised toilet seat is properly installed, the unit will sit flat on the top of the lip of the bowl and should fit securely against the inner rim of the bowl.

To Use Toilet with this Raised Toilet Seat

1. Carefully back up to the raised toilet seat until you feel the back of your knees touching it.
2. Slowly lower yourself onto the raised toilet seat while bending your elbows and knees.
3. Reverse steps (1) through (2) for getting up. Slowly raise yourself off of the toilet seat. Make sure you have your balance before releasing your grasp from the raised toilet seat.

To Remove the Raised Toilet Seat from the Toilet Bowl

1. Rotate the knob counterclockwise until the seat is loose.
2. Lift up the front of the raised toilet seat until the adjustment bracket clears the lip of the toilet bowl.
3. To completely remove the seat from the toilet bowl, pull the seat towards you at an angle.

To Clean the Raised Toilet Seat

This raised toilet seat can be easily cleaned with regular household cleaning products. **DO NOT** use abrasive powders or scouring pads.

1. Clean the seat at least once a week, using a non-abrasive detergent or non-abrasive cleaner with warm water.
2. Rinse with warm water and wipe with a non-abrasive cloth.

Notice d'utilisation

RÉSUMÉ DES RÈGLES DE SÉCURITÉ : Les recommandations suivantes sont destinées à l'assemblage sécurisé du siège de toilette surélevé.


Avertissements

- **NE PAS** assembler ou utiliser ce produit sans lire et comprendre complètement cette fiche d'instructions. Contactez un professionnel de l'assistance médicale, un revendeur ou le personnel technique avant toute tentative d'installer cet équipement si vous ne pouvez pas lire ou comprendre ces instructions, précautions ou avertissements. De graves blessures ou dommages peuvent se produire, le cas échéant.
- Certains accessoires de toilette empêchent le verrouillage du siège de toilette surélevé, son fonctionnement correct et / ou risquent d'endommager son verrouillage. Le verrouillage du siège de toilette ne devrait pas être utilisé. Si la cuvette de toilette comporte des points rehaussés ou protubérants sur sa partie supérieure ou à l'intérieur de la cuvette.
- Après l'assemblage et **AVANT** l'usage, assurez-vous que **TOUS** les accessoires de fixation sont serrés.
- Vérifiez toujours pour vous assurer que le siège de toilette surélevé est correctement verrouillé de manière sécurisée avant toute utilisation. Assurez-vous que le bouton fixant le siège de toilette surélevé est serré à tout moment.
- Centrez votre poids sur le siège de toilette surélevé. Le siège peut se renverser si vous vous penchez trop en avant ou en arrière.
- Les utilisateurs aux capacités physiques limitées devraient être surveillés ou aidés lors de l'utilisation du siège de toilette surélevé.
- **Ne** dépassez **PAS** la capacité maximale de charge de 400 lb (181 kg).
- Il ne faut tourner le bouton d'ajustement qu'à la main pour empêcher de trop serrer l'assemblage. L'usage d'une clé plate ou tout autre outil cassera l'assemblage de vis. **NE PAS FORCER** sur le bouton car cela peut l'endommager et/ou abimer le siège de toilette surélevé.
- Le siège de toilette surélevé Medline n'est pas conçu pour une installation permanente. L'unité devrait être desserrée et resserrée au moins une fois par semaine pour assurer un ajustement correct.
- Si, pour une raison quelconque, un ajustement approprié de l'installation ne peut pas être obtenu, **NE PAS** utiliser et contacter le revendeur où vous avez acquis l'équipement pour des instructions de renvoi.

Instructions d'installation

Le siège de toilette surélevé Medline a été conçu pour être adapté à une large gamme de cuvettes de toilettes. Certains types de cuvettes nécessitent toutefois le retrait du couvercle du siège actuel et/ou de son couvercle afin d'assurer un ajustement correct lors de son installation.

1. Soulevez le siège et le couvercle de toilette.
2. Tournez le bouton d'ajustement du siège de toilette surélevé dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le levier soit suffisamment éloigné du bord intérieur de la cuvette.
3. Placez le siège de toilette surélevé sur le bord de la cuvette, en accrochant les ailes arrières sous le bord de la cuvette. Vérifiez que l'unité repose à plat sur le bord de la cuvette. Le bouton doit être disposé sur la partie frontale de la cuvette de toilette.
4. Centrez l'unité sur le bord de la cuvette puis poussez le plus loin possible avec vos mains.
5. Tournez le bouton d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer. Tournez jusqu'à ce qu'une résistance soit sentie puis tourner 0.3175 cm de tour supplémentaire jusqu'à ce qu'il soit serré.

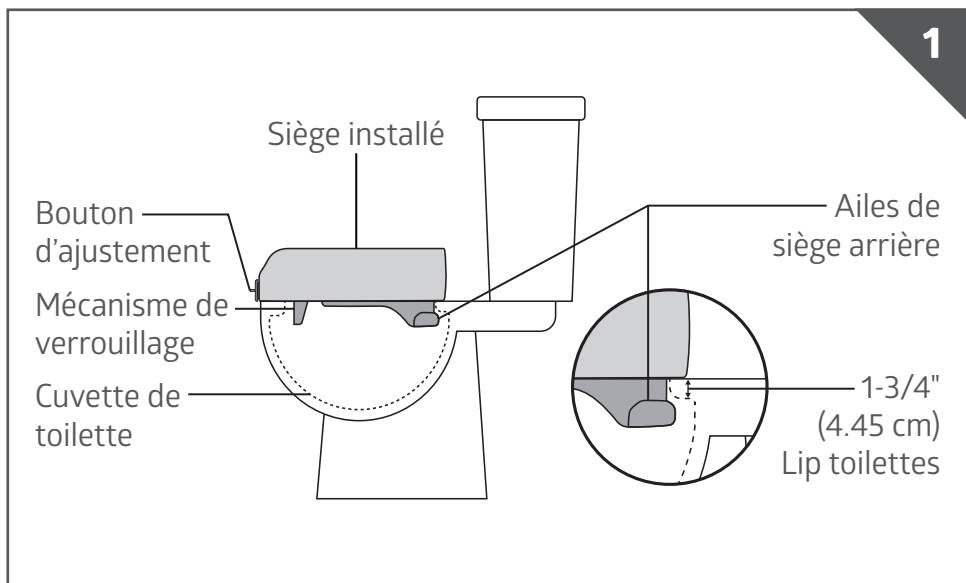

Note: Vérifiez TOUTES les pièces afin de détecter des dommages de livraison dès réception du paquet. **NE PAS** utiliser en cas de dommages d'expédition. Contactez le revendeur pour de plus amples instructions.

Figure 1

Attention

- Le siège de toilette surélevé **DOIT** être à niveau, droit et le collier d'ajustement **DOIT** être dans la cuvette de toilette. Les ailes du dos du siège **DOIVENT** être disposées sous le couvercle arrière de la cuvette de toilette. (Veuillez consulter la figure ci-dessus)
- **N'UTILISEZ PAS** le siège de toilette surélevé si la taille du couvercle de la cuvette de toilette dépasse 1-3/4 pouce (4,45 cm) (Voir la figure ci-dessus), car le siège ne tiendra pas en place et pourrait causer des blessures.
- Une fois le siège de toilette correctement installé, l'unité reposera à plat sur le couvercle de la cuvette et devrait être ajustée de manière sécurisée contre le bord intérieur de la cuvette.

Pour utiliser la cuvette de toilette avec ce siège de toilette surélevé

1. Reculez avec précaution sur le dossier du siège de toilette surélevé jusqu'au contact avec vos genoux.
2. Baissez-vous lentement sur le siège de toilette surélevé en courbant vos coudes et vos genoux.
3. Effectuez les étapes (1) à (2) en sens inverse pour vous lever. Levez-vous lentement du siège de toilette. Assurez votre équilibre avant de relâcher votre prise sur le siège de toilette surélevé.

Pour retirer un siège de toilette surélevé de la cuvette de toilette

1. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le siège soit détaché.
2. Levez la partie frontale du siège de toilette surélevé jusqu'à ce que le collier d'ajustement soit éloigné du couvercle de la cuvette de toilette.
3. Pour retirer complètement le siège de la cuvette de toilette, tirez le siège vers vous sur un de ses angles.

Pour nettoyer le siège de toilette surélevé

Le siège de toilette surélevé peut être nettoyé facilement au moyen d'un produit de nettoyage ménager régulier. **NE PAS** utiliser de poudres abrasives ni de tampons à récurer.

1. Nettoyez le siège au moins une fois par semaine, au moyen d'un détergent non abrasif ou d'un produit de nettoyage non abrasif mélangé à de l'eau chaude.
2. Rincez à l'eau chaude et essuyez avec un tissu non abrasif.

Instrucciones de usuario

Resumen de Seguridad: Las siguientes recomendaciones se hacen para el ensamblado seguro del asiento de inodoro elevado.

ADVERTENCIAS

- **NO** instale o use este producto sin primero leer y entender esta hoja de instrucciones. Si no puede entender las advertencias, precauciones o instrucciones, contacte a un profesional de salud, vendedor, o personal técnico antes de intentar instalar este asiento de inodoro elevado. De otra manera, pueden ocurrir lesiones o daños.
- Ciertos inodoros evitarán que la sujeción de asiento de inodoro elevado funcione apropiadamente y/o dañarán el asiento de inodoro elevado sujeto. Si el inodoro tiene en su anillo superior o interior algún punto o sección elevado o sobresaliente, el asiento de inodoro elevado no debe ser utilizado.
- Después del ensamblado y **ANTES** de usar, asegúrese que **TODO** el hardware acoplado esté firmemente ajustado.
- Siempre verifique para asegurarse de que el asiento de inodoro elevado esté bloqueado en su lugar en forma apropiada y segura antes de usar. Asegúrese de que la perilla que asegura el asiento de inodoro elevado al cómodo esté ajustada en todo momento.
- Centre su peso sobre el asiento de inodoro elevado. El asiento puede volcar si usted se inclina demasiado hacia cualquier lado.
- Usuarios con capacidades físicas limitadas deben de ser supervisados o asistidos cuando utilicen el asiento de inodoro elevado.
- No exceda la capacidad de peso máxima de 400 lb (181 kg).
- Rote la perilla de ajuste a mano únicamente para evitar sobreajustar el conjunto. Usar una llave u otra herramienta romperá el conjunto de tornillo. **NO FUERCE** la perilla pues esto puede dañar la perilla y/o el asiento de inodoro elevado.
- El asiento de inodoro elevado Medline no está diseñado para instalación permanente. La unidad debe ser aflojada y reajustada al menos una vez por semana para asegurar un ajuste apropiado.
- Si, por alguna razón, no puede obtenerse un ajuste apropiado en la instalación, **NO** utilice y contacte al vendedor donde lo compró, para instrucciones de retorno.

Instrucciones de instalación

El asiento de inodoro elevado Medline ha sido diseñado para acomodar una amplia variedad de tipos de inodoro. Sin embargo, ciertos tipos de inodoro requerirán el retiro del asiento y/o taña existente para asegurar un ajuste apropiado al ser instalado.

1. Levante el asiento y tapa del inodoro.
2. Rote la perilla de ajuste del asiento de inodoro elevado en sentido antihorario hasta que la pala esté lo bastante atrás para pasar el anillo interior del inodoro.
3. Coloque el asiento de inodoro elevado sobre el aro del inodoro engancho las aletas traseras bajo el borde del inodoro. Compruebe que la unidad esté plana sobre el anillo del inodoro. La perilla debe estar en el extremo frontal del inodoro.
4. Centre la unidad en el anillo del inodoro y presione hacia atrás con sus manos tanto como sea posible.
5. Rote la perilla de ajuste en sentido horario para ajustar. Gire hasta sentir resistencia, luego gire 0.3175 cm adicional hasta que esté apretado.

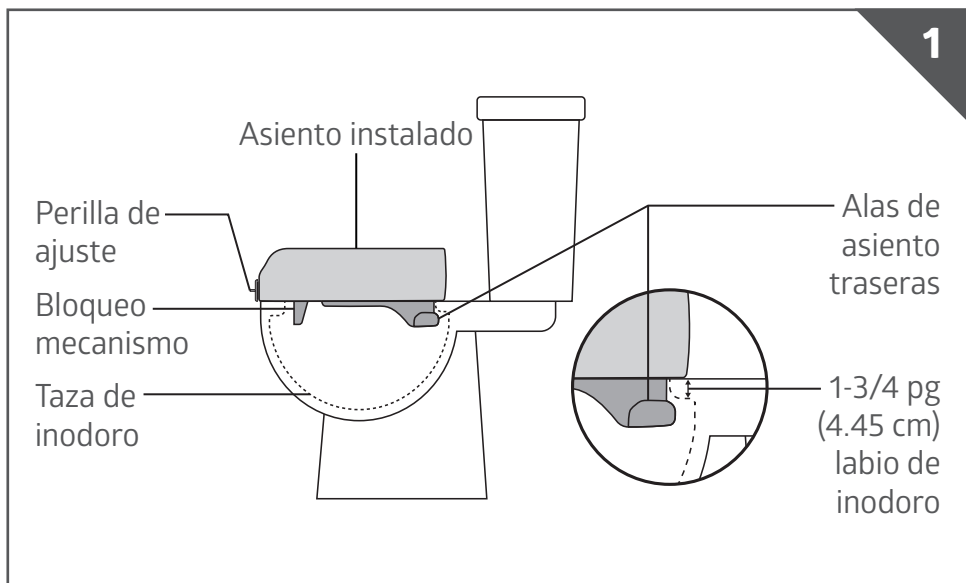


Figura 1

Nota: Examine todas las partes en busca de daños de envío. En caso de daño de envío, no usar. Contacte al sitio de compra para instrucciones adicionales.

Precauciones

- El asiento de inodoro elevado **DEBE** estar nivelado, derecho, y el soporte de ajuste **DEBE** estar dentro del inodoro. Las alas del asiento trasero **DEBEN** estar posicionados bajo el labio posterior del inodoro. (Ver Figura arriba)
- **NO** utilice el asiento de inodoro elevado si la medida del labio del inodoro excede 1-3/4 pulgadas (4.45 cm) (Vea figura arriba), pues el asiento de inodoro elevado no se sostendrá y puede causar lesiones.
- Cuando el asiento de inodoro elevado esté apropiadamente instalado, la unidad se asentará plana sobre el labio del inodoro y debe encajar firmemente contra el anillo exterior del inodoro.

Para usar el inodoro con este asiento de inodoro elevado

1. Retroceda con cuidado al asiento de inodoro elevado hasta que sienta la parte posterior de sus rodillas tocándolo.
2. Bájese lentamente en el asiento de baño elevado doblando los codos y rodillas.
3. Invierta los pasos 1 a 2 para levantarse. Levántese lentamente del asiento de inodoro. Asegúrese de tener equilibrio antes de soltarse del asiento de inodoro elevado.

Para retirar el asiento de inodoro elevado del inodoro

1. Rote la perilla en sentido antihorario hasta que el asiento esté suelto.
2. Levante el frente del asiento de inodoro elevado hasta que el soporte de ajuste salga del labio del inodoro.
3. Par retirar completamente el asiento del inodoro, tire del asiento hacia usted en ángulo.

Para limpiar el asiento de inodoro elevado

Este asiento de inodoro elevado puede ser fácilmente limpiado con productos de limpieza doméstica regulares. **NO** utilice polvos o almohadillas abrasivos.

1. Limpie el asiento al menos una vez por semana, usando un detergente o limpiador no abrasivo con agua tibia.
2. Enjuague con agua tibia y limpie con un paño no abrasivo.

Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect not covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, which are subject to normal wear and replacement.

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti sans défauts en matériel et en main-d'œuvre pour sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant son expédition. Cette garantie limitée est une expression de notre confiance en nos produits en matériel et en main-d'œuvre et assure des années de service pratique et fiable. En cas d'un défaut n'étant pas couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons l'appareil, à notre choix. Cette garantie ne couvre pas un défaut de l'appareil causé par une utilisation incorrecte ou une négligence de son propriétaire ou pour cause d'usure normale. Cette garantie ne s'étend pas aux composants consommables tels que les accessoires en caoutchouc assujettis à l'usure normale et au remplacement.

Garantía limitada

Su producto Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante la duración de su uso por el comprador original. Este dispositivo fue construido con estándares precisos e inspeccionado cuidadosamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de sus productos y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto no cubierto por esta garantía, a nuestra opción repararemos o reemplazaremos el dispositivo. Esta garantía no cubre el fallo del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o desgaste normal. La garantía no se extiende a productos no durables, tales como accesorios de goma, que están sujetos al desgaste y reemplazo normales.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com
Medline Mexico
01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us
Suivez-nous
Síguenos



Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this instruction sheet. /Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez contacter votre représentant de compte pour obtenir des renseignements supplémentaires. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui aurait pu se glisser dans ce feuillet d'instructions. /Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en esta hoja de instrucciones.

©2023 Medline Industries, LP. All rights reserved. Medline is a trademark of Medline Industries, LP. /© Tous droits réservés, Medline Industries, LP, 2023. Medline est une marque de commerce de Medline Industries LP. /©2023 Medline Industries, LP. Todos los derechos reservados. Medline es una marca comercial de Medline Industries LP.