



Rollator, Basic Steel, Microban®
Déambulateur de base en acier, Microban®
Andador básico de acero con Microban®

User Instructions and Warranty

Mode d'emploi et garantie

Instrucciones de uso y garantía



REF MDS868SKNM

REF MDS868SKWM

Not made with natural rubber latex.
Non fait de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

Safety Instructions

To ensure your safety in using the Medline rollator, the following safety information and all instructions must be followed.

GENERAL WARNINGS AND CAUTIONS:

- ⚠ **DO NOT use this product without first reading and understanding the instructions contained in this manual.** If you are unable to understand the warnings, cautions, or instructions, contact a healthcare professional, dealer, or technician before use. Failure to do this may result in bodily injury or damage to the device.
- ⚠ **DO NOT** self-propel the rollator while seated.
- ⚠ Rollators are intended for individual use only and are **NOT TO BE USED AS A WHEELCHAIR**. Serious injury to the user and/or damage to the rollator's frame or wheels may result from improper use.
- ⚠ **DO NOT** use the rollator to walk backwards, down gradients or to climb stairs, curbs, or to go over obstacles. Serious risk of fall or injury may occur.
- ✓ **CAUTION:** The backrest is not intended to support full body weight. Avoid leaning while sitting as this may result in a fall. Use **EXTREME** caution when shifting weight while seated against the backrest. This may cause the rollator to tip.
- ✓ All wheels must be in contact with the floor and/or ground at **ALL TIMES**. This will ensure the rollator is properly balanced.
 - DO NOT** exceed the maximum weight capacity (including bag contents) or serious injury could result: **Maximum weight capacity: 300 lb (136 kg)**
 - Items should be placed completely in the tote bag and should not protrude. Excess weight may cause the rollator to tip, resulting in bodily injury or rollator damage.
 - The tote bag located under the seat has a weight limitation of 5 lb (2.26 kg).
- ✓ Before each use make sure the rollator frame is fully and securely opened.
- ✓ Periodically wipe down the rollator with a soft cloth and non abrasive cleaner.

SEAT WARNINGS:

- ⚠ The brakes **MUST** be in the locked position **BEFORE** sitting on the seat.
- ⚠ **DO NOT** sit on the rollator while it is being loaded into a vehicle or while it is being transported in a vehicle.
- ⚠ **DO NOT** use the seat to transport people or objects.
- ⚠ **DO NOT** sit on the seat when the rollator is on an incline.
- ⚠ The rollator was designed to be used as a walking aid. **DO NOT** use the rollator in a manner that could cause personal injury; such as a scooter, a knee walker, or a jumping/hopping aid.
- ⚠ **DO NOT** stick fingers or hands near the seat slide. Be careful when folding

up and unfolding the rollator. Make sure that clothing and body parts are not pinched between the folding parts of the rollator.

- ✓ Observe the minimum insertion depth of the handholds.
- ✓ Each brake affects only one wheel.
- ✓ Do not use aggressive or caustic detergents to clean the rollator.
- ✓ Check that the rollator is fully intact each time before using it. Check that the brake is working.
- ✓ The surfaces of the rollator can heat up when exposed to direct sunlight. There is a risk of injury.

BRAKE WARNINGS:

- ⚠ Check the brakes for proper operation. Make sure that all parts are secure and that the moving parts are in good working order.
- ⚠ Wheels should roll easily and not wobble.
- ⚠ When rising from a lower position, **DO NOT** use the rollator to provide assistance to the user. If the rollator is used to pull the user up to a standing position, the rollator may move even if the brakes are in the locked position and this could result in a fall.
- ⚠ **DO NOT** push the rollator while brakes are enabled. Brakes are to be used to keep the wheels from rolling. However, it may not prevent the rollator from moving if it is pushed.

What's Included:



- A** 2 Five Point Knobs
- B** 4 Five Point Knob with Screw
- C** 2 Screws & Curved Washers

- D** 4 C clips
- E** Bag
- F** Rollator Frame
- G** 2 Handle Bars with Brake Assembly

- H** Backrest
- I** 2 Front Wheels
- J** User Instructions and Warranty Guide

This guide applies to the following rollator:

Item Number	Description	Frame Color	Weight Capacity
MDS868SKNM	Rollator, Basic Steel, Microban®	Navy	300 lb (136 kg)
MDS868SKWM	Rollator, Basic Steel, Microban®	White	300 lb (136 kg)

First: Open the Rollator



1

Remove the rollator components from shipping carton. Then, in an upright position, unfold the rollator by pushing down on the folding bracket until the frame is in full extension.



2

Place the rollator on its side.

IMPORTANT NOTE:


Proceed with caution when opening the rollator as there are areas around the moving parts that could potentially pinch fingers.

Now: Install the Wheels

Front Wheels



Remove the four black plastic plugs from the outer tubes and discard.

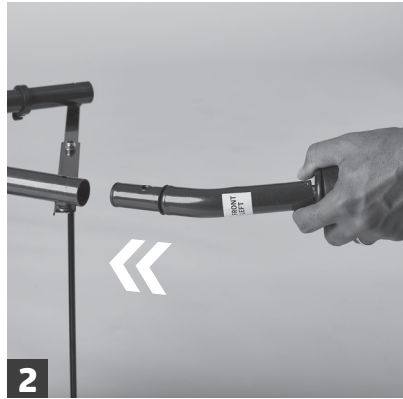

Attach front legs without brakes to the front of the rollator. The legs are left and right specific, make sure the threaded insert is facing outwards.



Insert the 5 point knob with screw and tighten. (Hand Tighten only.) Insert the C-clip just above the 5 point knob. Repeat steps 1-3 for the other front leg extension without brakes.

Rear Wheels & Brakes



With the rollator still on its side, attach rear wheels with brakes. Make sure that the rear wheels and brake shoe are on the outside of the rollator and brake handle (See above). Use the 5 point screw to thread the rear legs in place.



Insert the C-Clip just above the 5 point knob. Repeat steps for other rear leg. Ensure all C-clips are secure and 5 Point knobs are fully tighten prior to each use.




4

Stand the rollator upright and insert the brake handle assembly. Brake cables must be on the outside of the handle bars and frame.



5

Insert the screw into the 6 sided hole in the frame. Make sure the screw head recesses into the frame.

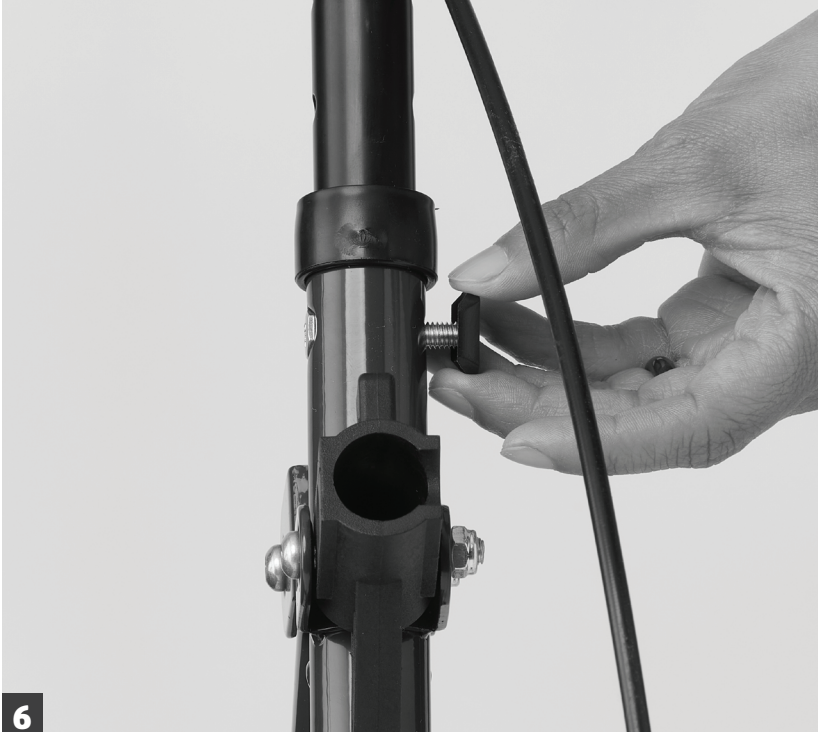

6

Slide the curved washer onto the other end of the screw with the curved side facing the frame.



7

Screw on the 5 point knob.

8

Repeat steps 4–7 on the other side. Make sure the push handles are set at the same height and are fully tightened before use. (Hand tighten only)

Finally Install Backrest



Insert the backrest so that the curved portion faces the front of the unit. Make sure that the button snaps firmly into the hole so the back is secure.



Press excess brake cable into the cable clips. Attach the bag by looping the hook and loop straps around the frame and pressing firmly on the bag.



Consignes de sécurité

Afin d'utiliser le déambulateur Medline en toute sécurité, il est impératif de respecter les consignes de sécurité et l'ensemble des instructions qui suivent.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX :

- ⚠ **N'utilisez PAS ce produit sans avoir d'abord lu et compris les instructions du présent manuel.** Si vous ne comprenez pas les mises en garde, les précautions ou les instructions, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou un technicien avant d'utiliser le déambulateur. Vous risquez sinon de vous blesser ou d'endommager l'équipement.
- ⚠ **NE** vous déplacez **PAS** lorsque vous êtes assis sur le siège.
- ⚠ Le déambulateur est réservé à un usage individuel et **NE DOIT PAS SERVIR DE FAUTEUIL ROULANT**. Une mauvaise utilisation peut causer de graves blessures à l'utilisateur et/ou des dommages au cadre ou aux roulettes du déambulateur.
- ⚠ **N'utilisez PAS** le déambulateur pour reculer, descendre une pente ou monter des marches, ni franchir des trottoirs ou des obstacles. De graves chutes ou blessures pourraient se produire.
- ✓ **ATTENTION :** Le dossier n'est pas conçu pour supporter tout le poids du corps. Évitez de vous incliner vers le dossier lorsque vous êtes assis, car cela pourrait causer une chute. Déplacez votre poids avec **EXTRÊME** prudence lorsque vous êtes assis, le dos appuyé au dossier. Le déambulateur risquerait de basculer.
- ✓ Toutes les roulettes doivent toucher le plancher et/ou le sol en **TOUT TEMPS**. Le déambulateur sera ainsi correctement équilibré.
Ne dépassez PAS la capacité maximale de charge (en tenant compte du contenu du sac), car de sérieuses blessures pourraient se produire :
Capacité maximale de charge : 136 kg (300 lb)
 - Les articles doivent pouvoir entrer complètement dans le sac fourre-tout, sans dépasser. Un excédent de poids peut faire basculer le déambulateur et causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
 - Le poids du sac sous le siège ne doit pas dépasser 2,26 kg (5 lb).
- ✓ Avant chaque utilisation, assurez-vous que le cadre du déambulateur est verrouillé en position ouverte.
- ✓ Nettoyez régulièrement le déambulateur avec un chiffon doux et un nettoyeur non abrasif.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE SIÈGE :

- ⚠ L'utilisateur **DOIT** serrer les freins **AVANT** de s'asseoir sur le siège.
- ⚠ **NE** vous asseyez **PAS** sur le siège du déambulateur pendant qu'on le charge ou le transporte dans un véhicule.
- ⚠ **N'utilisez PAS** le siège pour transporter des personnes ou objets.
- ⚠ **NE** vous asseyez **PAS** sur le siège lorsque le déambulateur se trouve sur un sol en pente.
- ⚠ Le déambulateur est un dispositif d'aide à la marche. **N'utilisez PAS** le déambulateur d'une manière qui pourrait entraîner des blessures

corporelles, par exemple comme une trottinette, un déambulateur à repose-genou ou un appareil permettant de sauter ou d'enjamber.

- ⚠ **NE** placez **PAS** les doigts ou les mains près de la glissière du siège. Faites attention lorsque vous repliez et dépliez le déambulateur. Assurez-vous que rien (vêtement ou partie du corps) ne reste coincé entre les parties pliantes du déambulateur.
- ✓ Respectez la profondeur d'insertion minimale des poignées.
- ✓ Chaque frein n'agit que sur une seule roulette.
- ✓ N'utilisez pas de détergents puissants ou caustiques pour nettoyer le déambulateur.
- ✓ Vérifiez le bon état du déambulateur avant chaque utilisation. Vérifiez que le frein fonctionne.
- ✓ Les surfaces du déambulateur peuvent s'échauffer lorsqu'elles sont exposées à la lumière directe du soleil. Cela présente un risque de blessure.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES FREINS :

- ⚠ Vérifiez le bon fonctionnement des freins. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que les parties mobiles fonctionnent correctement.
- ⚠ Les roulettes doivent tourner aisément sans être branlantes.
- ⚠ Pour passer de la position assise à la position debout, **NE** vous servez **PAS** du déambulateur. Si l'utilisateur se sert du déambulateur pour se lever, ce dernier risque de se déplacer, même si les freins sont verrouillés, ce qui risquerait de provoquer une chute.
- ⚠ **NE** poussez **PAS** le déambulateur lorsque les freins sont actionnés. Les freins servent à empêcher les roulettes de rouler. Ils risquent cependant de ne pas empêcher le déplacement du déambulateur si on le pousse.

Contenu :



- A** 2 molettes de serrage étoilées
- B** 4 molettes de serrage étoilées avec vis
- C** 2 vis et rondelles courbées

- D** 4 circlips
- E** Sac
- F** Cadre de déambulateur
- G** 2 poignées avec freins

- H** Dossier
- I** 2 roulettes avant
- J** Mode d'emploi et garantie

Ce guide concerne le modèle de déambulateur suivant :

Numéro d'article	Description	Couleur du cadre	Capacité de charge
MDS868SKNM	Déambulateur de base en acier, Microban®	Marine	136 kg (300 lb)
MDS868SKWM	Déambulateur de base en acier, Microban®	Blanc	136 kg (300 lb)

En premier : ouvrir le déambulateur



Retirez les composants du déambulateur du carton d'expédition. Placez le déambulateur à la verticale, puis déployez-le en poussant sur le mécanisme de pliage jusqu'à ce que le cadre soit complètement déployé.




Placez le déambulateur sur le côté.

REMARQUE IMPORTANTE :

Ouvrez le déambulateur avec précaution pour éviter de vous pincer les doigts près des pièces mobiles.

Ensuite : installer les roulettes


Roulettes avant

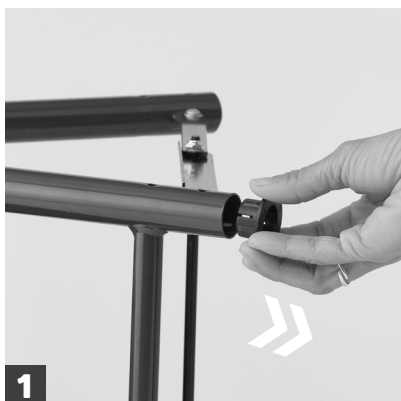

Retirez les quatre embouts noirs en plastique des tubes extérieurs et jetez-les.



Fixez les pattes avant sans freins à l'avant du déambulateur. L'orientation gauche et droite des pattes est spécifique; assurez-vous donc que la partie filetée à insérer est orientée vers l'extérieur.

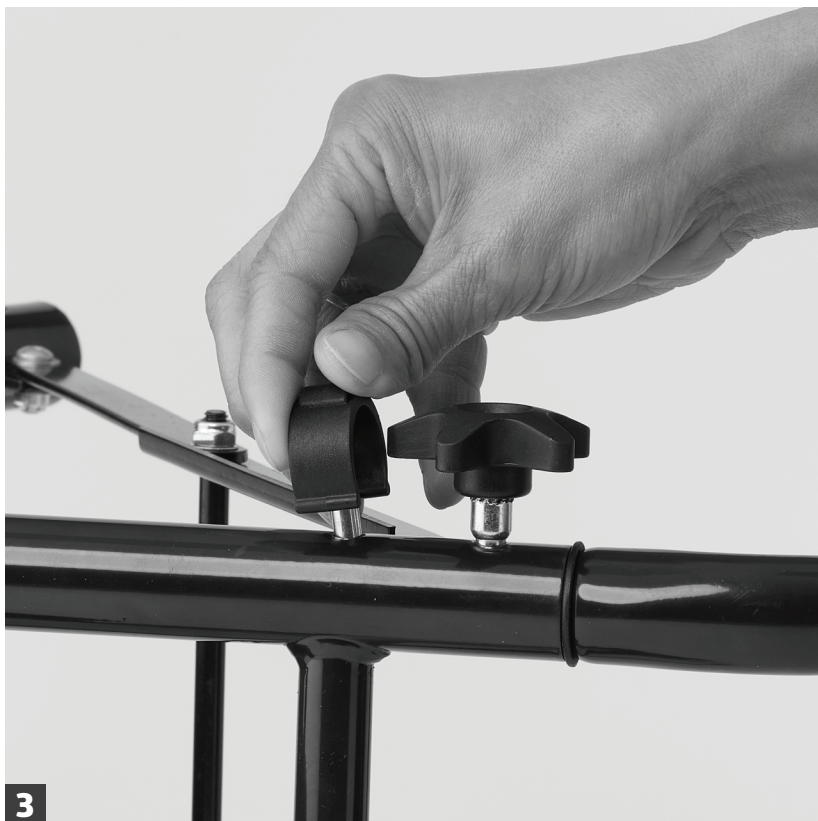

Insérez la molette de serrage étoilée avec vis et serrez. (Serrez à la main uniquement.) Insérez le circlip juste au-dessus de la molette de serrage étoilée. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre patte avant sans freins.

Roulettes arrière et freins



Le déambulateur étant toujours sur le côté, fixez les roulettes arrière munies de freins. Assurez-vous que les roulettes arrière et les sabots de freins sont à l'extérieur du déambulateur et du levier de frein (voir ci-dessus). Servez-vous de la molette de serrage étoilée pour fileter les pattes arrière en place.




Insérez le circlip juste au-dessus de la molette de serrage étoilée. Répétez les étapes pour l'autre patte arrière. Assurez-vous que tous les circlips sont bien fixés et que les molettes de serrage étoilées sont fermement serrées avant chaque utilisation.



Redressez le déambulateur et insérez la poignée de frein. Les câbles de frein doivent être à l'extérieur des poignées et du cadre.



Insérez la vis dans le trou hexagonal sur le cadre. Assurez-vous que la tête de vis rentre dans le cadre.

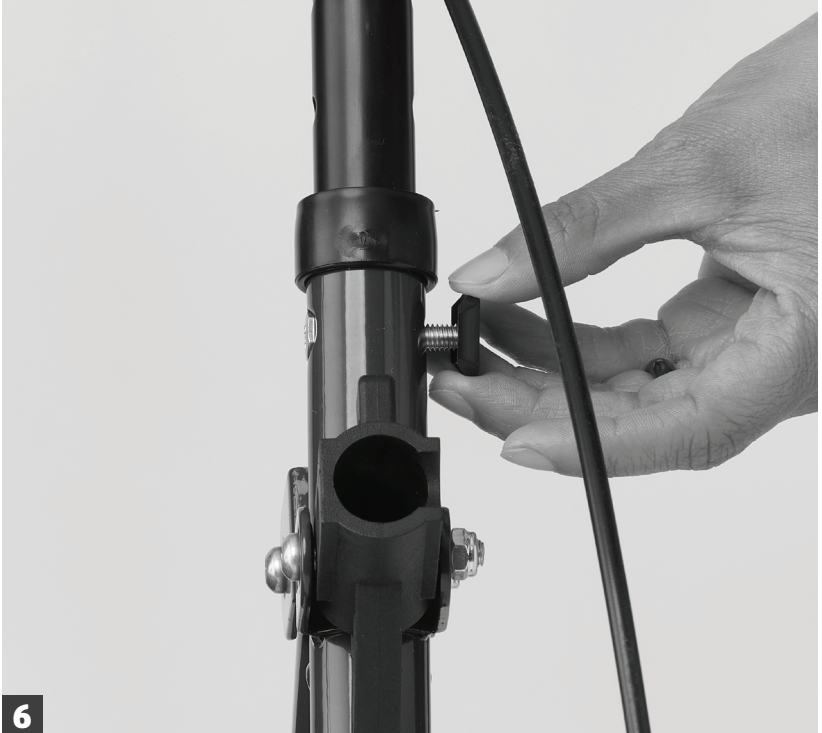

6

Glissez la rondelle courbée à l'autre extrémité de la vis de façon à ce que le côté incurvé soit orienté vers le cadre.



7

Vissez la molette de serrage étoilée.

8

Répétez ensuite les étapes 4 à 7 de l'autre côté. Assurez-vous que les poignées de poussée sont réglées à la même hauteur et sont bien serrées avant d'utiliser le déambulateur. (Serrez uniquement à la main)

Enfin : installer le dossier



Insérez le dossier de façon à ce que la partie incurvée soit orientée vers le devant du déambulateur. Vérifiez que le bouton s'enclenche bien dans le trou de façon à immobiliser le dossier.



Enfoncez l'excès de câble de frein dans les agrafes de câble. Attachez le sac en enroulant les attaches Velcro autour du cadre en pressant fermement sur le sac.



Instrucciones de seguridad

Para garantizar su seguridad al usar el andador Medline, se debe observar la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES:

- ⚠ **NO utilice este producto sin antes leer y comprender las instrucciones contenidas en este manual.** Si no entiende las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de la salud, un distribuidor o un técnico antes de usarlo, de lo contrario, podrían producirse lesiones corporales o daños al dispositivo.
- ⚠ **NO** impulse el andador por sí mismo cuando esté sentado.
- ⚠ Los andadores están previstos exclusivamente para uso individual y **NO SE DEBEN USAR COMO SILLA DE RUEDAS**. El uso inadecuado podría causar lesiones graves al usuario y/o daños al armazón o a las ruedas del andador.
- ⚠ **NO** use el andador para caminar hacia atrás, bajar pendientes ni subir escaleras o bordes ni para pasar por encima de obstáculos. Existe un riesgo importante de caída o lesión.
- ✓ **PRECAUCIÓN:** El respaldo no está diseñado para soportar el peso de todo el cuerpo. Evite inclinarse mientras esté sentado, ya que esto podría provocar una caída. Tenga **EXTREMA** precaución al desplazar el peso mientras esté sentado contra el respaldo, ya que el andador podría volcarse.
- ✓ Todas las ruedas deben estar en contacto con el piso **EN TODO MOMENTO**. Esto garantizará que el andador esté equilibrado correctamente.
NO exceda la capacidad de peso máxima (incluido el contenido de la bolsa) o podrían producirse lesiones graves: **Capacidad de peso máxima: 300 lb (136 kg)**
 - Los artículos deben colocarse completamente dentro de la bolsa y no deben sobresalir. El exceso de peso puede hacer que el andador se vuelque, lo que provocaría lesiones corporales o daños al andador.
 - El límite de peso de la bolsa que se encuentra debajo del asiento es de 5 lb (2.26 kg).
- ✓ Antes de cada uso, cerciórese de que el armazón del andador esté completa y firmemente abierto.
- ✓ Limpie el andador periódicamente con un paño suave y un limpiador no abrasivo.

ADVERTENCIAS SOBRE EL ASIENTO:

- ⚠ Los frenos **DEBEN** estar en la posición de bloqueo **ANTES** de sentarse en el asiento.
- ⚠ **NO** se sienta en el andador durante la carga o el transporte de este en un vehículo.
- ⚠ **NO** use el asiento para transportar personas ni objetos.
- ⚠ **NO** se sienta en el asiento cuando el andador se encuentre sobre una pendiente.

- ⚠ El andador fue diseñado para ser usado como una ayuda para caminar. **NO** use el andador de manera que pueda causar lesiones personales, por ejemplo, a modo de motoneta, andador de rodilla o una ayuda para saltar/brincar.
- ⚠ **NO** meta los dedos ni las manos cerca del deslizador del asiento. Tenga cuidado al plegar y desplegar el andador. Cerciórese de que no queden atrapadas prendas ni partes del cuerpo entre las partes plegables del andador.
- ✓ Respete la profundidad de inserción mínima de las empuñaduras.
- ✓ Cada freno rige solo una rueda.
- ✓ No use detergentes agresivos o cáusticos para limpiar el andador.
- ✓ Compruebe siempre que el andador se encuentre en perfecto estado antes de usarlo. Verifique que los frenos funcionen.
- ✓ Las superficies del andador pueden calentarse si se exponen a la luz solar directa. Existe un riesgo de lesiones.

ADVERTENCIAS SOBRE LOS FRENOS:

- ⚠ Compruebe el funcionamiento correcto de los frenos. Cerciórese de que todas las piezas estén afianzadas y que las piezas móviles estén en buen estado de funcionamiento.
- ⚠ Las ruedas deben rodar fácilmente y no tambalearse.
- ⚠ Cuando el usuario se levante de una posición más baja, **NO** use el andador para brindarle asistencia. Si el andador se utiliza para ayudar al usuario a ponerse de pie, podría moverse, incluso si los frenos están en la posición de bloqueo, y provocar una caída.
- ⚠ **NO** empuje el andador mientras los frenos estén accionados. Los frenos se deben usar para evitar que las ruedas giren. Sin embargo, podrían no impedir que el andador se mueva si se lo empuja.

Lo que se incluye:



- A** 2 perillas de cinco puntas
- B** 4 perillas de cinco puntas con tornillo
- C** 2 tornillos y arandelas curvas

- D** 4 presillas en C
- E** Bolsa
- F** Armazón del andador
- G** Conjunto de 2 manillares con freno

- H** Respaldo
- I** 2 ruedas delanteras
- J** Guía de instrucciones de uso y garantía

Esta guía rige para el siguiente andador:

Número de artículo	Descripción	Color del armazón	Capacidad de peso
MDS868SKNM	Andador básico de acero con Microban®	Azul marino	300 lb (136 kg)
MDS868SKWM	Andador básico de acero con Microban®	Blanco	300 lb (136 kg)

Primero: Abra el andador



Retire los componentes del andador de la caja de envío. Luego, en posición vertical, despliegue el andador empujando hacia abajo sobre el soporte plegable hasta que el armazón esté totalmente extendido.



Coloque el andador de costado.

NOTA IMPORTANTE:


proceda con precaución cuando abra el andador, ya que hay áreas alrededor de las piezas móviles con las que potencialmente se podría apretar los dedos.

Ahora: Instale las ruedas


Ruedas delanteras



Retire los cuatro tapones plásticos negros de los tubos exteriores y deséchelos.

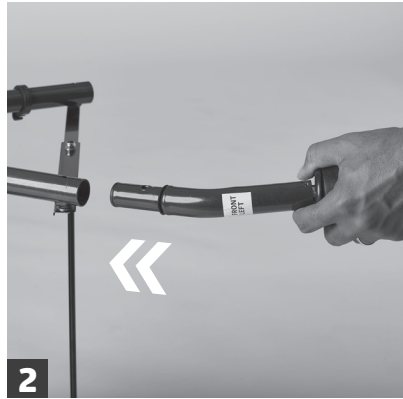

Fije las patas delanteras sin frenos a la parte delantera del andador. Las patas son específicas para la izquierda y derecha, cerciórese de que el inserto roscado mire hacia afuera.

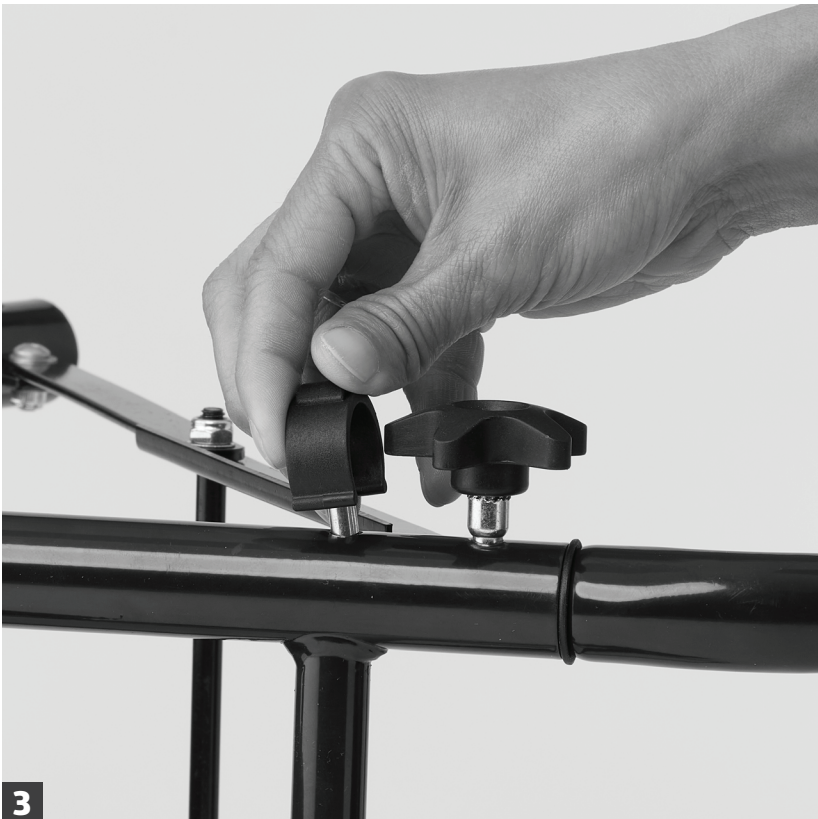

Inserte la perilla de 5 puntas con tornillo y apriete (apriete a mano solamente). Inserte la presilla en C justo arriba de la perilla de 5 puntas. Repita los pasos 1 a 3 para la otra extensión de la pata delantera sin frenos.

Ruedas traseras y frenos



Con el andador todavía de lado, coloque las ruedas traseras con frenos. Cerciérese de que las ruedas traseras y la zapata de freno queden en la parte exterior del andador y del mango del freno (vea arriba). Use la perilla de 5 puntas para fijar las patas traseras en su lugar.



Inserte la presilla en C justo arriba de la perilla de 5 puntas. Repita los pasos para la otra pata trasera. Antes de cada uso, cerciérese de que todas las presillas en C estén fijas y que las perillas de 5 puntas estén completamente ajustadas.




4

Coloque el andador en posición vertical e inserte el conjunto del mango de freno. Los cables de freno deben estar en la parte exterior de los manillares y el armazón.



5

Inserte el tornillo en uno de los 6 orificios laterales ubicados en el armazón. Cerciérese de que la cabeza del tornillo quede dentro del armazón.

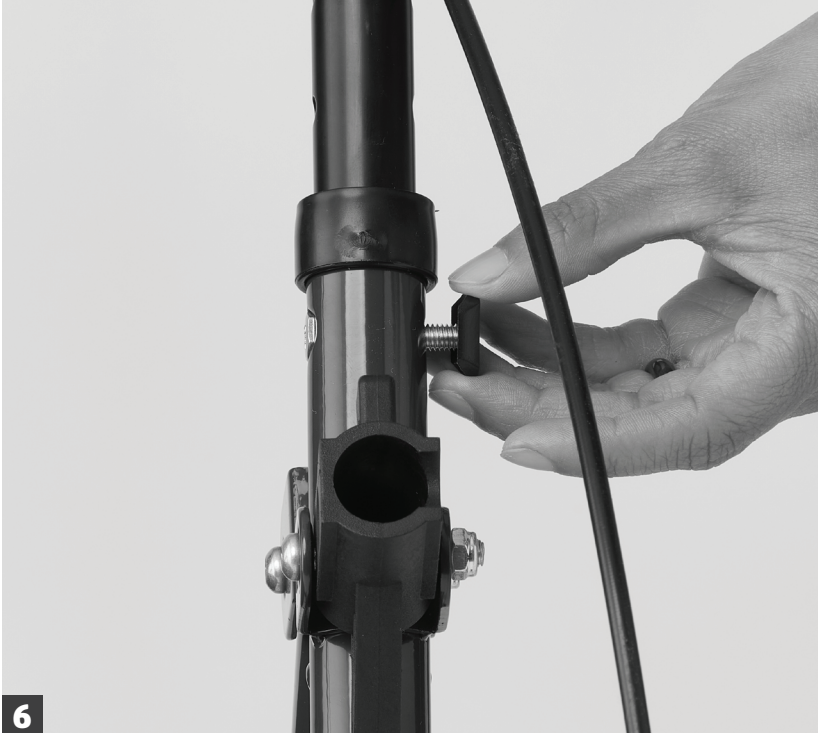

6

Deslice la arandela curva en el otro extremo del tornillo, con el lado curvo mirando hacia el armazón.



7

Enrosque la perilla de 5 puntas.

8

Luego repita los pasos 4 al 7 en el otro lado. Antes del uso, cerciórese de que los manillares estén fijos a la misma altura y completamente ajustados (apriete a mano solamente).

Finalmente instale el respaldo



Inserte el respaldo de modo que la parte curva mire hacia el frente de la unidad. Asegúrese de que el botón encaje firmemente en el orificio para que el respaldo esté fijo.



Presione el exceso de cable de freno para introducirlo en las presillas del cable. Fije la bolsa enrollando las correas de velcro alrededor del armazón y presionándolas firmemente sobre la bolsa.



Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

Limited lifetime warranty on frame; 6 months on parts:

- Hand brakes
- Brake cables
- Push-buttons
- Backrest
- Brakes
- Seat
- Wheels (front and rear)
- Bag

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant la durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et commode. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

Garantie à vie limitée sur le cadre; garantie de six mois sur les pièces :

- Freins à main
- Câbles de frein
- Boutons-poussoirs
- Dossier
- Freins
- Siège
- Roulettes (avant et arrière)
- Sac

Garantía Limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Garantía limitada de por vida para el armazón; 6 meses para las piezas:

- Frenos de mano
- Cables de freno
- Pulsadores
- Respaldo
- Frenos
- Asiento
- Ruedas (delanteras y traseras)
- Bolsa



Microban® antimicrobial product protection is limited to the product itself and is not designed to protect users from disease causing microorganisms or as a substitute for normal cleaning and hygiene practices.

La protection antimicrobienne Microban® se limite au produit lui-même et n'est pas conçue pour protéger les utilisateurs contre les micro-organismes pathogènes ou en remplacement des pratiques de nettoyage et d'hygiène normales.

La protección antimicrobiana del producto Microban® se limita al producto propiamente tal y no está diseñada para proteger a los usuarios contra los microorganismos causantes de enfermedades ni para sustituir las prácticas normales de limpieza e higiene.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México
01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us
Suivez-nous
Síguenos



Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2022 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP. Microban® is a registered trademark of Microban Products Company.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. ©2022 Medline Industries, LP. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP. Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2022 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP. Microban® es una marca comercial registrada de Microban Products Company.