



GUARDIAN[®]

User's Guide

Manuel de l'utilisateur | Guía del usuario

Premium

Shower Chair

Chaise de douche

de qualité supérieure

Silla de ducha

de calidad superior



REF G2-105RX1

General Warnings

To ensure the safe assembly and operation of the product, these instructions must be followed. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT. If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.

- DO NOT assemble and use this product without first reading and understanding this user guide, otherwise injury or damage may occur.
- DO NOT use if components are missing or are damaged, contact Medline at 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.
- DO NOT exceed weight capacity of 350 lbs (158 kg).
- DO NOT make any adjustments while using the product.
- DO NOT attempt to use the arms to support full body weight.
- DO NOT stand on the chair.



Fully Assembled Shower Chair

Cautions

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the product. Prior to use, ensure the following;

1. There are no loose, broken or missing components and ensure all parts are secure.
2. When using the backrest, ensure the shower chair remains balanced. Excessive twisting or turning while seated may cause a loss of balance and/or damage to the product.
3. All legs are adjusted to the same preferred height and are touching the floor simultaneously at all times.
4. User evenly distributes weight between the arm supports when transferring in and out of the product.
5. The tips on the legs are not missing or contain any rips or cracks. Immediately replace missing or damaged tips.

Assembly and use

If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly. Remove contents from box, making sure you have all parts shown in (Figure 1):

- Seat (1)
- Armrest (2)

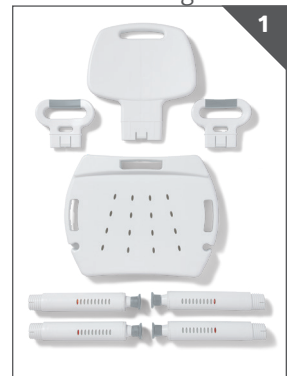


Figure 1

■ Height-adjustable Legs (4) ■ Backrest (1)

1. Place seat upside down and insert a leg assembly into any hole found at each corner. Turn counter-clockwise until leg is fully tightened. Repeat until all four legs have been secured to seat. Note: Legs will be flush with seat when fully-tightened. **(Figure 2)**
2. Insert bottom of each armrest into slots located on the short edges of the seat. **(Figure 3)**
3. Insert the bottom of the backrest into slot located at the rear of the seat. **(Figure 4)**
4. Adjust leg height to be the same on each of the four legs. Use the visible height indicator making sure it shows through the same window on each leg. Press down fully on center of seat to test stability before use.



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Adjusting leg height

1. To decrease height, turn the foot piece on the leg, counter-clockwise. Repeat with all until they are the same preferred height.
2. To increase height, turn the foot piece on the leg clockwise. Repeat with all until they are the same preferred height.
3. Press down firmly on the center of the seat to test stability. Make any necessary adjustments to ensure the shower chair is leveled. **(Figure 5)**



Figure 5

Maintenance

Periodic visual inspection of this shower chair is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

Cleaning

1. Clean with regular household cleaning products. Use a non-abrasive cleaner with warm water. Wipe dry after cleaning.
2. DO NOT use abrasive powders, cleaners or scouring pads.

Mises en garde générales

Pour garantir une installation et un emploi en toute sécurité du produit, il faut suivre les instructions. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT. Si les mises en garde, les avertissements ou les instructions sont difficiles à comprendre, il faut communiquer avec un professionnel de la santé, un détaillant ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.

- NE PAS installer ou utiliser ce produit sans avoir d'abord lu et compris le présent manuel de l'utilisateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- NE PAS utiliser si des composants sont endommagés ou manquants. Le cas échéant, contacter Medline au 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.
- NE PAS excéder la capacité de poids de 158 kg (350 lb).
- NE PAS ajuster le produit pendant son utilisation.
- NE PAS tenter d'utiliser les accoudoirs pour soutenir le poids entier du corps.
- NE PAS se tenir debout sur la chaise.

Avertissements

Les usagers dont les capacités physiques ou la mobilité sont limitées ne devraient utiliser ce produit que sous la supervision ou avec l'aide d'un aidant. Avant d'utiliser le produit, procéder aux vérifications suivantes :

1. Vérifier qu'aucun composant n'est lâche, brisé ou manquant, et que toutes les pièces sont bien fixées.
2. Lorsque le dossier est utilisé, s'assurer que la chaise de douche demeure en équilibre. Des mouvements de torsion excessifs lorsqu'assis sur la chaise de douche pourrait occasionner une perte d'équilibre ou endommager le produit.
3. S'assurer que les pattes sont toutes réglées à la même hauteur et que chacune touche le sol simultanément en tout temps.
4. S'assurer que l'utilisateur répartit uniformément son poids entre les accoudoirs lors du transfert vers ou à partir de la chaise.
5. Vérifier que les embouts des pattes ne sont pas manquants, ni déchirés, ni fissurés. Remplacer immédiatement tout embout manquant ou endommagé.

Assemblage et utilisation

En cas d'exposition à des températures froides, laisser le contenu atteindre la température ambiante avant de procéder à l'assemblage. Retirer le contenu de la boîte, en s'assurant que toutes les pièces décrites ci-dessous sont présentes tel qu'illustré à la Figure 1 :

- Siège (1)
- Accoudoirs (2)
- Pattes à hauteur réglable (4)
- Dossier (1)

1. Placer le siège à l'envers et insérer une patte dans
- 4 G2-105RX1 (PIC-00303) (V1 12-29-22)



Chaise de douche entièrement assemblée

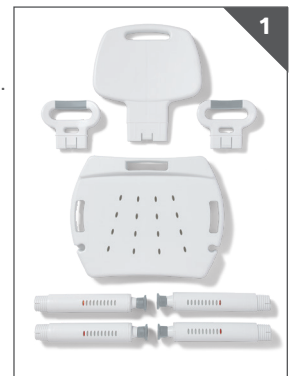


Figure 1

l'un des quatre trous situés dans les coins. Tourner la patte dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. Répéter jusqu'à ce que les quatre pattes soient bien fixées au siège. Remarque : Les pattes sont de niveau avec le siège une fois qu'elles sont bien serrées. **(Figure 2)**



Figure 2

2. Insérer la partie inférieure de chaque accoudoir dans les fentes situées dans les plus courts côtés du siège. **(Figure 3)**



Figure 3

3. Insérer la partie inférieure du dossier dans la fente située à l'arrière du siège. **(Figure 4)**



Figure 4

4. Régler chacune des quatre pattes à la même hauteur. Utiliser l'indicateur visuel de la hauteur en s'assurant que chacun se trouve dans la même fenêtre pour chaque patte. Appuyer à fond sur le centre du siège pour tester la stabilité avant l'utilisation.

Réglage de la hauteur des pattes

1. Pour réduire la hauteur, tourner le pied d'une des pattes dans le sens antihoraire. Répéter avec les autres pattes jusqu'à ce qu'elles soient toutes à la même hauteur.
2. Pour augmenter la hauteur, tourner le pied d'une des pattes dans le sens horaire. Répéter avec les autres pattes jusqu'à ce qu'elles soient toutes à la même hauteur.
3. Appuyez fermement sur le centre du siège pour tester la stabilité. Effectuer tous les réglages nécessaires pour faire en sorte que la chaise de douche soit horizontale. **(Figure 5)**



Figure 5

Entretien

Il est recommandé d'effectuer régulièrement une inspection visuelle de la chaise de douche pour s'assurer que toutes les pièces et la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état de marche et ne sont ni fissurés ni brisés, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, ne pas utiliser le produit. En cas de problème, communiquer avec Medline en appelant le 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

Nettoyage

1. Nettoyer au moyen de produits de nettoyage ménager réguliers. Utiliser un nettoyant non abrasif et de l'eau chaude. Essuyer après le nettoyage.
2. NE PAS utiliser de poudres ou de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.

Advertencias generales

Para garantizar el montaje y funcionamiento seguros del producto, deben seguirse estas instrucciones. **NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no entiende estas advertencias, precauciones y/o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, un distribuidor o con Medline antes de intentar usar este producto.

- NO monte ni use este producto sin antes haber leído y comprendido esta guía del usuario, de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- NO lo use si hay componentes que faltan o están dañados, póngase en contacto con Medline llamando al 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.
- NO exceda la capacidad de carga de 350 lb (158 kg).
- NO realice ningún ajuste mientras usa el producto.
- NO use los brazos para soportar el peso de todo el cuerpo.
- NO se pare en la silla.

Precauciones

Los usuarios con fuerza física y/o movilidad limitada deben ser supervisados y/o asistidos cuando usen el producto. Antes de usarlo, cerciórese de lo siguiente:

3. Que no haya componentes sueltos, rotos o faltantes y que todas las piezas estén fijadas.
4. Al utilizar el respaldo, cerciórese de que la silla de ducha permanezca equilibrada. Darse vuelta o girar excesivamente el cuerpo mientras se está sentado puede causar la pérdida de equilibrio y/o dañar el producto.
5. Que todas las patas estén ajustadas a la misma altura deseada y toquen el piso simultáneamente en todo momento.
6. Que el usuario distribuya uniformemente el peso entre los soportes de los brazos al transferirse al producto o fuera de él.
7. Que las conteras de las patas no falten ni estén rasgadas o agrietadas. Reemplace inmediatamente las conteras faltantes o dañadas.

Montaje y uso

Si el contenido se expone a temperaturas frías, deje que alcance la temperatura ambiente antes de completar el montaje. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas que se muestran en (Figura 1):

- Asiento (1)
- Reposabrazos (2)



Silla de ducha completamente montada

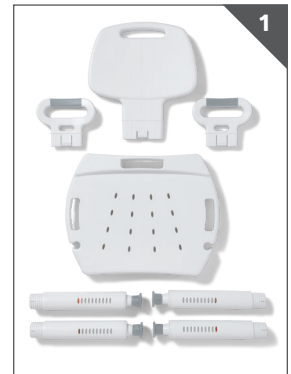


Figura 1

■ Patas de altura ajustable (4) ■ Respaldo (1)

1. Coloque el asiento boca abajo e inserte un conjunto de pata en cualquiera de los orificios que se encuentran en cada esquina. Gire en sentido antihorario hasta que la pata quede completamente ajustada. Repita el procedimiento hasta que las cuatro patas se hayan fijado al asiento. Nota: Las patas quedarán a ras del asiento cuando estén completamente ajustadas. (Figura 2)



Figura 2

2. Introduzca la parte inferior de cada reposabrazos en las ranuras situadas en los bordes cortos del asiento. (Figura 3)



Figura 3

3. Introduzca la parte inferior del respaldo en la ranura situada en la parte posterior del asiento. (Figura 4)
4. Ajuste la altura de las patas para que sea la misma en las cuatro patas. Use el indicador de altura visible cerciorándose de que se vea a través de la misma mirilla en cada pata. Presione completamente el centro del asiento para probar la estabilidad antes de usarlo.



Figura 4

Ajuste de la altura de las patas

1. Para disminuir la altura, gire la pieza de la pata en sentido antihorario. Repita el procedimiento con todas las patas hasta que tengan la misma altura preferida.
2. Para aumentar la altura, gire la pieza de la pata en sentido horario. Repita el procedimiento con todas las patas hasta que tengan la misma altura preferida.
3. Presione firmemente el centro del asiento para comprobar su estabilidad. Realice los ajustes necesarios para cerciorarse de que la silla de ducha está nivelada. (Figura 5)



Figura 5

Mantenimiento

Se recomienda realizar una inspección visual periódica de esta silla de ducha para cerciorarse de que todas las piezas y los herrajes estén afianzados, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deteriorados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, por favor comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

Limpieza

1. Límpielo con productos de limpieza comunes para el hogar. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia. Séquelo con un paño después de limpiarlo.
2. NO use polvos o limpiadores abrasivos ni esponjas para restregar.

Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour toute la durée d'utilisation par l'acheteur original. Ce produit a été construit conformément à des normes précises et a été soumis à une inspection rigoureuse avant son expédition. La présente garantie limitée est une expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et vous assure de nombreuses années de service pratique et fiable. Dans l'éventualité d'un défaut couvert par la présente garantie, nous pourrions, à notre entière discrétion, réparer ou remplacer le dispositif. La présente garantie ne couvre ni les défaillances causées par l'emploi inapproprié ou la négligence du propriétaire, ni l'usure ou la détérioration due à une utilisation normale. La garantie ne couvre pas non plus les composants non durables, telles que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, dont l'usure est normale et qui ont besoin d'être remplacés.

Garantía Limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui pourrait se glisser dans ce manuel. © Medline Industries, LP, 2021. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.

Medline United States | États Unis | Estados Unidos

1-800-MEDLINE (633-5463)

medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us | Suivez-nous | Sigamos

