



# GUARDIAN<sup>®</sup>

User's Guide | Manuel de  
l'utilisateur | Guía del usuario

## **Bariatric Transfer Bench Banc de transfert bariatrique Banco de**

**transferencia para  
pacientes bariátricos**



**Weight Capacity  
Capacité de poids de  
Capacidad de peso de  
600 lb (272 kg)**

REF G3-300BAX1

# General Warnings

To ensure the safe assembly and operation of this product, these instructions must be followed. **FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.** If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.

- DO NOT assemble and use this product without first reading and understanding this user's guide, otherwise injury or damage may occur.
- DO NOT use if components are missing or are damaged. Contact Medline at 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.
- DO NOT exceed weight capacity of 600 lb (272 kg).
- DO NOT make any adjustments while using the product.
- DO NOT stand on the product.
- DO NOT attempt to use the arm to fully support full body weight.

## Cautions

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the commode. Prior to use, ensure the following:

1. All push buttons are fully protruded and are properly engaged.
2. There are no loose, broken or missing components and ensure all parts are secure.
3. When using the backrest, ensure the product remains balanced. Excessive twisting or turning while seated on the bench may cause loss of balance and/or damage to the product.
4. All four legs touch the floor simultaneously at all times.
5. The tips on the leg extensions do not contain any rips, wear or are missing. Immediately replace missing or damaged tips.


# Assembly and Use

Frame is shipped partially assembled. If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly. Remove contents from box, making sure you have all parts described here:

- Backrest Assembly (1)
- Armrest (1)
- Leg Extensions with Suction Tips (4)
- Leg Extensions with Tips (2)



Figure 1

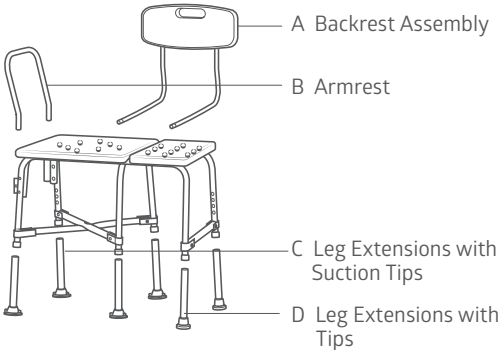

1. Insert a leg extension with suction tip on all four legs of the bench. Ensure the legs are adjusted to the same height. (Figure 2)



Figure 2

2. Insert a leg extension with tip on the side legs of the bench. Ensure the legs are adjusted to the same height. (Figure 3)



Figure 3

3. Insert the armrest onto the bench by depressing the push buttons and inserting them into the armrest holsters. Ensure the curved bar extends outward. (Figure 4)



Figure 4

4. Insert the backrest assembly onto the bench by depressing the push buttons and inserting them into the backrest holsters under the seat. (Figure 5)



Figure 5

Note: Ensure all push buttons are fully engaged and protruding out the holes.

## Adjusting leg height

Before using the bench, make sure all legs are set to the same preferred height.

1. To adjust leg height, depress the push button and slide each leg to desired height by aligning with proper holes and letting the pushbutton snap into the correct hole to lock leg in place.
2. Make sure legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.

# Maintenance

Periodic visual inspection of this bench is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and are not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part of mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

# Cleaning

1. Clean with regular household cleaning products. Use a non-abrasive cleaner with warm water. Wipe after cleaning.
2. DO NOT use abrasive powders, cleaners or scouring pads.

# Avertissements généraux

Suivez à la lettre les instructions suivantes pour un assemblage et une utilisation sécuritaires de ce produit.

## **LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUR L'UTILISATEUR OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.**

Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, ces précautions ou ce mode d'emploi, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.

- N'assemblez PAS et N'utilisez PAS ce produit sans avoir d'abord lu et compris le manuel de l'utilisateur. Il y a sinon un risque de blessure ou de dommages.
- N'utilisez PAS le produit s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées. Communiquez avec Medline au 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.
- NE dépassez PAS la capacité maximale de charge de 272 kg (600 lb).
- NE faites AUCUN réglage lors de l'utilisation du produit.
- NE montez PAS sur le produit.
- NE tentez PAS d'appuyer tout le poids du corps sur l'accoudoir.

## Mises en garde

Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité sont limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation de la chaise d'aisance. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

1. Assurez-vous que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et sont enclenchés.
2. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce et que toutes les pièces sont en bon état et bien serrées.
3. Lors de l'utilisation du dossier, vérifiez la stabilité du produit. Des rotations excessives de l'occupant peuvent déséquilibrer le banc et/ou l'endommager.
4. Les quatre pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps.
5. Les embouts des montants des pattes ne doivent pas être déchirés, usés ou manquants. Remplacez immédiatement tous les embouts manquants ou endommagés.


# Assemblage et utilisation

Le cadre est livré partiellement assemblé. Si la boîte a été exposée au froid, amenez le contenu à la température ambiante avant de procéder à l'assemblage. Videz la boîte de son contenu en vérifiant que toutes les pièces décrites sont présentes :

- Assemblage du dossier (1)
- Accoudoir (1)
- Montants des pattes avec ventouses (4)
- Montants des pattes avec embouts (2)



Figure 1

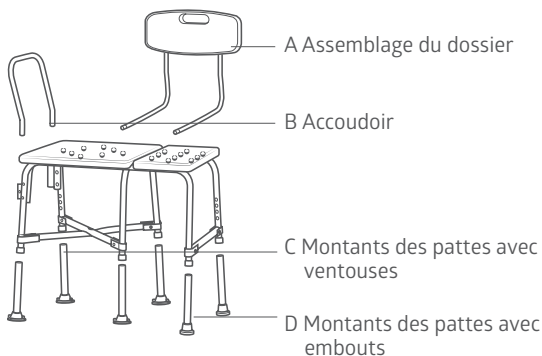

1. Insérez un montant de patte doté d'une ventouse dans chacune des quatre pattes du banc. Assurez-vous que les pattes sont réglées à la même hauteur. (Figure 2)
2. Insérez un montant de patte doté d'un embout dans chacune des deux pattes latérales du banc. Assurez-vous que les pattes sont réglées à la même hauteur. (Figure 3)
3. Installez l'accoudoir sur le banc en enfonçant les boutons-poussoirs tout en insérant les montants de l'accoudoir dans les supports. Assurez-vous que la barre incurvée est inclinée vers l'extérieur. (Figure 4)
4. Installez l'assemblage du dossier sur le banc en enfonçant les boutons-poussoirs tout en insérant les montants du dossier dans les supports situés sous le siège. (Figure 5)

Remarque : Veillez à ce que tous les boutons-poussoirs soient complètement insérés et en saillie dans les orifices.



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

# Réglage de la hauteur des pattes

Avant d'utiliser le banc, assurez-vous que toutes les pattes sont à la hauteur choisie.

1. Pour régler la hauteur des pattes, appuyez sur le bouton-poussoir de chaque patte et réglez la hauteur en l'alignant dans le trou correspondant, puis laissez le bouton-poussoir s'enclencher dans le trou choisi pour bloquer la patte en place.
2. Assurez-vous que les pattes sont verrouillées en poussant puis en tirant sur chacune.

## Entretien

Il est recommandé de procéder régulièrement à l'inspection visuelle du banc pour s'assurer que toutes les pièces et la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état de marche et ne sont pas usés, déchirés, effilochés ou lâches, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé. Si un composant du mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, n'utilisez pas le produit. Pour tout problème, communiquez avec Medline en appelant au 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

## Nettoyage

1. Utilisez des produits nettoyants ordinaires à usage domestique. Utilisez un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau tiède. Essuyez après le nettoyage.
2. N'utilisez PAS de poudres ou de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.

# Advertencias generales

Para garantizar el montaje y funcionamiento seguros del producto, deben seguirse estas instrucciones. **NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no entiende estas advertencias, precauciones y/o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, un distribuidor o con Medline antes de intentar usar este producto.

- NO monte ni use este producto sin antes haber leído y comprendido esta guía del usuario, de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños.
- NO lo use si faltan componentes o están dañados. Comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.
- NO exceda la capacidad de peso máxima de 600 lb (272 kg).
- NO realice ningún ajuste mientras usa el producto.
- NO se pare sobre el producto.
- NO intente usar el brazo para soportar el peso de todo el cuerpo.

## Precauciones

Los usuarios con fuerza física y/o movilidad limitada deben ser supervisados y/o asistidos cuando usen el banco de transferencia. Antes de usar el producto, cerciórese de lo siguiente:

1. Que todos los pulsadores sobresalgan completamente y estén bien encajados.
2. Que no haya componentes sueltos, rotos o faltantes y que todas las piezas estén bien ajustadas.
3. Al utilizar el respaldo, cerciórese de que el producto permanezca equilibrado. Torcer el cuerpo o girarlo excesivamente mientras se está sentado en el banco puede causar la pérdida de equilibrio y/o dañar el producto.
4. Que las cuatro patas toquen el piso simultáneamente en todo momento.
5. Que las conteras en las extensiones de las patas no estén rasgadas, agrietadas ni falten. Reemplace inmediatamente las conteras faltantes o dañadas.


# Montaje y uso

El armazón se envía parcialmente montado. Si el contenido se expone a temperaturas frías, deje que alcance la temperatura ambiente antes de completar el montaje. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas descritas aquí:

- Conjunto del respaldo (1)
- Reposabrazo (1)
- Extensiones de patas con conteras tipo ventosas (4)
- Extensiones de patas con conteras (2)



Figura 1

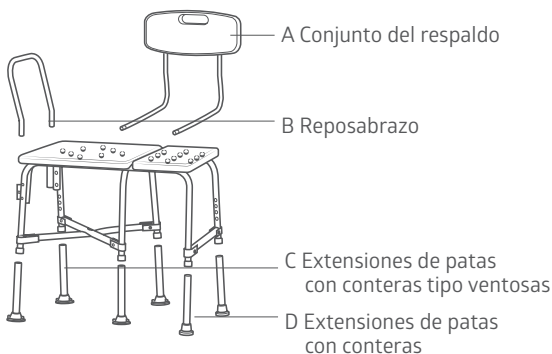

1. Inserte una extensión de pata con contera tipo ventosa en las cuatro patas del banco. Cerciórese de que las patas estén ajustadas a la misma altura. (Figura 2)
2. Inserte una extensión de pata con contera en las patas laterales del banco. Cerciórese de que las patas estén ajustadas a la misma altura. (Figura 3)
3. Inserte el reposabrazo en el banco oprimiendo los pulsadores e introduciéndolos en las fundas del reposabrazo. Cerciórese de que la barra curva se extienda hacia afuera. (Figura 4)
4. Inserte el conjunto del respaldo en el banco oprimiendo los pulsadores e introduciéndolos en las fundas del respaldo debajo del asiento. (Figura 5)

Nota: Cerciórese de que todos los pulsadores estén completamente encajados y sobresalgan de los orificios.



**Figura 2**



**Figura 3**



**Figura 4**



**Figura 5**

# Ajuste de la altura de las patas

Antes de usar el banco, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada.

1. Para ajustar la altura de las patas, oprima el pulsador y deslice cada pata a la altura deseada alineándola con los orificios adecuados y dejando que el pulsador encaje en el orificio correcto a fin de bloquear la pata en su lugar.
2. Cerciórese de que las patas estén bloqueadas en su lugar empujándolas hacia abajo y tirando de cada una hacia arriba.

## Mantenimiento

Se recomienda inspeccionar visual y periódicamente este banco para cerciorarse de que todas las piezas y los herrajes estén bien ajustados, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deteriorados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

## Limpieza

1. Limpie el banco de transferencia con productos de limpieza comunes para el hogar. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia. Séquelo con un paño después de limpiarlo.
2. NO use polvos o limpiadores abrasivos ni esponjas para restregar.

## Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as tip accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

## Garantie Limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et commode. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les embouts, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

## Garantía Limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, incluidos accesorios tales como conteras, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2022 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. ©2022 Medline Industries, LP. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2022 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.



**Medline Industries, LP,**  
Three Lakes Drive, Northfield, IL  
60093 USA  
Medline United States  
1-800-MEDLINE (633-5463)  
medline.com | info@medline.com

**Medline Canada**  
1-800-268-2848 | medline.ca |  
canada@medline.com  
**Medline México**  
01-800-831-0898 | medlinemexico.com |  
mexico@medline.com

Follow us  
Suivez-nous  
Siganos

